


# Intra-Compartmental Pressure Monitor System


## プレッシャー・モニター・システム

挿入針（側孔付）：組織液の圧力を平衡に保ちます。

生理食塩水を充填するだけですぐに使用できます。

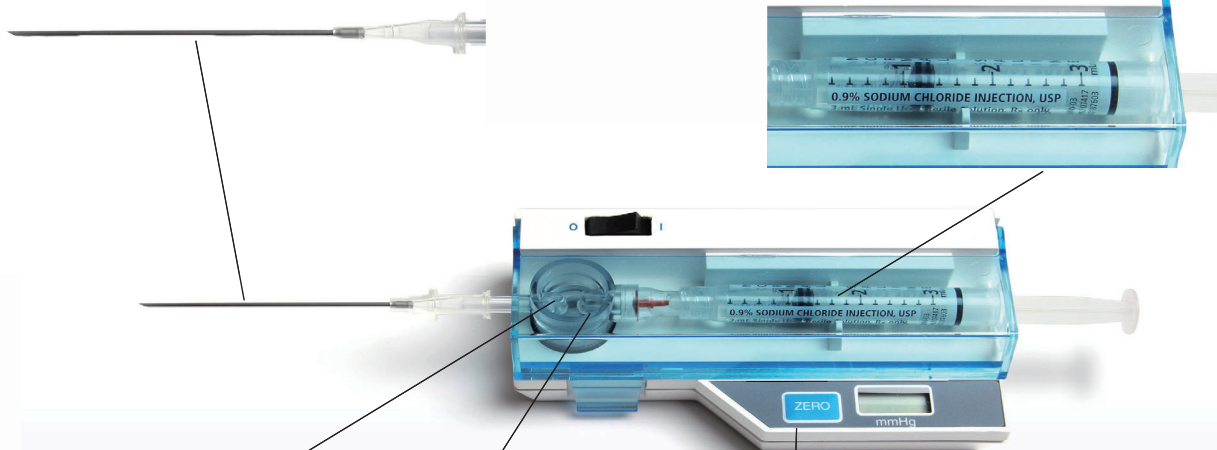

ダイアフラム・チャンバー  
液路を無菌に保ちます。

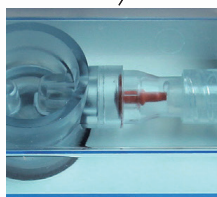

液体の逆流を防ぐ逆流防止  
弁付。



オートゼロ・バランス・ボタン：  
手操作でのゼロ調整が不要です。

デジタル表示（低電力インジケータ）：圧力をデジタル表示  
します。

本体の形状はあくまでイメージ画像となります。

カタログ番号	製品名	規格
0295-002-000JP	プレッシャーモニター チャンバー・ニードルセット	6 個入り

医療機器承認番号	販売名
20400BZY00184000	コンパートメント内圧モニターキット

## Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: IT1-108  
EA/SJ 0m 03/20

Copyright © 2020 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者  
**日本stryker株式会社**  
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.com/jp](http://www.stryker.com/jp)

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
[www.stryker.co.jp/mp2/](http://www.stryker.co.jp/mp2/)