


System 6™

Heavy Duty Blades

システム6 ヘビーデューティーブレード

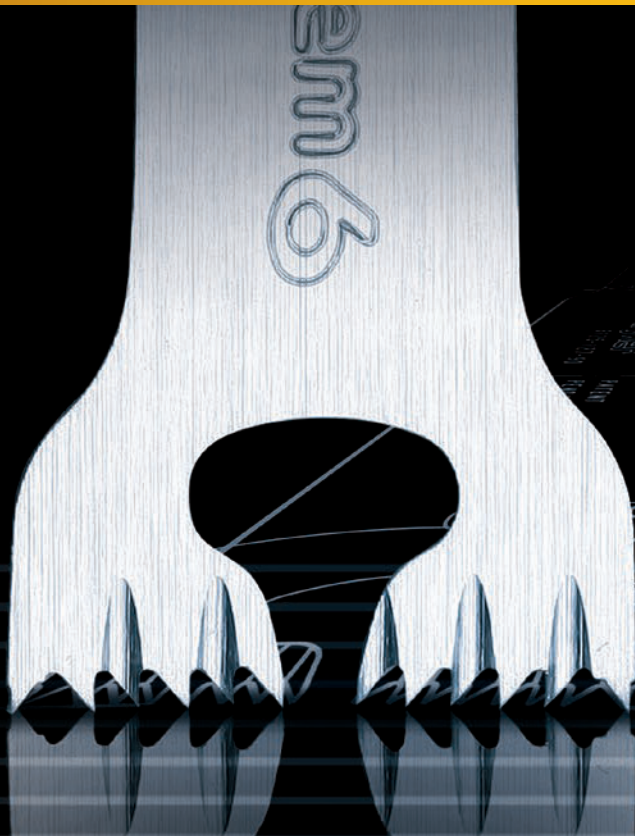

**Engineered for
High Performance**

**Faster
Smoother
Precise
Accurate Cuts**

6113 Blades

幅：13 mm / 長さ：100 mm



カタログ番号	厚さ
6113-127-100	1.27 mm
6113-137-100	1.37 mm

幅：13 mm / 長さ：90 mm



カタログ番号	厚さ
6113-089-090	0.89 mm
6113-107-090	1.07 mm
6113-119-090	1.19 mm
6113-127-090	1.27 mm
6113-137-090	1.37 mm
6113-147-090	1.47 mm

幅：13 mm / 長さ：75 mm



カタログ番号	厚さ
6113-127-075	1.27 mm

幅：13 mm / 長さ：60 mm



カタログ番号	厚さ
6113-127-060	1.27 mm


6118 Blades

幅：18 mm / 長さ：110 mm




カタログ番号	厚さ
6118-119-110	1.19 mm
6118-127-110	1.27 mm

幅：18 mm / 長さ：100 mm

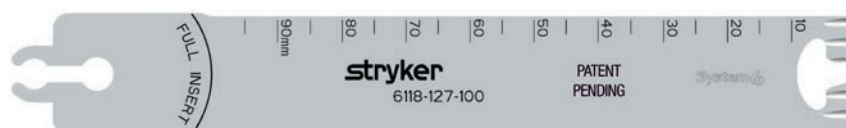

カタログ番号	厚さ
6118-119-100	1.19 mm
6118-127-100	1.27 mm
6118-137-100	1.37 mm

幅：18 mm / 長さ：90 mm

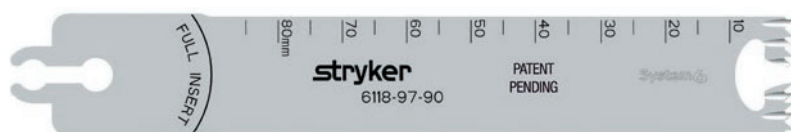

カタログ番号	厚さ
6118-089-090	0.89 mm
6118-097-090	0.97 mm
6118-119-090	1.19 mm
6118-127-090	1.27 mm
6118-137-090	1.37 mm

幅：18 mm / 長さ：75 mm



カタログ番号	厚さ
6118-089-075	0.89 mm
6118-127-075	1.27 mm

6118 Blades

幅：18 mm / 長さ：60 mm



カタログ番号	厚さ
6118-147-060	1.47 mm

6125 Blades

幅：25 mm / 長さ：110 mm



カタログ番号	厚さ
6125-100-110	1.00 mm
6125-137-110	1.37 mm

幅：25 mm / 長さ：100 mm



カタログ番号	厚さ
6125-127-100	1.27 mm
6125-137-100	1.37 mm

幅：25 mm / 長さ：90 mm



カタログ番号	厚さ
6125-089-090	0.89 mm
6125-097-090	0.97 mm
6125-107-090	1.07 mm
6125-119-090	1.19 mm
6125-127-090	1.27 mm
6125-137-090	1.37 mm
6125-147-090	1.47 mm

幅：25 mm / 長さ：75 mm



カタログ番号	厚さ
6125-089-075	0.89 mm

6213 Blades

幅：13 mm / 長さ：70 mm



カタログ番号	厚さ
6213-119-070	1.19 mm
6213-127-070	1.27 mm
6213-137-070	1.37 mm

6221 Blades

幅：21 mm / 長さ：90 mm



カタログ番号	厚さ
6221-100-090	1.00 mm
6221-119-090	1.19 mm
6221-127-090	1.27 mm
6221-137-090	1.37 mm
6221-147-090	1.47 mm

The Performance You Expect



ストライカー以外のカッティングアクセサリーを使用された場合、パワーツールを損傷する恐れがあるだけでなく、保証の対象外となります。



骨くず除去用スペース

面取りしたエッジ

- 軟部組織の保護—MISなどの小皮切に適しています
- カッティングブロックとの摩擦減少により、ばりの形成や磨損を低減



鋸刃の側面

ゼロオフセット

- ブレード厚さが全長で一定
- カッティングジグとのフィット性が向上し、正確な骨切を目指した設計
- 反りの低減

剛性

- たわみの低減
- 反りの低減

独特な鋸刃形状

- 骨くず除去のための穴を刃先の中心部分に配置
- 骨を除去しやすい鋸刃の向き
 - 外側の刃は骨くずを切除部から外へ押し出す
 - 内側の刃は中心方向を向いており、中心の隙間と骨くず除去用スペースに骨くずを押し込む



Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: IT1-113
YN/MI 2m 05/21

Copyright © 2021 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp