

Driving performance,
delivering versatility

Spetzler-Malis Bipolar Forceps

Spetzler-Malis
バイポーラフォーセップス



Spetzler-Malis® Disposable Non-Stick Bipolar Forceps

Spetzler-Malis バイポーラフォーセップスは、狭い術野での視野の向上に貢献します。また、先端は焦げ付きに配慮した設計となっています。

人間工学に基づいたシャフトデザインと強いバネ圧によるフィードバックで、操作性を高めている製品です。2006年より、スタンダードシリーズはニューロサージェリーを中心に展開し、イリゲーション機能付きの製品ラインも揃った多様性のあるバイポーラフォーセップスとなっております。

スプリング力により操作性、触知性を高めます

延長接続コードによる軽量化



バヨネット型による視界の向上

ガイドストップを取り除く事によるスリム化

狭い術野に適したスリムなデザイン

先端部が閉じていても、隙間ができる構造により、術野の視認性アップ

Slim




Irrigation Standard




ガイドストップ

イリゲーションの先端



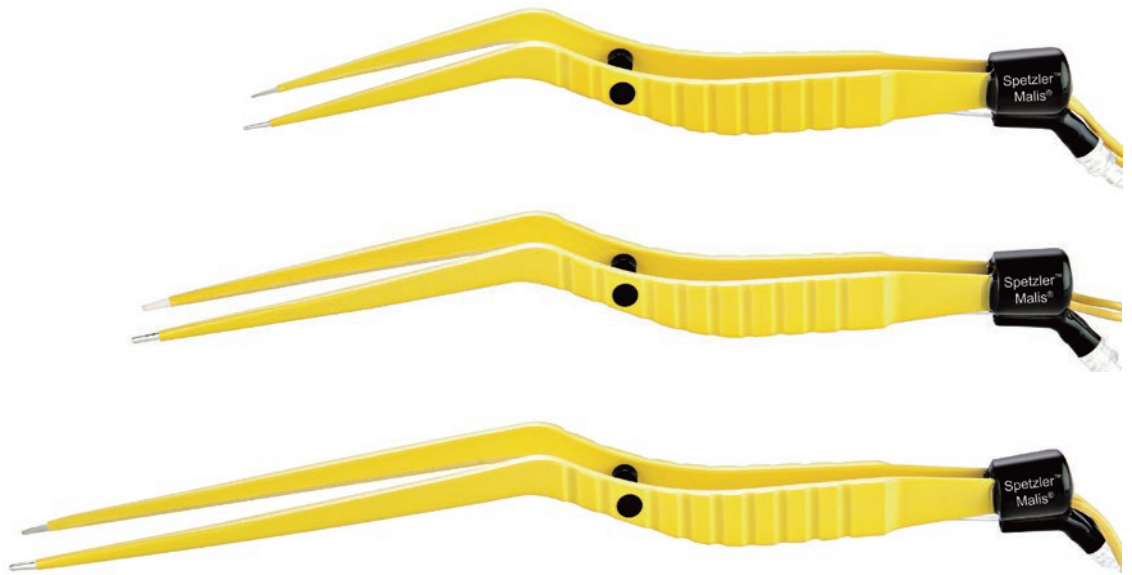


チップ：
凝固時の熱を素早く逃がし、焦げ付きや組織の
付着を抑えます

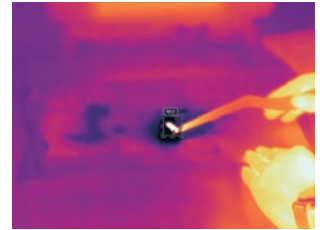

ノンスティック加工

単回使用によって焦げ付きや
シザリングに配慮

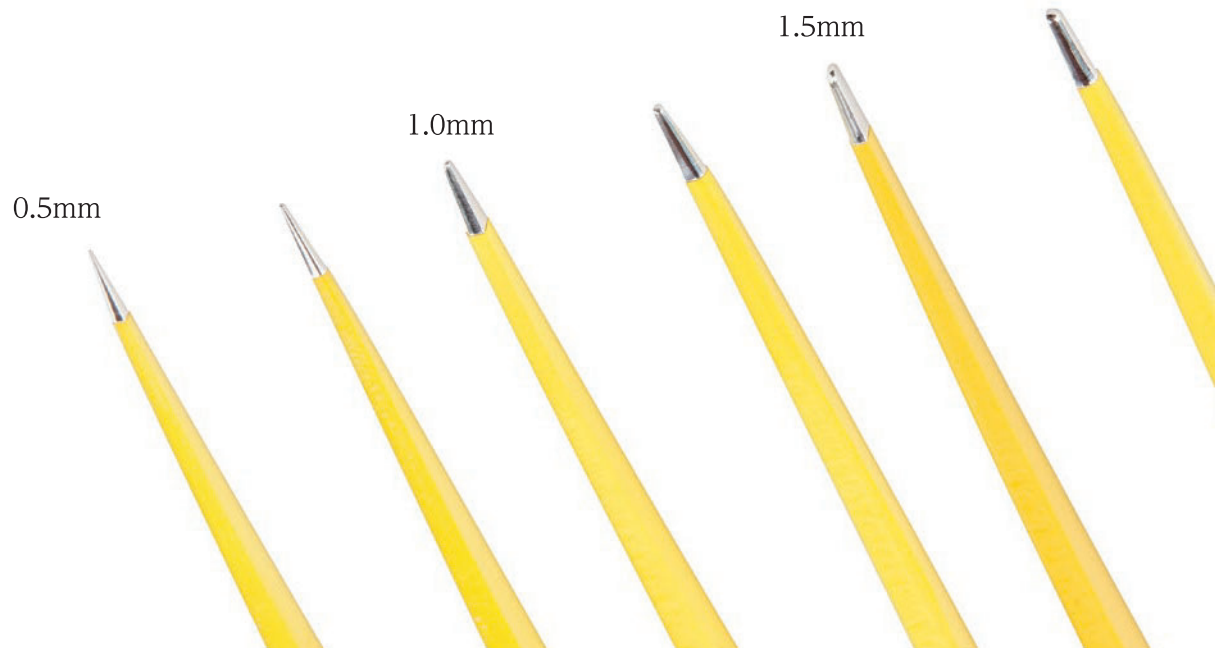

Disposable **Spetzler-Malis** Bipolar Forceps parts list

Spetzler-Malis バイポーラフォースェップス*1 (滅菌済 単回使用 5 本入)

医療機器認証 / 届出番号

販売名

*1 302AFBZX00038000

スペツラー マリス バイポーラフォースェップス

*2 13B1X10209000890

バイポーラコード

18cm

6760-180-005	チップ幅 0.5mm
6760-180-010	チップ幅 1.0mm
6760-180-015	チップ幅 1.5mm

20cm

6760-200-005	チップ幅 0.5mm
6760-200-010	チップ幅 1.0mm
6760-200-015	チップ幅 1.5mm

23cm

6760-230-005	チップ幅 0.5mm
6760-230-010	チップ幅 1.0mm
6760-230-015	チップ幅 1.5mm

Spetzler-Malis バイポーラフォースェップス イリゲーション*1 (滅菌済 単回使用 5 本入)

18cm

6770-180-005	チップ幅 0.5mm
6770-180-010	チップ幅 1.0mm
6770-180-015	チップ幅 1.5mm

20cm

6770-200-005	チップ幅 0.5mm
6770-200-010	チップ幅 1.0mm
6770-200-015	チップ幅 1.5mm

23cm

6770-230-005	チップ幅 0.5mm
6770-230-010	チップ幅 1.0mm
6770-230-015	チップ幅 1.5mm

Spetzler-Malis バイポーラフォースェップス スリム*1 (滅菌済 単回使用 5 本入)

20cm

6780-200-005	チップ幅 0.5mm
6780-200-010	チップ幅 1.0mm
6780-200-015	チップ幅 1.5mm

23cm

6780-230-005	チップ幅 0.5mm
6780-230-010	チップ幅 1.0mm
6780-230-015	チップ幅 1.5mm

コード*2

6790-100-002	イリゲーションチューブ付バイポーラコード
6790-100-004	STRYKER MALIS イリゲータ用チューブ付バイポーラコード
6790-100-006	STRYKER MALIS バイポーラコード



Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: NE1-47
YN/MI 3m 09/20

Copyright © 2020 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp