

UHR

Universal Head Bipolar System

UHR バイポーラシステム




UHR Universal Head Bipolar System

多くの臨床成績^{1,2,3,4,5,6,7}を有する、UHR バイポーラシステム

特長

Dynamic Valgus アライメント

- ポジティブオフセット：アウターヘッドの中心を2mm オフセットさせることにより、荷重時にヘッドが外反方向に回転し、より大きな荷重面積を得ることが可能
- バイポーラカップの内側辺縁でのインピンジメントによる摩擦を低減するデザイン

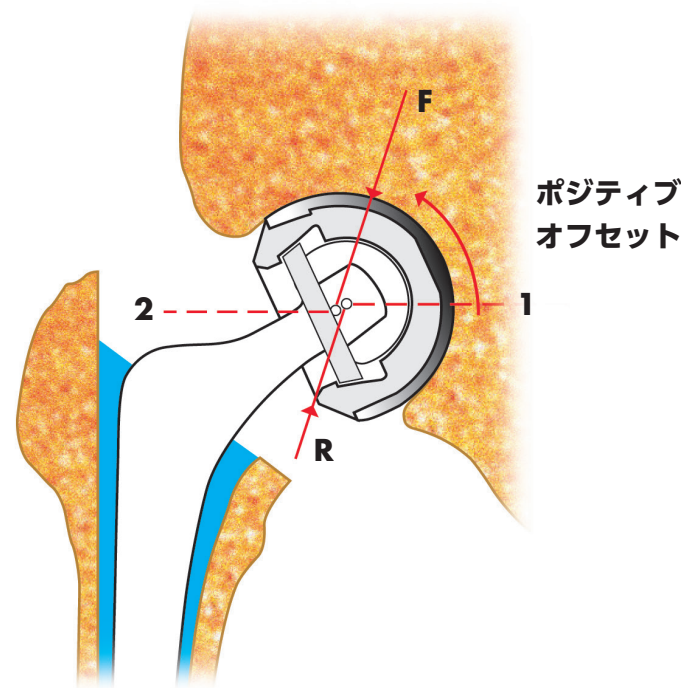

図表凡例

F：荷重 **1**：インナーヘッド中心
R：関節反力 **2**：アウターヘッド中心

操作が簡単な一体型ロック機構

少ない力で徒手的に組み立てが可能

カタログ番号一覧

外径	カタログ番号	骨頭サイズ
36mm	UH1-36-22	22mm 骨頭用
38mm	UH1-38-22	
40mm	UH1-40-22	
41mm	UH1-41-26	26mm 骨頭用
42mm	UH1-42-26	
43mm	UH1-43-26	
44mm	UH1-44-28	28mm 骨頭用
45mm	UH1-45-28	
46mm	UH1-46-28	
47mm	UH1-47-28	
48mm	UH1-48-28	
49mm	UH1-49-28	
50mm	UH1-50-28	
51mm	UH1-51-28	
52mm	UH1-52-28	
53mm	UH1-53-28	
54mm	UH1-54-28	
55mm	UH1-55-28	
56mm	UH1-56-28	
58mm	UH1-58-28	
61mm	UH1-61-28	

■はオプションサイズです。
 使用をご希望の場合はお早めにお問い合わせください。

参照

- Green S, Moore T, Proano F. Bipolar prosthetic replacement for the management of unstable intertrochanteric hip fractures in the elderly. *Clinical Orthopaedics and Related Research*. November 1987; 224:169-177.
- Bowman AJ Jr, Walker MW, Kilfoyle RM, O'Brien PI, McConville JF. Experience with the bipolar prosthesis in hip arthroplasty: A clinical study. *Orthopedics*. April 1985; 8(4): 460-467.
- Nottingham RL. Treatment of a femoral neck fracture with a Universal Hip Replacement: A case report. *Osteonics Clinical Case Reports*. 1983.
- Bernasek TL. Prosthetic replacement for extracapsular fractures of the hip. *Techniques in Orthopaedics*. 1989; 4(2): 49-55.
- Takaoka, K, et al. Bipolar prosthetic replacement for the treatment of avascular necrosis of the femoral head. *Clinical Orthopaedics and Related Research*. April 1992; 277: 121-127.
- Bochner RM, Pellicci PM, Lyden JP. Bipolar hemiarthroplasty for fracture of the femoral neck: Clinical review with special emphasis on prosthetic motion. *Journal of Bone and Joint Surgery*. August 1988; 70A(7): 1001-1010.
- Sarmiento A, Gerarard F. Total hip arthroplasty for failed endoprostheses *Clinical Orthopaedics and Related Research*. Nov/Dec. 1978; 137: 112-117.

医療機器承認番号 販売名
 23100BZX00092000 UHR バイポーラカップ

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良などの理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

® マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
 112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
 P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp

Literature Number:HE01-160_Rev1
 RM/SJ 3m 03/22

Copyright © 2022 Stryker
 Printed in Japan