

## ComfortGel SE

### Stretchermatras



**ComfortGel SE**  
**verbetert resultaten**  
**bij patiënten** dankzij  
drukverdeling en meer  
comfort.<sup>1</sup>


#### Wij verleggen de norm voor stretchermatrassen

Bij de ontwikkeling van de SE-reeks stretchermatrassen zijn we uitgegaan van een innovatief ontwerp gericht op pro-actieve preventie.

Bij het ontwerpen van het ComfortGel SE stond de ervaring van de patiënt centraal. ComfortGel SE biedt voorzieningen die specifiek zijn gericht op herverdeling van de druk en meer comfort voor de patiënt.

#### Kenmerken

- Bevordert de behandeling en preventie van decubitus
- De gel verschaft geheugenfunctionaliteit en duurzaamheid
- Hellend hielgedeelte bevordert drukvermindering op de hielen van de patiënt
- Dankzij het antislipmateriaal aan de onderkant is klittenband niet meer nodig
- Driezijdige rits, zodat zorgverleners de conditie van inwendige componenten grondiger kunnen inspecteren

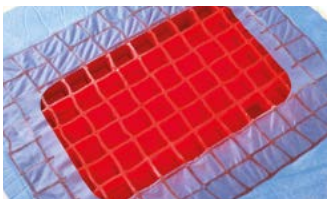

#### CoreGel-technologie

De ComfortGel SE verdeelt de druk in het sacrumgebied middels CoreGel-technologie. De CoreGel vormt zich naar de contouren van het lichaam en absorbeert daarmee het gewicht van de patiënt en zorgt voor een juiste drukverdeling.



#### Hoesontwerp

De hoes van de ComfortGel SE matras biedt extra weerstand tegen chemische stoffen. De naden zijn met HF geseald en een driezijdige rits waarborgt optimaal zicht bij controle van inwendige componenten.



#### Gelaste naden

Het is bekend dat matrasmaden vaak een bron van infectie vormen. Daarom zijn onze hoezen afgedicht met een speciale RF-lastechnologie die voorziet in een elektromagnetische hechting die het binnendringen en de infiltratie van vloeistoffen tegengaat.



#### Antislip onderkant

De onderkant van de ComfortGel SE is voorzien van antislipmateriaal voor betere infectiepreventie aangezien geen klittenband is gebruikt. De bevestiging op de stretcher tijdens beweging en transfer van de patiënt blijft daarbij gehandhaafd.

## ComfortGel SE

### Stretchermatras



#### Standaardkenmerken

- CoreGel-technologie
- Polycarbonaat polyurethaan hoes
- Gelaste naden
- Hellend hielgedeelte
- Driezijdige rits
- Antislip onderkant

#### Specificaties

<b>Modelnummer</b>	1805
<b>Totale breedte</b>	66 cm, 76 cm
<b>Totale lengte</b>	193 cm
<b>Dikte</b>	14 cm
<b>Draagvermogen</b>	317 kg
<b>Brandvertragende binnenhoes*</b>	Ja

\*Brandbaarheidsnormen: CALTB117; 16CFR1632; CGSB CAN 2-4.2 Methode 27.7-M77; BS EN 597-1; BS EN 597-2; CAL TB129; 16CFR1633; BS 6807, clause 9; BFD IX-11; UNI9175

Stryker behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

#### Garantie

Stryker Medical, een divisie van Stryker Corporation ("Stryker"), garandeert dat zijn model 1805 ComfortGel SE matras vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De garantiedekking van Stryker geldt uitsluitend voor de volgende artikelen bij normaal gebruik als volgt:

- Inwendige componenten: drie (3) jaar
- Brandvertraging: één (1) jaar
- Matrashoes: één (1) jaar

1. Aanbevolen voor implementatie in combinatie met de klinische evaluatie van risicofactoren en beoordelingen van de huid door een medische zorgverlener.

2. Optimaal bij gebruik in combinatie met een stretcher uitgerust met een rugleuning met LiftAssist

#### Dit document is uitsluitend bestemd voor medische zorgverleners.

Een medische zorgverlener moet altijd op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en adviseert dat medische zorgverleners worden getraind in het gebruik van elk specifiek product voordat zij dit bij een operatie gebruiken.

De verstrekte informatie is bedoeld om de grote verscheidenheid in het productaanbod van Stryker te laten zien. Een medische zorgverlener moet vóór het gebruik van een Stryker-product altijd de bijsluiter, het productetiket en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen.

De producten zijn mogelijk niet leverbaar op alle markten omdat de verkrijgbaarheid afhankelijk is van de regelgeving en/of de medische praktijk op de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen hebt over de leverbaarheid van Stryker-producten in uw regio.

Stryker Corporation of zijn divisies of andere gelieerde bedrijven zijn eigenaar van, gebruiken, of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handelsmerken of servicemerken: ComfortGel SE, CoreGel, ShearGel, Stryker. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaar of houder.

De hierboven vermelde producten hebben een CE-markering conform de geldende Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

Dit product is vervaardigd met de Intelli-Gel® hollebuisconfiguratie. Voor "Intelli-Gel®" is de vergunning verleend door EdiZONE, LLC uit Alpine, UT.



1362NL Versie B,0  
DFS 02/2017  
2016-12237