

## ComfortGel SE

Materac przeciwoodleżynowy do wózków



**Materac ComfortGel SE przyczynia się do poprawy wyników leczenia,** zapewniając równomierny rozkład ciśnienia i większy komfort pacjenta.<sup>1</sup>


### Zmieniamy standard materacy przeciwoodleżynowych do wózków

Kiedy tworzyliśmy serię materacy do wózków SE, koncentrowaliśmy się na wspomaganie proaktywnej profilaktyki.

Materac ComfortGel SE został zaprojektowany z myślą o całościowym samopoczuciu pacjenta. Jego określone funkcje wspomagają równomierny rozkład ciśnienia i zwiększają komfort pacjenta.

### Najważniejsze funkcje

- Wspomaga leczenie i profilaktykę odleżyn<sup>1</sup>
- Wypełnienie żelowe zapewnia pamięć kształtu i trwałość
- Nachylona część piętowa odciąża pięty pacjenta
- Antypoślizgowy materiał spodni eliminuje potrzebę stosowania rzepów
- Zamek błyskawiczny z trzech stron umożliwia personelowi dokładne sprawdzenie stanu wewnętrznych komponentów materaca

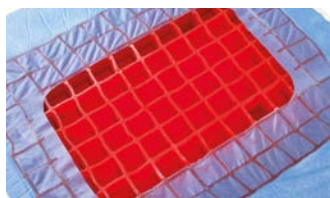

### Technologia CoreGel

Materiał CoreGel w okolicy krzyżowej odkształca się, zapobiegając przesuwaniu się pacjenta.<sup>2</sup> Jego właściwości ułatwiają absorbowanie i rozproszenie ciężaru pacjenta, co wspomaga równomierny rozkład nacisku.




### Pokrowiec

Pokrowiec materaca ComfortGel SE ma podwyższoną odporność na chemikalia, zgrzewane szczelne szwy i zamek błyskawiczny z trzech stron dla lepszej widoczności podczas sprawdzania wewnętrznych elementów.



### Zgrzewane szwy

Ze względu na to, że szwy materacowe są częstym źródłem zakażeń, szwy w naszych pokrowcach są zgrzewane elektromagnetycznie w wysokiej częstotliwości, aby ograniczyć wnikanie cieczy i nasiąkanie.

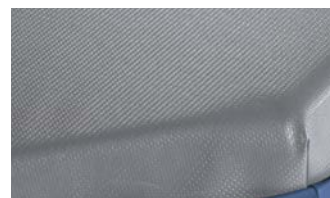

### Antypoślizgowy spód

Spód materaca ComfortGel SE wykonano z materiału antypoślizgowego dla poprawy profilaktyki zakażeń dzięki eliminacji rzepów, przy jednoczesnym zachowaniu przyczepności do wózka podczas poruszania się i przenoszenia pacjenta.

## ComfortGel SE

Materac przeciwodleżynowy do wózków



### Wyposażenie podstawowe

- Technologia CoreGel
- Pokrowiec z poliuretanu poliwęglanowego
- Zgrzewane szwy
- Nachylenie części piętowej
- Zamek błyskawiczny z trzech stron
- Antypoślizgowy spód

### Dane techniczne

<b>Numer modelu</b>	1805
<b>Szerokość całkowita</b>	66 cm / 76 cm
<b>Długość całkowita</b>	193 cm
<b>Wysokość</b>	14 cm
<b>Udźwig</b>	317 kg
<b>Niepalna powłoka wewnętrzna*</b>	Tak

\*Normy palności: CALTB117; 16CFR1632; CGSB CAN 2-4.2 Metoda 27.7-M77; BS EN 597-1; BS EN 597-2; CAL TB129; 16CFR1633; BS 6807, Klauzula 9; BFD IX-11; UNI9175

Firma Stryker zastrzega prawo do zmiany parametrów technicznych bez powiadomienia.

### Gwarancja

Firma Stryker Medical należąca do Stryker Corporation („Stryker”), gwarantuje, że materac przeciwodleżynowy ComfortGel SE, Model 1805 jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja Stryker obejmuje wyłącznie poniższe elementy podczas normalnego użytkowania:

- Elementy wewnętrzne: 3 (trzy) lata
- Powłoka ognioodporna: 1 (jeden) rok
- Pokrowiec materaca przeciwodleżynowego: 1 (jeden) rok

1. Zaleca się stosowanie łącznie z kliniczną oceną czynników ryzyka i kontrolą stanu skóry przez pracownika ochrony zdrowia.

2. Najlepiej stosować łącznie z noszami wyposażonymi we wspomaganą regulację oparcia pleców Lift Assist Backrest.

**Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.**

Podjęcie decyzji o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu.

Celem przedstawionych informacji jest prezentacja rodziny produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek produktu firmy Stryker personel medyczny musi się zapoznać z ulotką informacyjną, etykietami lub instrukcjami dotyczącymi produktu.


Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: ComfortGel SE, CoreGel, ShearGel i Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Prezentowane produkty oznaczono symbolem CE zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.



1362PL Rew. B.0  
DFS 04/2017  
2017 12237

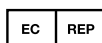

Stryker Polska sp. z o.o.  
Poleczki 35  
02-822 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 429 55 50  
Faks: +48 22 429 55 60

Copyright © 2017 Stryker

www.stryker.com