

ComfortGel SE

Superfície de apoio para maca



O ComfortGel SE ajuda a melhorar os resultados para o doente através da redistribuição da pressão e de um maior conforto.¹


Ajudar a transformar o padrão das superfícies de apoio para macas

Quando desenvolvemos a série SE de superfícies para macas, focámos o nosso desenho na ajuda à prevenção proativa.

A ComfortGel SE foi desenvolvida a pensar na experiência global do doente e integra características específicas que ajudam a redistribuir a pressão e a melhorar o conforto do doente.

Principais características

- Ajuda no tratamento e na prevenção de úlceras de pressão¹
- O desenho do gel proporciona memória e durabilidade
- A secção final inclinada ajuda a diminuir a pressão nos calcanhares dos doentes
- O material do fundo antideslizante elimina a necessidade de Velcro
- O fecho de correr em três lados ajuda os prestadores de cuidados a inspecionar mais facilmente o estado dos componentes internos

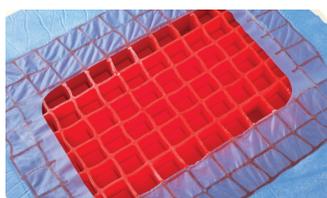

Tecnologia CoreGel

Localizada na região sacral, a CoreGel cria uma bolsa de posicionamento para ajudar a prevenir a migração do doente.² O seu desenho ajuda a absorver e a dispersar o peso do doente, de modo a ajudar na redistribuição da pressão.



Desenho da cobertura

A cobertura da superfície da ComfortGel SE proporciona uma maior resistência a agentes químicos; costuras seladas a alta frequência e fecho de correr em três lados para melhor visibilidade durante as inspeções aos componentes internos.



Costuras seladas

Sabe-se que as costuras superficiais são uma zona problemática comum em termos de infeções; as nossas coberturas são seladas com um tipo específico de selagem por RF, que utiliza a ligação eletromagnética para limitar a entrada de líquidos e infiltrações.



Fundo antideslizante

O fundo do superfície ComfortGel SE integra um material antideslizante que ajuda a melhorar a prevenção de infeções através da eliminação do Velcro, enquanto mantém a fixação à maca durante a movimentação e a transferência do doente.

ComfortGel SE

Superfície de apoio
para maca



Características de série

- Tecnologia CoreGel
- Cobertura em poliuretano e policarbonato
- Costuras seladas
- Secção final inclinada
- Fecho de correr em três lados
- Fundo antidesslizante

Especificações

Número do modelo	1805
Largura total	66 cm, 76 cm
Comprimento total	193 cm
Espessura	14 cm
Peso suportado	317 kg
Cobertura interior retardadora de chamas*	Sim

*Normas de inflamabilidade: CALTB117; 16CFR1632; CGSB CAN 2-4.2 Método 27.7-M77; BS EN 597-1; BS EN 597-2; CAL TB129; 16CFR1633; BS 6807, Cláusula 9; BFD IX-11; UNI9175

A Stryker reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Garantia

A Stryker Medical, uma divisão da Stryker Corporation ("Stryker"), garante que esta superfície de apoio ComfortGel SE modelo 1805 não apresenta defeitos de material e de fabrico. A garantia da Stryker abrange apenas os seguintes itens durante uma utilização normal do seguinte modo:

- Componentes internos: 3 (três) anos
- Proteção contra incêndios: 1 (um) ano
- Cobertura da superfície de apoio: 1 (um) ano

1. Recomenda-se a implementação em conjunto com uma avaliação clínica dos fatores de risco e avaliações cutâneas realizadas por um profissional de saúde.

2. Recomenda-se a utilização em conjunto com macas equipadas com apoio de costas Lift Assist

Este documento destina-se a ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde.

Um profissional de cuidados de saúde deve confiar sempre no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um determinado produto no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes de o utilizarem numa cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respetivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: ComfortGel SE, CoreGel, ShearGel, Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou titulares.

Os produtos ilustrados têm a marca CE em conformidade com as regulamentações e diretivas da UE.

Este produto foi formulado com configuração de coluna oca Intelli-Gel®. "Intelli-Gel®" licenciado pela EdizONE, LLC da Alpine, UT.



1362PT Rev. B.0
DFS 03/2017
2016-12237

Copyright © 2017 Stryker
www.stryker.com