


Ultra Comfort SE

Surface de soutien
pour brancard

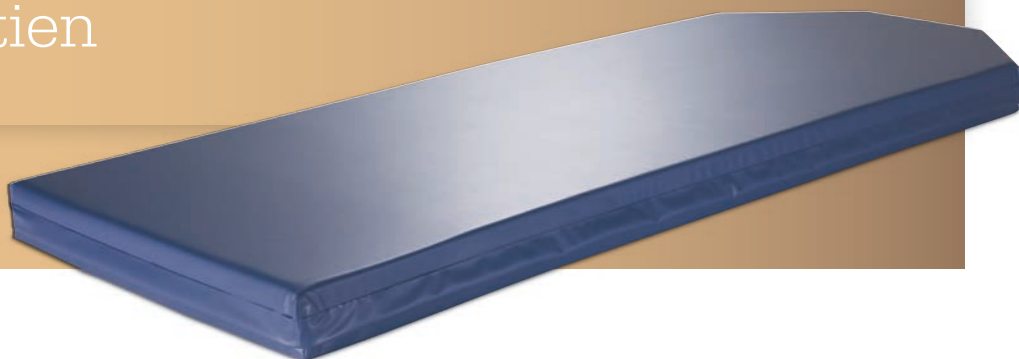

Nous avons développé la gamme SE de surfaces pour brancard en nous concentrant tout particulièrement sur la prévention proactive.

Conçue dans le souci de l'expérience globale des patients, la surface de soutien Ultra Comfort SE offre des caractéristiques spécifiques propres à améliorer leur résultats.¹

Caractéristiques clés

- Housse en polycarbonate et polyuréthane* pour une résistance chimique améliorée
- Coutures soudées RF limitant la pénétration des fluides et les infiltrations
- Fermeture zippée sur trois côtés permettant d'inspecter l'état des éléments internes
- Capacité de charge de 317 kg
- Compatible avec la radiographie



Compatible avec nos brancards

La conception et l'épaisseur de la surface de soutien Ultra Comfort SE permettent de l'adapter aux brancards Stryker.



Coutures soudées

Les coutures constituent une porte d'entrée courante pour les infections. La housse Ultra Comfort SE est rendue étanche par un procédé spécifique de soudure RF qui limite la pénétration des liquides et les infiltrations par adhérence électromagnétique.



Fermeture zippée sur trois côtés

Les professionnels de santé peuvent dorénavant inspecter les éléments internes de leur surface pour brancard grâce à une fermeture zippée sur trois côtés.



Durabilité

La housse de la surface de soutien Ultra Comfort SE est conçue pour être facile à utiliser, en particulier au cours des processus d'entretien et de soins.

Ultra Comfort SE

Surface de soutien pour brancard



Caractéristiques standards

- Housse en polycarbonate et polyuréthane*
- Coutures soudées
- Fermeture zippée sur trois côtés
- Barrière coupe-feu
- Capacité de charge de 317 kg
- Compatible avec les brancards Stryker

Caractéristiques techniques

Référence	1703-034-301	1704-034-301	1704-034-601
Largeur totale	76 cm	76 cm	66 cm
Longueur totale	193 cm	193 cm	193 cm
Épaisseur	7,6 cm	10 cm	10 cm
Capacité de charge	317 kg	317 kg	317 kg

Normes d'allumabilité pour la housse en polycarbonate et polyuréthane : BS EN 597-1 ; BS EN 597-2

Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

Garantie

Stryker Medical, division de Stryker Corporation (« Stryker »), garantit sa surface de soutien Ultra Comfort SE, référence 1703 et 1704, contre les défauts matériels et vices de fabrication. La garantie de Stryker couvre uniquement les éléments ci-après dans le cadre d'une utilisation normale :

- Intérieur : un (1) an
- Barrière coupe-feu : un (1) an
- Housse de la surface de soutien : un (1) an

1. Utilisation recommandée en association avec une évaluation clinique des facteurs de risque et des examens cutanés réalisés par un professionnel de santé.

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les chirurgiens soient formés à l'utilisation de tout produit spécifique avant son utilisation dans une intervention chirurgicale.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de la santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation (si applicable) avant d'employer tout produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, Ultra Comfort SE. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.

La surface Ultra Comfort SE est un dispositif médical de classe I. La matelas Ultra Comfort SE est prévu pour être utilisé en tant que surface de soutien du patient lors d'un transfert en brancard. Ce produit n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.

OTHMED-SS-15_13786FR

DFS 07/2017

2017-14123

Copyright © 2017 Stryker
stryker.com



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue Portage,
MI 49002 USA

Distribué par :

Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan,
France

t : +33 4 72 45 36 00

f : +33 4 72 45 36 99

333 710 275 RCS Lyon

Capital social: 27 495 520 EUR