


Gynnie

Brancard de gynécologie obstétrique




Facilité d'utilisation. Polyvalence. Commodité.

Le brancard Gynnie associe les fonctions des brancards standards de Stryker à des fonctionnalités de gynécologie obstétrique. C'est un brancard multifonction conçu pour les examens pelviens, qui convient également à une utilisation générale.

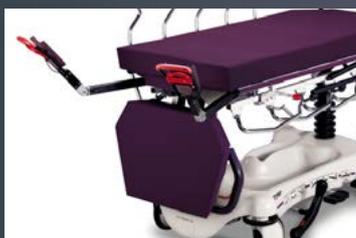

Conversion pour examen pelvien

Trois étapes permettent de convertir le brancard en table d'examen pelvien avec étriers à verrouillage automatique.

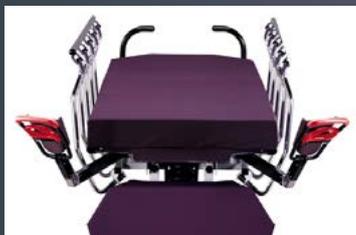

Surface de soutien Ultra Comfort de 10 cm

Les jointures thermosoudées limitent l'accumulation de liquides.



Barrières escamotables

Se tirent et se relèvent pour le confort de la patiente et offrent une surface ininterrompue pour le transfert en position abaissée.

Une cinquième roue escamotable améliore la mobilité.

Des éléments fixes limitent les pertes de temps pour les soignants.

Repose-jambes en option.

Double piètement hydraulique pour aider à stabiliser le brancard.

Freins à anneaux d'acier aux quatre roues avec pédale de chaque côté ainsi qu'à la tête du brancard.

Gynnie

Brancard de gynécologie obstétrique



Caractéristiques standards

- Matelas Ultra Comfort 10 cm avec jointures soudées
- Roues Omni Surface 20 cm avec cache-roues
- Largeur de matelas de 66 cm
- Relève-buste pneumatique à double vérin
- Double piètement hydraulique à descente constante
- Système hydraulique à commande bilatérale au pied
- Cinquième roue directionnelle escamotable
- Freins à anneaux d'acier aux quatre roues avec pédales bilatérales et coté tête
- Barrières escamotables
- Plateau de rangement intégré avec support pour obus à oxygène
- Relève-jambes rabattable inamovible
- Repose-pieds permanents
- Poignées de poussée rabattables
- Roues d'amortissement
- Deux supports pour tiges porte-sérum
- Levier pour débrayer d'une seule main la section pieds

Caractéristiques techniques

Référence	1061
Longueur totale	205,7 cm
Largeur totale	
Barrières relevées	80 cm
Barrières abaissées	71 cm
Capacité de charge	227 kg
Hauteur variable (jusqu'au plan de couchage)	
Position haute	90,8 cm
Position basse	55,5 cm
Positionnement du plan de couchage	
Relève-buste	0° à 90°
Section pieds	0° à 90°
Déclive/proclive	± 18°
Angle maximum	87,5°
Matelas	66 x 191,5 cm
Barrières latérales	34 x 99 cm
Diamètre des roues	20 cm
Point de séparation avec le mur	172,7 cm

Options

- Arceau pour bac de récupération
- Sangles de maintien
- Plateau de service/instruments
- Coussins de barrières
- Tiges porte-sérum
- Fixes et rabattables à double ou triple longueur au pied
- Amovibles
- Support vertical pour obus à oxygène

Medical

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit spécifique avant son utilisation dans une intervention chirurgicale.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation ou ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Gynnie, Ultra Comfort, Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.

Le brancard Gynnie est un Dispositif Médical de classe 1. Le brancard de gynécologie-obstétrique Gynnie modèle 1061 de Stryker est un brancard qui comporte une plate-forme, prévu pour assurer le transport des patientes tout en fournissant une plate-forme pour le traitement ou l'examen clinique des patientes au sein d'un établissement de santé. Le produit décrit dans ce document n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.

Ce document n'est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA.



01262005FR-BL
SDL 12/2018
2018_17758

Copyright © 2018 Stryker



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 USA

Distribué par :

Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan
France

t : +33 4 72 45 36 00
f : +33 4 72 45 36 99

333 710 275 RCS Lyon