


Gynnie

wózek ginekologiczny



Łatwy w użyciu. Wielofunkcyjny. Praktyczny.

Wózek Gynnie łączy trwałość i cechy standardowych wózków firmy Stryker z funkcją fotela ginekologicznego. Ten wielofunkcyjny wózek został zaprojektowany z myślą o badaniach ginekologicznych, ale może być także używany do zastosowań ogólnych.

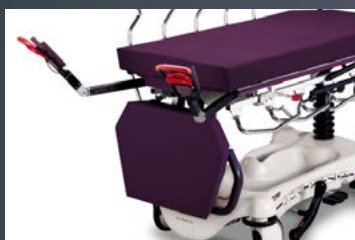

Przystosowanie do badania ginekologicznego

Pozycję do badania ginekologicznego z samoblokującymi się strzemiionami można ustawić w trzech łatwych krokach.



Materac przeciwdoleźnyowy Ultra Comfort 10 cm

Zgrzewane szwy zapobiegają wnikaniu płynów.



Poręcze Glideaway

Podnoszone i opuszczane poręcze dla wygody pacjenta. Poręcze w pozycji obniżonej umożliwiają transfer bez odstępu.

Unoszone i opuszczone piąte koło

poprawia mobilność.

Elementy mocowane na stałe oszczędzają czas personelu.

Opcjonalne podparcie łydek.

Dwukolumnowy system hydrauliczny w podstawie pomaga zapewnić odpowiednią stabilność.

Hamulce w czterech kołach ze stalowymi pierścieniami oraz sterowaniem z obydwu stron wózka i od strony głowy poprawiają bezpieczeństwo platformy i zapewniają lepszy dostęp.

Gynnie

wózek ginekologiczny



Wyposażenie podstawowe

- Materac przeciwoleżynowy Ultra Comfort 10 cm (4 cale) ze zgrzewanymi szwami
- Koła Omni Surface o średnicy 20 cm (8 cali) z osłonami
- Leże o szerokości 66 cm (26 cali)
- Oparcie pleców z dwucylindrowym systemem pneumatycznym
- Dwukolumnowy system hydrauliczny w podstawie z funkcją stałego obniżania
- Podwójny system hydrauliczny ze sterowaniem nożnym po obu stronach wózka
- Piąte koło kierunkowe (unoszone/opuszczane)
- Hamulce w czterech kołach ze stalowymi pierścieniami oraz sterowaniem z obydwu stron wózka
- Poręcze Glideaway
- Zintegrowana taca z uchwytem na butlę tlenową
- Zamocowana na stałe, opuszczana część nożna wózka
- Zamocowane na stałe podpórki na stopy
- Składane uchwyty do prowadzenia wózka
- Odbojniki rolkowe
- Dwa gniazda na płyny infuzyjne
- Dźwignia do opuszczania części nożnej wózka obsługiwana jedną ręką

Dane techniczne

Numer modelu	1061
Długość całkowita	205,7 cm
Szerokość całkowita	
Z podniesionymi poręczami	80 cm
Z opuszczonymi poręczami	71 cm
Udźwig	227 kg
Zakres wysokości (do wierzchu leża)	
Podniesione	90,8 cm
Opuszczone	55,5 cm
Regulacja leża	
Oparcie pleców	0°–90°
Podparcie kolan	0°–90°
Poz. Trendelenb./anty-Trendelenb.	± 18°
Maksymalny kąt	87,5°
Powierzchnia leża	66 x 191,5 cm
Poręcze	34 x 99 cm
Średnica kół	20 cm
Punkt składania od ściany	172,7 cm

Wyposażenie dodatkowe

- Otwór na miskę ginekologiczną
- Pasy do unieruchomienia pacjenta
- Taca na narzędzia/do podawania
- Miękkie wyściółki poręczy
- Wieszaki na płyny infuzyjne
- Mocowane na stałe, składane, dwu- lub trójstopniowe, od strony nóg pacjenta
- Wyjmowane
- Pionowy uchwyt na butlę tlenową

Medical

Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Podjęcie decyzji o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregośkolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregośkolwiek z produktów firmy Stryker lekarz musi zapoznać się z ulotką informacyjną, etykietami oraz instrukcją użytkowania produktu.

Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: Gynnie, Ultra Comfort, Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Przedstawione produkty oznaczono symbolem CE zgodnie ze stosowanymi przepisami i dyrektywami UE.

Niniejsze materiały nie są przeznaczone do dystrybucji poza obszarem UE i ESWH.



01262005PL
SDL 12/2019
2017-16225



Stryker Medical
3800 E. Centre Ave., Portage
MI 49002 U.S.A



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
The Netherlands

Dystrybucja:
Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa, Polska
t. +48 22 429 55 50