


Gynnie

Camilla obstétrica/ ginecológica



Fácil de usar. Multifunción. Cómoda.

Gynnie combina la resistencia y las características de la camilla estándar de Stryker con funciones para obstetricia y ginecología. Esta camilla multifunción se ha diseñado para realizar exámenes pélvicos, pero también puede emplearse para otros usos generales.

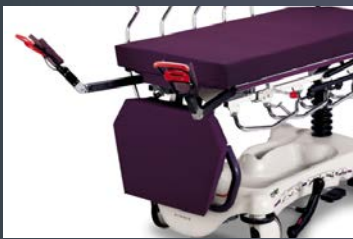

Conversión para examen pélvico

Con tres simples pasos, la camilla se cambia a una posición para examen pélvico con estribos autobloqueables.



Superficie de soporte Ultra Comfort de 10 cm

Las costuras termoselladas impiden la absorción de fluidos.



Barandillas laterales Glideaway

Se despliegan y repliegan para mayor comodidad del paciente y pueden bajarse para que no haya ningún hueco al transferir al paciente.

Quinta rueda retráctil que ayuda a mejorar la movilidad.

Partes fijas que ahorran tiempo a los profesionales sanitarios.

Soportes opcionales para las pantorrillas.

Doble pedestal hidráulico para reforzar la estabilidad.

Frenos de anillo de acero en las cuatro ruedas, montados a los dos lados y con activadores en el cabezal para fijar la plataforma y mejorar la accesibilidad.

Gynnie

Camilla obstétrica/ ginecológica



Características estándar

- Superficie de soporte Ultra Comfort de 10 cm con costuras selladas
- Ruedas Omni Surface de 20 cm con cubiertas de ruedas
- Superficie para el paciente de 66 cm de ancho
- Respaldo neumático de doble cilindro
- Doble pedestal hidráulico con descenso a velocidad constante
- Componentes hidráulicos controlados con el pie montados a los dos lados
- Dirección de quinta rueda retráctil
- Frenos de anillo de acero en las cuatro ruedas, montados a los dos lados y con activadores en el cabezal
- Barandillas laterales Glideaway
- Bandeja de almacenamiento integrada con soporte para botella de oxígeno
- Sección para los pies fija plegable
- Soportes para los pies fijos
- Asas de empuje desplegadas
- Parachoques en las ruedas
- Dos soportes para portasueros
- Palanca de liberación para la sección de los pies operable con una mano

Especificaciones

Número de modelo 1061

Longitud total 205,7 cm

Anchura total

Barandillas arriba 80 cm

Barandillas abajo 71 cm

Peso máximo soportado 227 kg

Intervalo de altura (hasta la parte superior de la camilla)

Alto 90,8 cm

Bajo 55,5 cm

Posición de la camilla

Respaldo 0°– 90°

Articulación Gatch para rodilla 0°– 90°

Inclinación/inclinación inversa ±18°

Ángulo máximo 87,5°

Superficie para el paciente 66 x 191,5 cm

Barandillas 34 x 99 cm

Diámetro de la rueda 20 cm

Separación de la pared 172,7 cm

Características opcionales

- Aro para el cuenco de drenaje
- Sujeciones para pacientes
- Bandeja para comida o instrumentos
- Almohadillas para barandillas
- Portasueros
- Fijo plegable en dos o tres tramos en los pies
- Extraíble
- Soporte vertical para botella de oxígeno

Medical

Este documento es solo para uso de profesionales de asistencia médica.

Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo en cirugía.

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe siempre consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker.

Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Por favor entre en contacto con su representante de Stryker para preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: Gynnie, Ultra Comfort, Stryker. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos.

Los productos representados llevan el marcado CE de acuerdo con las Normativas y Directivas aplicables en la UE.

Este material no está concebido para su distribución fuera de la UE y la AELC.



01262005ES

DLS 03/2018
2017-16225

Copyright © 2018 Stryker
stryker.com