

IsoFlex SE

Materac przeciwoodleżynowy do wózków



Właściwości materaca IsoFlex SE mają na celu eliminację najważniejszych przyczyn uszkodzeń skóry: **ciśnienia i siły tarcia.**


Zmieniamy standard materacy przeciwoodleżynowych do wózków

Kiedy tworzyliśmy serię innowacyjnych materacy do wózków SE, koncentrowaliśmy się na wspomaganie proaktywnej profilaktyki.

Funkcje materaca przeciwoodleżynowego IsoFlex SE firmy Stryker mają na celu eliminację najważniejszych czynników ryzyka uszkodzeń skóry, czyli ciśnienia i siły tarcia. Ponadto materac zwiększa komfort pacjenta oraz wspomaga leczenie i profilaktykę odleżyn.

Najważniejsze funkcje

- Wspomaga leczenie i profilaktykę odleżyn¹
- Połączenie technologii ShearGel, CoreGel i piankowej
- Konstrukcja z otwartymi kolumnami zapewnia pamięć kształtu, elastyczność i trwałość
- Specjalnie zaprojektowany pokrowiec oferuje większą odporność na chemikalia
- Nachylona część piętowa wspomaga odciążenie pięt pacjenta
- Zamek błyskawiczny z trzech stron umożliwia personelowi dokładne sprawdzenie stanu wewnętrznych komponentów materaca

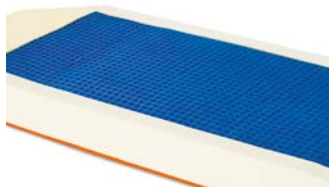

Technologia ShearGel

Materac IsoFlex SE ma warstwę Shear Gel, która eliminuje tarcie w miejscu kontaktu skóry pacjenta z powierzchnią materaca. Żel umożliwia dopasowanie materaca do ciała pacjenta i równomierne rozłożenie nacisku.



Technologia CoreGel

Materiał CoreGel w okolicy krzyżowej odkształca się, zapobiegając przesuwaniu się pacjenta.² Jego właściwości ułatwiają absorbowanie i rozproszenie ciężaru pacjenta, co wspomaga równomierny rozkład nacisku.



Zgrzewane szwy

Ze względu na to, że szwy materacowe są częstym źródłem zakażeń, szwy w naszych pokrowcach są zgrzewane elektromagnetycznie w wysokiej częstotliwości, aby ograniczyć wnikanie cieczy i nasiąkanie.



Antypoślizgowy spód

Spód materaca IsoFlex SE wykonano z materiału antypoślizgowego dla poprawy profilaktyki zakażeń dzięki eliminacji rzepów, przy jednoczesnym zachowaniu przyczepności do wózka podczas poruszania się i przenoszenia pacjenta.

IsoFlex SE

Materac przeciwoleżynowy
do wózków



Wyposażenie podstawowe

- Technologia ShearGel
- Technologia CoreGel
- Pokrowiec z poliuretanu poliwęglanowego
- Zgrzewane szwy
- Nachylenie części piętowej
- Zamek błyskawiczny z trzech stron
- Antypoślizgowy spód

Dane techniczne

Numer modelu	1806
Szerokość całkowita	76 cm
Długość całkowita	193 cm
Wysokość	14 cm
Udźwig	317 kg
Niepalna powłoka wewnętrzna*	Tak

*Normy palności: CALTB117; 16CFR1632; CGSB CAN 2-4.2 Metoda 27.7-M77; BS EN 597-1; BS EN 597-2; CAL TB129; 16CFR1633; BS 6807, Klauzula 9; BFD IX-11; UNI9175

Firma Stryker zastrzega prawo do zmiany parametrów technicznych bez powiadomienia.

Gwarancja

Firma Stryker Medical należąca do Stryker Corporation („Stryker”), gwarantuje, że materac przeciwoleżynowy IsoFlex SE, Model 1806 jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja Stryker obejmuje wyłącznie poniższe elementy podczas normalnego użytkowania:

- Elementy wewnętrzne: 3 (trzy) lata
- Powłoka ognioodporna: 1 (jeden) rok
- Pokrowiec materaca przeciwoleżynowego: 1 (jeden) rok

1. Zaleca się stosowanie łącznie z kliniczną oceną czynników ryzyka i kontrolą stanu skóry przez pracownika ochrony zdrowia.
2. Najlepiej stosować łącznie z noszami wyposażonymi we wspomaganą regulację oparcia pleców LiftAssist Backrest.

Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Podjęcie decyzji o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu.

Celem przedstawionych informacji jest prezentacja rodziny produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek produktu firmy Stryker personel medyczny musi się zapoznać z ulotką informacyjną, etykietami lub instrukcjami dotyczącymi produktu.


Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: ComfortGel SE, CoreGel, Isoflex SE, Lift Assist, ShearGel i Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Przedstawione produkty oznaczono symbolem CE zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.



1361PL Rew. B.0
DPS 04/2017
2017 12238

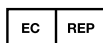

Stryker Polska sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 429 55 50
Faks: +48 22 429 55 60

Copyright © 2017 Stryker

www.stryker.com