

IsoFlex SE

Superfície de apoio
para maca



As características do IsoFlex SE destinam-se a prevenir as principais causas de feridas cutâneas: **pressão e cisalhamento.**


Ajudar a transformar o padrão das superfícies de apoio para macas

Quando desenvolvemos a série SE de superfícies para macas, focámos o nosso desenho inovador na ajuda à prevenção proativa.

A superfície de apoio IsoFlex SE da Stryker inclui características destinadas a ajudar a dar resposta aos fatores de risco de feridas cutâneas: pressão e cisalhamento. Além disso, a superfície melhora o conforto do doente e ajuda no tratamento e na prevenção de úlceras de pressão.

Principais características

- Ajuda no tratamento e na prevenção de úlceras de pressão¹
- Conjugação de ShearGel, CoreGel e tecnologia de espuma
- O desenho de coluna aberta proporciona memória, flexibilidade e durabilidade
- A cobertura especificamente concebida oferece uma maior resistência a agentes químicos
- A secção final inclinada ajuda a diminuir a pressão nos calcanhares dos doentes
- O fecho de correr em três lados ajuda os prestadores de cuidados a inspecionar mais cuidadosamente o estado dos componentes internos

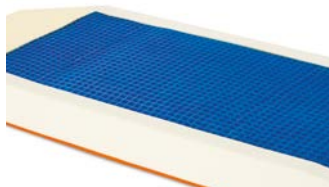

Tecnologia ShearGel

A IsoFlex SE integra uma camada de ShearGel para prevenir o cisalhamento no ponto de contacto entre a pele do doente e a superfície. Este gel permite a imersão do doente e a redistribuição do peso.



Tecnologia CoreGel

Localizada na região sacral, a CoreGel cria uma bolsa de posicionamento para ajudar a prevenir a migração do doente.² O seu desenho ajuda a absorver e a dispersar o peso do doente, de modo a ajudar na redistribuição da pressão.



Costuras seladas

Sabe-se que as costuras superficiais são uma zona problemática comum em termos de infeções; as nossas coberturas são seladas com um tipo específico de selagem por RF, que utiliza a ligação eletromagnética para limitar a entrada de líquidos e infiltrações.



Fundo antideslizante

O fundo do IsoFlex SE integra um material antideslizante que ajuda a melhorar a prevenção de infeções através da eliminação do Velcro, enquanto mantém a fixação à maca durante a movimentação e a transferência do doente.

IsoFlex SE

Superfície de apoio
para maca



Características de série

- Tecnologia ShearGel
- Tecnologia CoreGel
- Cobertura em poliuretano e policarbonato
- Costuras seladas
- Secção final inclinada
- Fecho de correr em três lados
- Fundo antideslizante

Especificações

Número do modelo 1806

Largura total 76 cm

Comprimento total 193 cm

Espessura 14 cm

Peso suportado 317 kg

Cobertura interior retardadora de chamas* Sim

*Normas de inflamabilidade: CALTB117; 16CFR1632; CGSB CAN 2-4.2 Método 27.7-M77; BS EN 597-1; BS EN 597-2; CAL TB129; 16CFR1633; BS 6807, Cláusula 9; BFD IX-11; UNI9175

A Stryker reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Garantia

A Stryker Medical, uma divisão da Stryker Corporation ("Stryker"), garante que esta superfície de apoio IsoFlex SE modelo 1806 não apresenta defeitos de material e de fabrico. A garantia da Stryker abrange apenas os seguintes itens durante uma utilização normal do seguinte modo:

- Componentes internos: 3 (três) anos
- Proteção contra incêndios: 1 (um) ano
- Cobertura da superfície de apoio: 1 (um) ano

1. Recomenda-se a implementação em conjunto com uma avaliação clínica dos fatores de risco e avaliações cutâneas realizadas por um profissional de saúde.
2. Recomenda-se a utilização em conjunto com macas equipadas com apoio de costas LiftAssist

Este documento destina-se a ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde.

Um profissional de cuidados de saúde deve confiar sempre no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um determinado produto no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes de o utilizarem numa cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respetivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: ComfortGel SE, CoreGel, IsoFlex SE, Lift Assist, ShearGel, Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou titulares.

Os produtos ilustrados têm a marca CE em conformidade com as regulamentações e diretivas da UE.



1361PT Rev. B.0
DFS 03/2017
2016-12238

Copyright © 2017 Stryker
www.stryker.com