


IsoTour™

Superfície de apoio
em gel

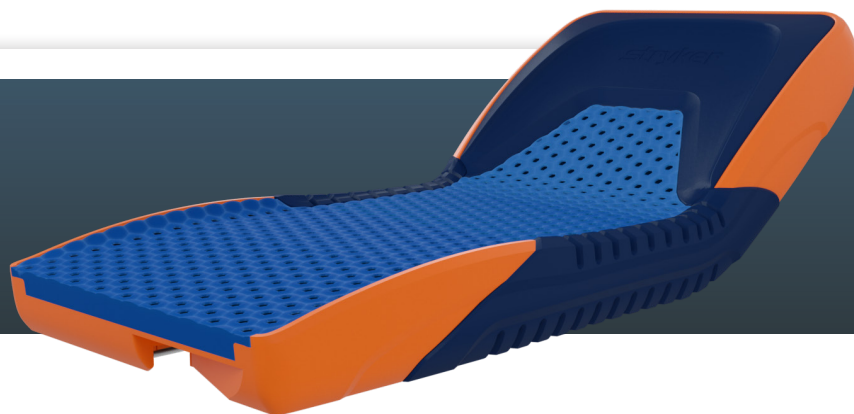

Apresentamos a nossa superfície de apoio avançada em gel.

O IsoTour é uma superfície de apoio em gel concebida para ajudar a evitar todos os graus de lesões por pressão, prevenindo os principais fatores de risco da formação de escaras: pressão, cisalhamento e humidade.

2,3 mil milhões€

As úlceras de pressão representam um encargo económico profundo em toda a Europa, com estimativas entre 1,4 e 2,1 mil milhões de libras no Reino Unido e entre 1 e 2,3 mil milhões de euros na Alemanha.¹

12,1%

Na Bélgica, 12,1% dos doentes hospitalizados sofrem de úlceras de pressão em ambientes hospitalares. Isto correspondente a 8,9%, 11% e 10,2% na França, na Alemanha e no Reino Unido, respetivamente.¹

>8500€

No Reino Unido, o custo médio do tratamento de feridas por um período de 12 meses no Serviço Nacional de Saúde variou entre 1400 £ para úlceras de categoria 1 e >8500 £ para úlceras de outras categorias.²

O IsoTour é principalmente composto por estruturas de gel que ajudam a redistribuir a pressão, curvando-se e absorvendo o peso do doente. A estrutura hexagonal alta e o design em gel/LAL promovem a subida do fluxo de ar através do colchão, diretamente por baixo do doente. Além disso, o contour gel (gel de contorno) é colocado em três regiões distintas para ajudar a aliviar a pressão em proeminências ósseas, bem como para melhorar o conforto.

IsoTour

Superfície de apoio em gel



Características de série

- Pressão constante graças à capa em Dartex
- Material patenteado em contour gel (gel de contorno) concebido para redistribuir a pressão, curvando-se e absorvendo o peso do doente
- Contour gel (gel de contorno) colocado em 3 (três) regiões
- Sem látex

Características adicionais

- Almofada de extensão para colchão em gel
- Anéis em D

Especificações

Número do modelo	2872
Extensão total	200,6 cm (79 pol.) ou 213,3 cm (84 pol.)
Largura global	88,9 cm (35 pol.)
Espessura	24,1 cm (9,5 pol.)
Carga de trabalho segura SWL	226,8 kg (500 lb)

Garantia

- 10 anos de garantia para a montagem na cama
- 3 anos de garantia para a capa do colchão

BIBLIOGRAFIA

1. Deloitte consulting. (2014). Do Healthcare Systems Promote the Prevention of Pressure Ulcers? Belgium. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/life-sciences-health-care/2014%20White%20papers_Pressure%20ulcers_A4-7.pdf
2. Guest, Fuller, Vowden, & Vowden. (2018). Cohort study evaluating pressure ulcer management in clinical practice in the UK following initial presentation in the community: costs and outcomes. BMJ Open, Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1136/bmjopen-2018-021769. <https://europepmc.org/articles/pmc6067374>

Este documento destina-se a ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde.

Um profissional de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide quanto à utilização de um produto particular no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes de o utilizarem numa cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respetivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: IsoTour, TruTurn, Contour Gel e Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou titulares.

Os produtos ilustrados têm a marcação CE em conformidade com as regulamentações e diretivas da UE.

Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre (European Free Trade Association — EFTA).



OTHEMED-BRO-134-EN-21483

2019-21483

stryker.com

SDL 01/2020

Copyright © 2020 Stryker

