

# Prime TC transportstoel

## Patiëntvervoer opnieuw gedefinieerd


Als het op de patiëntenervaring aankomt, zijn de details belangrijk. Daarom is ieder aspect van de Prime TC-transportstoel ontworpen om een verwelkomende en veilige omgeving te bieden voor zorgverleners, patiënten en hun familieleden. Duidelijke aanraakpunten zorgen voor een intuïtieve bediening voor alle gebruikers. BackSmart-ergonomie is geïntegreerd in het ontwerp om het buigen en strekken te verminderen dat wordt geassocieerd met letsels van zorgverleners. Een star frame helpt de duurzaamheid te verbeteren, terwijl het risico op diefstal wordt verminderd. Deze investering in het welzijn van patiënten en zorgverleners laat zien dat u geeft om hun comfort en veiligheid.



Omhoogklapbare voetsteunen helpen struikelrisico's te voorkomen bij het in- en uitstappen van de patiënt. De met de voet bedienbare Swing Away-functie verbetert de toegang tot de patiënt en maakt een nabijere positionering tot bedden, auto's of tafels mogelijk.



BackSmart-duwhandvaten dragen bij tot de veiligheid van de zorgverlener, doordat zorgverleners hun ellebogen in een ergonomische hoek van 90 graden kunnen plaatsen. De handvaten zijn geschikt voor zorgverleners van vrijwel iedere lengte.

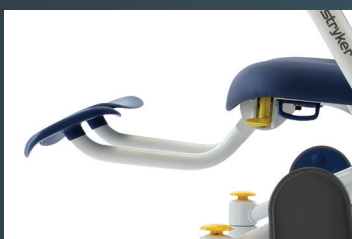

Optionele beensteunen worden permanent bevestigd om de benen comfortabel in hoogstaand te kunnen plaatsen. Gemakkelijk op te bergen wanneer de stoel niet wordt gebruikt.

**Meerdere kleuropties** mogelijk voor de IV-paal en ruggensteun voor herkenningdoeleinden.



**Big Wheel-manoeuvrbaarheid** aangepast naar 'vereenvoudigt' het sturen en nemen van bochten.

**De One-touch centrale rem** vermindert het buigen en strekken en vergroot tegelijkertijd de efficiëntie van de zorgverlener.

**Stand Assist-armsteunen** zorgen voor een verhoogd en verlengd aanraakpunt voor de patiënt tijdens het in- en uitstappen.

**Een star, stapelbaar frame** helpt diefstal te voorkomen, terwijl vloerooppervlak behouden blijft.

**Ontworpen voor reinigingsgemak** Het stoelframe bestaat uit naadloze onderdelen die eenvoudig kunnen worden gedesinfecteerd en onder hoge druk kunnen worden gereinigd.\*

**Gele activeringspunten** zorgen voor een intuïtieve bediening voor alle gebruikers.

**Verplaatsbare, maar niet verwijderbare onderdelen** helpen het risico op verloren of gestolen onderdelen te verminderen.

**De veilige gewichtscapaciteit van 227 kg** maakt zelfs gebruik voor zwaardere patiënten mogelijk.

**De duurzame IV-paal** is verchroomd om roest te voorkomen en beschikt over ingesloten haken voor de veiligheid.

**De staande zuurstoftankhouder** helpt het buigen en tillen te verminderen dat nodig is om een zware zuurstoftank onder de stoel te plaatsen.

\*Stoelen met de optionele, gevoerde zitting kunnen niet met een hogedrukreiniger worden gereinigd.

# Prime TC transportstoel



## Standaardkenmerken

- Stand Assist-armsteunen
- Swing Away omhoogklappende voetsteunen
- BackSmart-duwhandvaten
- One-touch centrale rem
- Anti-kantelwielen
- Dossierhouder
- Voorgevormd plastic, naadloos ontwerp
- Met hogedrukreiniger wasbaar\*
- Star stalen frame met poedercoating
- Stapelbaar ontwerp
- Gele activeringspunten
- Big Wheel-manoeuvereerbaarheid
- Niet-verwijderbare onderdelen

## Optionele accessoires

- Beensteunen
- Staande zuurstoftankhouder
- Verchroomde 2,5 cm (1 inch) dikke IV-paal
- Bovenkant IV-paal verkrijgbaar in zes kleuropties
- Urinezakhaken
- Gevoerde zitting\*
- Heupriem

\*Stoelen met de optionele, gevoerde zitting kunnen niet met een hogedrukreiniger worden gereinigd

## Specificaties

Modelnummer	1460
Totale lengte	102,1 cm
Totale breedte	71,8 cm
Breedte zitting	54,6 cm
Zithoogte	
Vanaf voetsteun	38,1 cm
Vanaf vloer	53,3 cm
Stoelhoogte	
Met IV-paal	185,4 cm
Zonder IV-paal	114,3 cm
Gripbereik duwhandvat	
Breedte	40,6 cm - 52,1 cm
Hoogte vanaf vloer	88,9 cm - 114,3 cm
Gewichtsbelasting	226,8 kg

## Garantie

Drie jaar op onderdelen, één jaar op arbeidsloon en reiskosten

## Medical

### Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Een professional in de gezondheidszorg moet altijd op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en adviseert dat professionals in de gezondheidszorg worden getraind in het gebruik van elk specifiek product voordat zij dit gebruiken.

De verstrekte informatie is bedoeld om het volledige aanbod van Stryker-producten te laten zien. Een medische zorgverlener moet vóór het gebruik van een Stryker-product altijd de bijsluiter, het productetiket en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Sommige producten zijn mogelijk niet verkrijgbaar op alle markten omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de registratie- en/of medische praktijk op de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen heeft over de beschikbaarheid van Stryker-producten in uw regio.

Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde bedrijven zijn eigenaar van, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handelsmerken of servicemerken: Prime TC en Stryker. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars of houders.

De beschreven producten zijn overeenkomstig de toepasselijke EU-regelgeving en -richtlijnen voorzien van de CE-markering.

Dit materiaal is niet bedoeld voor distributie buiten de EU en EFTA.



80707DEC2012NL Versie C.3  
SDL 11/2020  
2017-16174

Copyright © 2020 Stryker

stryker.com