

Prime TC


Fotel transportowy

Transportowanie pacjentów nabiera nowego znaczenia.


Jeśli chodzi o doświadczenia pacjentów, liczą się detale. Dlatego każdy szczegół fotela transportowego Prime TC został zaprojektowany, aby umożliwić stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy dla opiekunów, pacjentów i członków ich rodzin. Oczywiście rozwiązania mają sprawić, że obsługa stanie się intuicyjna dla wszystkich użytkowników. W trosce o bezpieczeństwo opiekunów w projekcie fotela zastosowano ergonomiczne rozwiązanie BackSmart, by zminimalizować konieczność schylania się i sięgania do elementów wyposażenia. Sztywna rama pomaga zwiększyć wytrzymałość, a jednocześnie służy jako zabezpieczenie przed kradzieżą. Inwestowanie w dobre samopoczucie pacjentów i komfort opiekunów jest istotne.



Odchylany podnóżek pomaga zmniejszyć ryzyko potknięcia się i zapewnia pacjentowi wolną przestrzeń do wejścia i zejścia z fotela. Obsługiwana stopą funkcja odchylania zwiększa dostęp do pacjenta oraz umożliwia bliższe ustawienie fotela względem łóżek, pojazdów lub stołów.

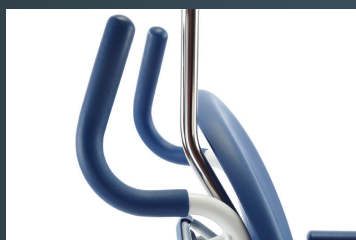

Uchwyty do pchania wózka BackSmart zwiększają bezpieczeństwo opiekuna pozwalając mu na zgięcie łokci pod ergonomicznym kątem 90 stopni. Ponadto są dostosowane do opiekunów każdego wzrostu.

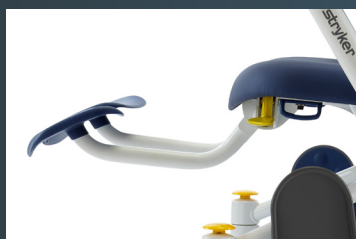

Opcjonalne podpórki na nogi przymocowane na stałe, mają na celu wygodne podparcie nóg, gdy powinny znajdować się w pozycji uniesionej. Kiedy nie są potrzebne, można je łatwo schować.

Wiele dostępnych opcji kolorystycznych umożliwia dostosowanie zaczepu na płyny infuzyjne i tabliczki z tyłu oparcia w celach identyfikacyjnych.



Dzięki **dużym kołom** sterowanie i pokonywanie zakrętów staje się łatwiejsze.

Hamulce centralne uruchamiane jednym dotknięciem redukują konieczność schylania się w kierunku elementów sterujących jednocześnie zwiększając skuteczność pracy opiekuna.

Podłokietniki wspomagające pozycję stojącą z regulacją wysokości i wysunięcia ułatwiają pacjentom wejście i zejście z fotela.

Sztywna rama z miejscem na kolejne elementy pomaga zapobiegać kradzieżom jednocześnie redukując zajmowaną ceną przestrzeń.

Projekt ułatwiający czyszczenie, rama fotela składa się z gładkich elementów, które można łatwo czyścić i myć myjkami ciśnieniowymi.*

Żółte dźwignie aktywacyjne sprawiają, że obsługa staje się intuicyjna dla wszystkich użytkowników.

Ruchome, ale nie zdejmowane elementy pomagają zredukować ryzyko zgubienia lub kradzieży części.

Bezpieczne obciążenie robocze 226,8 kg (500 funtów) jest odpowiednie nawet dla pacjentów o dużej masie ciała.

Wytrzymały wieszak na płyny infuzyjne jest chromowany, co zapobiega powstawaniu rdzy oraz posiada zaczepy bezpieczeństwa.

Pionowy uchwyt na butlę O₂ zmniejsza konieczność schylania i podnoszenia się przy umieszczeniu butli O₂ pod fotelem.

*Foteli z dodatkowym wyściełanym siedziskiem nie można czyścić myjką ciśnieniową.

Prime TC

Fotel transportowy



Wyposażenie podstawowe

- Podłokietniki wspomagające wstawanie
- Odchylany podnóżek z funkcją składania
- Uchwyty do pchania wózka BackSmart
- Hamulec centralny uruchamiany jednym dotknięciem
- Koła przeciwwyrotne
- Uchwyt na kartę pacjenta
- Wytłaczany plastik, projekt bezszwowy
- Możliwość czyszczenia myjkami ciśnieniowymi*
- Szttywna, stalowa rama pokryta ochronną farbą antykorozyjną nanoszoną proszkowo
- Konstrukcja umożliwiająca łatwe składowanie
- Żółte dźwignie aktywacyjne
- System manewrowania Big Wheel
- Części zamocowane na stałe

Wyposażenie dodatkowe

- Podpórki na nogi
- Poziomy uchwyt na butlę O₂
- Chromowany wieszak na płyny infuzyjne o średnicy 2,5 cm (1 cal)
- Górna część wieszaka infuzyjnego w sześciu opcjach kolorystycznych
- Wieszaki na worki na mocz
- Siedzisko z wyściółką*
- Pas biodrowy

*Fotele z dodatkowym wyścielonym siedziskiem nie można czyścić myjką ciśnieniową

Dane techniczne

Numer modelu	1460
Długość całkowita	102,1 cm
Szerokość całkowita	71,8 cm
Szerokość siedziska	54,6 cm
Wysokość siedziska	
Od podnóżka	38,1 cm
Od podłogi	53,3 cm
Wysokość fotela	
Z wieszakiem na płyny infuzyjne	185,4 cm
Bez wieszaka na płyny infuzyjne	114,3 cm
Zasięgi uchwytów do pchania	
Szerokość	40,6-52,1 cm
Wysokość od podłogi	88,9-114,3 cm
Udźwig	226,8 kg

Gwarancja

Trzy lata na części, rok na robociznę i transport.

Medical

Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Podjęcie decyzji o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek z produktów firmy Stryker lekarz musi zapoznać się z ulotką informacyjną, etykietami oraz instrukcją użytkowania produktu.

Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: [...] i Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Przedstawione produkty oznaczone symbolem CE zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.

Niniejsze materiały nie są przeznaczone do dystrybucji poza obszarem UE i ESWH.



80707DEC2012PL Rew. C.3
SDL 12/2019
2017-16174

Copyright © 2019 Stryker
stryker.com