

stryker

ProCeed™

Pat de spital

**Un epicentru
al îngrijirii
pacienților**





Între 40% și 80%

dintre asistentele medicale raportează simptome de stres psihologic, la nivel global.¹



78.740

de asistente medicale din Statele Unite suferă anual vătămări corporale sau boli la locul de muncă.²



Între 40 și 50%


dintre asistentele medicale raportează apariția durerilor de spate de-a lungul carierei lor.³



Conceput pentru **durabilitate**. Conceput pentru **îngrijire**. Conceput pentru **ușurință**. Conceput pentru **dvs.**

Paturile de spital nu sunt doar mobilier – acestea joacă un rol cheie în revenirea pacientului la starea de sănătate. În fața unui număr insuficient de asistente medicale la nivel mondial și în fața fenomenului de epuizare a personalului,⁴ este esențial ca echipamentul dvs. nu numai să suporte volumul de muncă neîncetat, ci și să ofere o experiență intuitivă și directă pentru personalul care se bazează pe acesta.

Faceți cunoștință cu ProCeed — un centru pentru asistență medicală,
experiență îmbunătățită pentru asistente, personal și pacienți deopotrivă. Proiectat alături de clinicieni din întreaga lume pentru durabilitate și posibilitate de curățare eficace, ProCeed vă ajută să oferiți o îngrijire eficientă și de calitate.

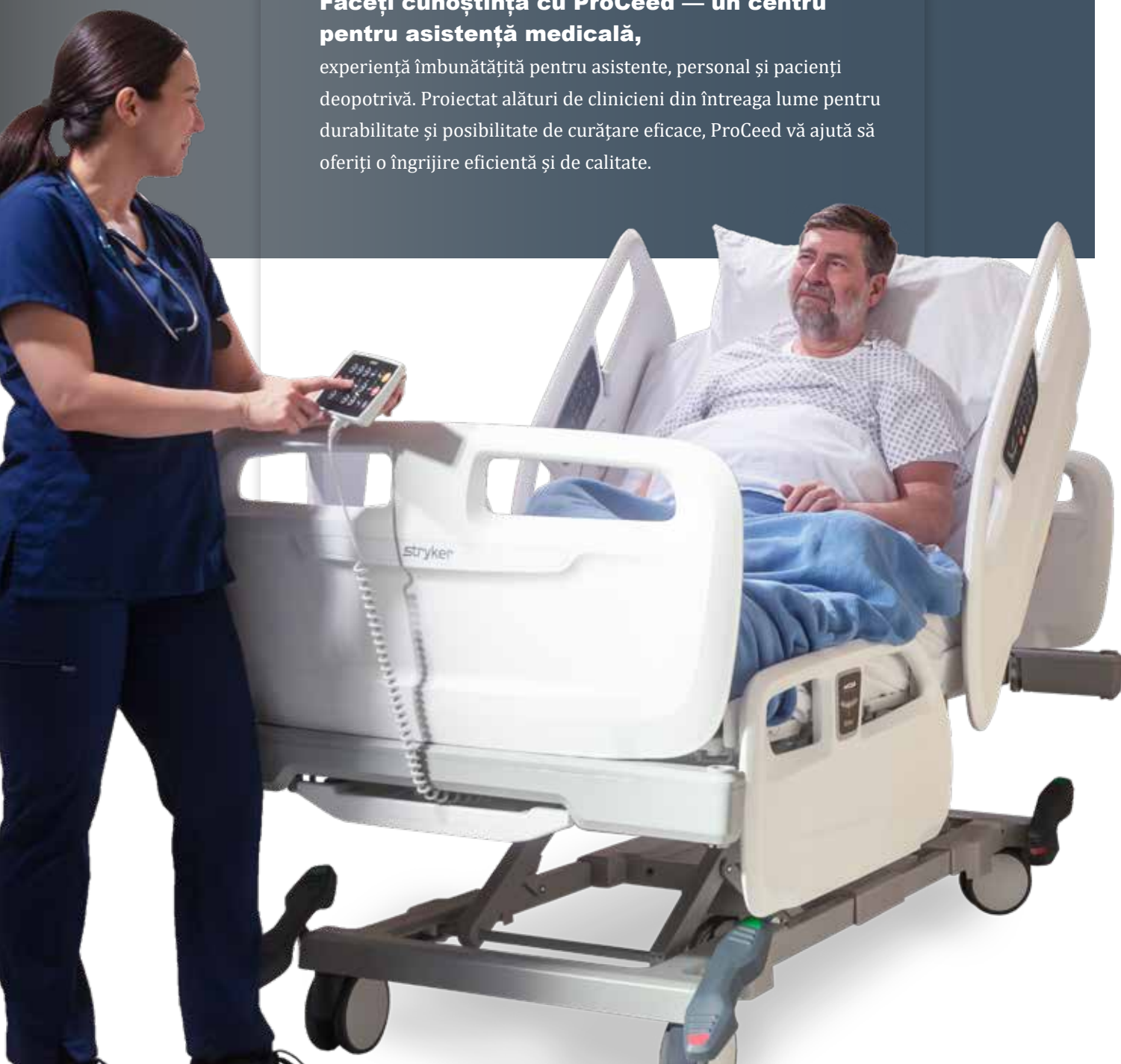

Construit pentru **durabilitate**

Munciți din greu pentru pacienții dvs. și meritați echipamente care lucrează din greu pentru dvs. De la posibilitatea de curățare la cea de service, ProCeed a fost construit pentru a rezista cerințelor asistenței medicale.

Posibilitate de curățare

Cu o clasificare IPX6, cadrul și panoul electronic ProCeed sunt rezistenți la jeturile puternice de apă, permițându-vă să curățați cu încredere patul de spital. Suprafața de susținere este prevăzută cu îmbinări sudate, pentru a preveni pătrunderea apei.



Design durabil

Cu o sarcină de lucru sigură de 260 kg, patul a fost testat cu rigurozitate pentru rezistență. Întregul cadru, inclusiv roțile, barele laterale, tăblia de la cap, tăblia de la picioare și accesoriile au fost testate în mod cuprinzător pentru rezistența la impact.⁵

Simplu de efectuat service

ProCeed este conceput pentru a facilita intervențiile de service și poate face parte din planul dvs. de service ProCare, astfel încât să vă puteți menține flota în starea de funcționare necesară.

ProCare Services

Construit pentru **siguranța pacientului și a echipei de îngrijire**

Știm că siguranța este o prioritate de top pentru dvs. Cu o înălțime redusă a patului, cu indicatori de stare a patului și cu bare laterale care oferă acoperire completă, ProGeed a fost creat ținând cont atât de siguranța personalului, cât și de cea a pacienților.

Bare laterale rabatabile proiectate ergonomic, care oferă acoperire completă

Designul ergonomic al ProGeed, barele laterale care oferă acoperire completă contribuie la menținerea pacienților în pat atunci când este necesar să se afle acolo și se pun departe atunci când nu este necesar acest lucru.



Indicatoare de stare de pe bara laterală

Cu indicatoarele de pe bara laterală, asistentele medicale pot vedea de la distanță starea bateriei, a frânelor, a alimentării cu curent alternativ, a înălțimii patului, a unghiului patului și multe altele.



Înălțime redusă

Înălțimea redusă a patului ProGeed de 34 cm nu numai că oferă o poziție ergonomică pentru asistente și pentru personal pentru a le acorda asistență pacienților, ci susține și mobilitatea pacienților și reduce riscul de vătămare corporală din cauza căderilor.



Conceput pentru **eficiență și ușurință în utilizare**

Munca unei asistente medicale nu este deloc ușoară. De aceea, ProCeed a fost conceput cu grijă pentru a ușura povara sarcinilor de zi cu zi, cum ar fi examinările cu raze X, transportul și repoziționarea pacientului.

Spătar radiotransparent

Cu spătarul radiotransparent al ProCeed, personalul poate realiza examinări cu raze X fără a transfera pacientul pe o altă suprafață, economisind timp și efort.

Opțiunile de panou pe tăblie

Alegeți între un panou pe tăblie care rămâne staționar atunci când cadrul se înclină și un panou pe tăblie mobil, care se înclină, se ridică și coboară pe măsură ce patul se deplasează în diferite poziții.



A cincea roată

Cu mobilitatea celei de-a cincea roți, o roată suplimentară din centrul patului oferă un control sporit, reduce forța de pornire, asistând direcția și contribuind la reducerea vătămărilor corporale cauzate îngrijitorului.



Servicii de asistență pentru clienți

Asistență tehnică

Departamentul nostru de asistență tehnică este deservit de o echipă de profesioniști disponibilă pentru a vă ajuta atunci când aveți nevoie de asistență în utilizarea produselor ProCeed.

Servicii Stryker ProCare

Cu serviciile ProCare, tehnicienii noștri instruiți vă ajută să vă asigurați că echipamentele dumneavoastră sunt gata de utilizare atunci când aveți nevoie de acestea. ProCare este un parteneriat pe care puteți conta pentru a vă degreva sarcinile și o ocazie de a vă asigura că faceți tot posibilul pentru clinicienii, personalul și pacienții dumneavoastră.

Program financiar flexibil

Prin programul financiar flexibil al Stryker, oferim o gamă alternativă ingenioasă menită să concorde cu necesitățile organizației dumneavoastră. Colaborăm cu clienții noștri pentru asistență în găsirea soluției financiare adecvate perfect nevoilor dumneavoastră.*

*Disponibilitatea programului variază în funcție de țară și de portofoliul de produse. Pentru detalii complete și disponibilitate, adresați-vă reprezentantului de vânzări local

Referințe: 1: James Buchan; Howard Catton. Recover to rebuild: Investing in the nursing workforce for health system effectiveness. Martie 2023. ICN. [https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-07/ICN_Recover-to-Rebuild_report_EN.pdf] 2: Illness, Injuries, and Fatalities. 11 februarie 2022. U.S. Bureau of Labor Statistics. 15 mai 2024. [https://www.bls.gov/iif/snapshots/osn-registered-nurses-2016-20.htm#:~:text=Nonfatal%20occupational%20injuries%20and%20illnesses,(FTE)%20workers%20was%20390.6.] 3: Rayhan A. Tariq; Jemima S. George; George Ampat; Tammy J. Toney-Butler. Back Safety. 22 iulie 2023. National Library of Medicine. 15 mai 2024. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519066/#:~:text=Of%20all%20healthcare%20workers%2C%20nurses,%5B23%5D%20%5B24%5D.] 4: Jester R. Editorial - Global shortage of nurses - Rebecca Jester for May 2023 issue. Int J Orthop Trauma Nurs. 2023 May;49:101018. doi: 10.1016/j.ijotn.2023.101018. Epub 2023 Mar 24. PMID: 37041090; PMCID: PMC10038672. 5: test data on file

Acest document este destinat exclusiv utilizării de către personalul medical. Personalul medical trebuie să se bazeze întotdeauna pe propriile cunoștințe clinice specializate când decide să utilizeze un anumit produs în tratarea unui anumit pacient. Stryker nu oferă consultanță medicală și recomandă ca personalul medical să fie instruit cu privire la utilizarea oricărui produs înainte de a-l utiliza.

Informațiile prezentate au scopul de a demonstra varietatea ofertei de produse Stryker. Înainte de utilizarea oricărui produs Stryker, personalul medical trebuie să consulte întotdeauna prospectul din ambalaj, eticheta produsului și/sau instrucțiunile de utilizare. Este posibil ca unele produse să nu fie disponibile pe toate piețele, deoarece disponibilitatea produselor depinde de reglementările și/sau practicile medicale de pe fiecare piață. Dacă aveți întrebări privind disponibilitatea produselor Stryker în zona dvs., contactați reprezentantul Stryker.

Stryker Corporation sau diviziile sale sau alte entități afiliate corporației dețin, utilizează sau au depus cereri pentru înregistrarea următoarelor mărci comerciale sau de servicii: Stryker, Flex Financial, ProCare, ProCeed. Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale proprietarilor sau deținătorilor respectivi ai acestora. ProCeed: Clasa I. Produsele prezentate au marcatul CE în conformitate cu reglementările și directivele UE aplicabile.

