

stryker

ProCeed™ Hastane yatağı

**Bir hasta bakım
merkezi**





%40 ila %80

oranında hemşire (dünya çapında) psikolojik sıkıntı semptomları yaşadığını bildirmiştir.¹



78.740

hemşire (ABD'de) yıllık olarak işyerinde yaralanma veya hastalık yaşar.²



%40-50

oranında hemşire, kariyerleri boyunca sırt ağrılarının geliştiğini bildirmektedir.³




Dayanıklılık için tasarlandı. **Bakım** için tasarlandı. **Kolaylık** için tasarlandı. **Sizin** için tasarlandı.

Hastane yataklarınız sadece mobilyalardan ibaret değildir; hastanın sağlığa geri dönmesinde önemli bir rol oynar. Dünya çapında hemşire azlığı ve personellerin yaşadıkları sıkıntılar karşısında⁴ ekipmanınızın sonu gelmeyen iş yüklerine yalnızca dayanmakla kalmaması, aynı zamanda ona bağlı olan personel için sezgisel ve zahmetsiz bir deneyim sunması çok önemlidir.

ProCeed ile tanışın: sağlık hizmetleri için bir merkez

hemşireler, personel ve hastalara yönelik üstün deneyimler sunan ortak nokta. Dayanıklılık ve temizlenebilirlik için dünyanın dört bir yanındaki klinisyenlerin katkıları ile tasarlanan ProCeed, verimli ve kaliteli bakım sunmanıza yardımcı olur.

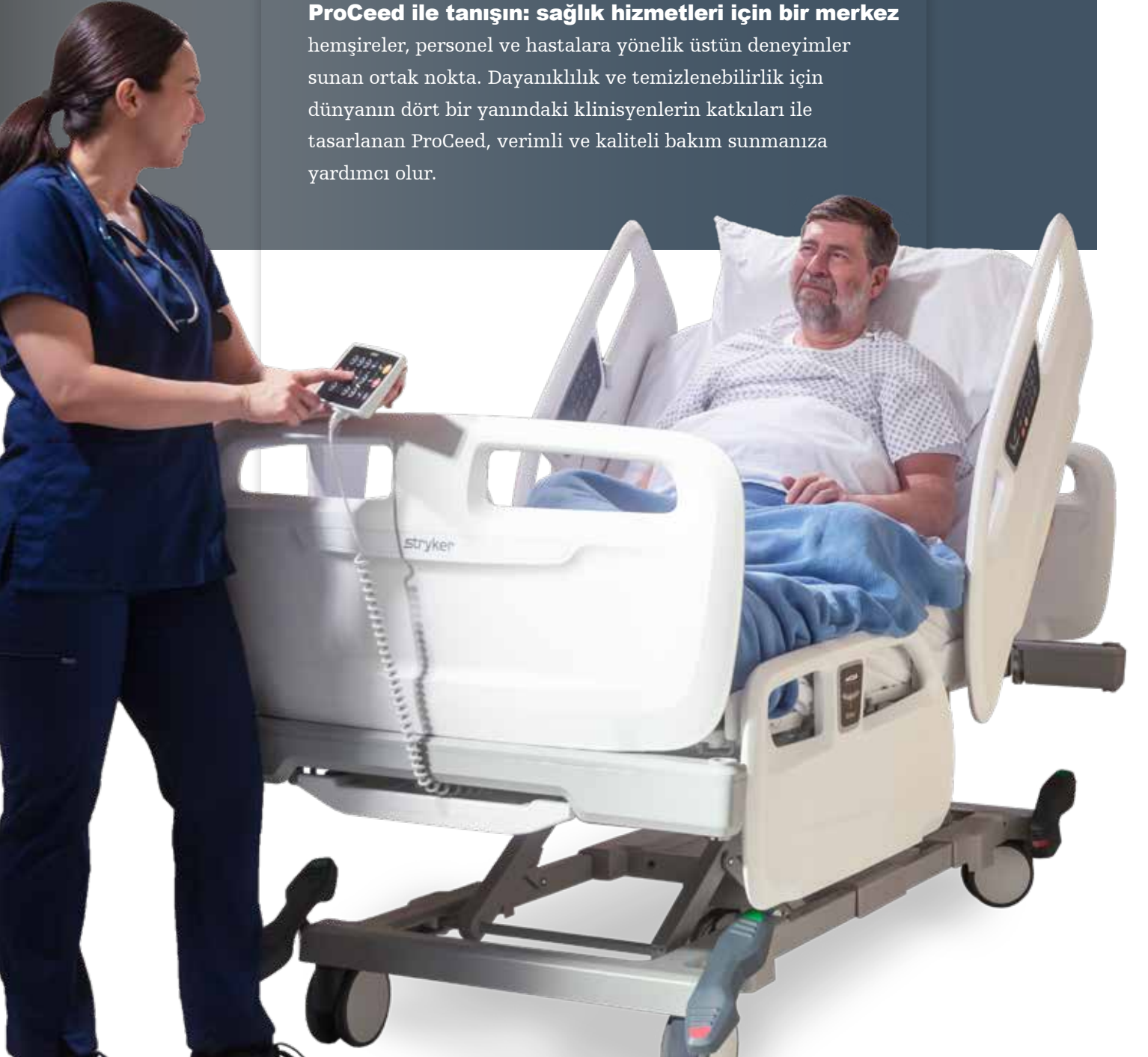

Dayanıklılık için üretildi

Hastalarımız için çok çalışıyor ve sizin için çok çalışan ekipmanları hak ediyorsunuz.

Temizlenebilirlikten servis kolaylığına kadar ProCeed, sağlık hizmetlerinin taleplerine dayanacak şekilde üretilmiştir.

Temizlenebilir

IPX6 koruma sistemine sahip ProCeed'in kasası ve elektronik paneli, güçlü su jetlerine karşı dayanıklıdır ve hastane yatağınızı güvenle temizlemenizi sağlar. Destek yüzeyinde su girişini önlemek için kaynaklı dikişler bulunur.



Dayanıklı tasarım

260 kg güvenli çalışma yüküyle yatak, sıkı bir şekilde güç testine tabi tutulmuştur. Tekerekler, korkuluklar, yatak başlığı, ayak paneli ve aksesuarlar dahil tüm yatak çerçevesi, darbe direnci açısından kapsamlı bir şekilde test edilmiştir.⁵

Servis kolaylığı

ProCeed, servis kolaylığı için tasarlanmıştır ve ProCare servis planınızın bir parçası olabilir, böylece filonuzun gerektiği gibi çalışmasını sağlayabilirsiniz.

ProCare Services

Hasta ve bakım ekibi güvenliği için tasarlanmıştır

Güvenliğin sizin için en önemli öncelik olduğunu biliyoruz. Düşük yatak yüksekliği, yatak durumu göstergeleri ve tam kapsama alanı sağlayan korkuluklarıyla ProCeed, hem personel hem de hasta güvenliği göz önünde bulundurularak üretilmiştir.

Ergonomik olarak tasarlanmış, tam kapsama alanı sağlayan katlanır korkuluklar

ProCeed'in ergonomik olarak tasarlanmış, tam kapsama alanı sağlayan korkulukları, hastaların olması gerektiğinde yatakta kalmasına yardımcı olur ve gerekmedikçe katlanıp saklanabilir.



Korkuluktaki durum göstergeleri

Korkuluktaki göstergeler sayesinde hemşireler akünün, frenlerin, AC gücünün, yatak yüksekliğinin, yatak açısının ve daha fazlasının durumunu belirli bir mesafeden görebilir.



Düşük yükseklik

ProCeed'in 34 cm'lik alçak yatak yüksekliği, hemşireler ve personelin hastalara yardımcı olması için ergonomik bir konum sunmakla kalmaz, aynı zamanda hastanın hareket kabiliyetini destekler ve düşme nedeniyle yaralanma riskini azaltır.



Verimlilik ve kullanım kolaylığı için üretilmiştir

Hemşirelerin işi hiç kolay bir iş değildir. Bu nedenle ProCeed; röntgen, hasta nakli ve yeniden konumlandırma gibi günlük görevlerin yükünü hafifletmek için dikkatli bir şekilde tasarlanmıştır.

Radyolüsen sırt desteği

ProCeed'in radyolüsen sırt desteği sayesinde personel, hastayı başka bir yüzeye aktarmadan röntgen çekebilir, böylece değerli zaman ve enerji tasarrufu sağlar.

Yatak başlığı seçenekleri

Yatak çerçevesi yattığında sabit kalan bir yatak başlığı veya yatak farklı konumlara hareket ederken eğilen, yükselen ve alçalan hareketli bir yatak başlığı arasından seçim yapın.



Beşinci tekerlek

Beşinci tekerlek hareketliliği ile yatağın merkezinde bulunan ekstra tekerlek; daha yüksek kontrol sağlar, çalıştırma ve yönlendirme için gerekli itme kuvvetini azaltarak bakımının sırt yaralanmalarını azaltmaya yardımcı olur.

Müşteri Destek Hizmetleri

Teknik Destek

Teknik Destek birimimiz, ProCeed ile ilgili ihtiyaçlarınıza yardımcı olacak uzmanların bulunduğu bir ekipten oluşur.

Stryker ProCare Hizmetleri

ProCare Hizmetleri ile eğitimli teknisyenlerimiz, ekipmanınızın ihtiyaç anında kullanıma hazır olmasını sağlar. ProCare güvenebileceğiniz bir ortaklıktır ve endişe duyduğunuz konulardan birini ortadan kaldırarak klinisyenleriniz, çalışanlarınız ve hastalarınız için elinizden gelen her şeyi yaptığımız konusunda içinizin rahat hissetmesini sağlar.

Esnek Finansal Program

Stryker'ın Flex Financial iş birimi aracılığıyla, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmış akıllı alternatif seçenekler sunuyoruz. İhtiyaçlarınıza uyan finansal çözümü bulma konusunda yardımcı olmak üzere müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.*

*Programın kullanılabilirliği, ülke ve ürün portföyüne göre değişebilir. Tüm ayrıntılar ve programın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için lütfen yerel satış temsilciniz ile temas kurun

Referanslar: **1:** James Buchan; Howard Catton. Recover to rebuild: Investing in the nursing workforce for health system effectiveness. Mart 2023. ICN. [https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-07/ICN_Recover-to-Rebuild_report_EN.pdf] **2:** Illness, Injuries, and Fatalities. 11 Şubat 2022. U.S. Bureau of Labor Statistics. 15 Mayıs 2024. [https://www.bls.gov/iif/snapshots/osn-registered-nurses-2016-20.htm#:~:text=Nonfatal%20occupational%20injuries%20and%20illnesses,(FTE)%20workers%20was%20390.6.] **3:** Rayhan A. Tariq; Jemima S. George; George Ampat; Tammy J. Toney-Butler. Back Safety. 22 Temmuz 2023. National Library of Medicine. 15 Mayıs 2024. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519066/#:~:text=Of%20all%20healthcare%20workers%2C%20nurses,%5B23%5D%20%5B24%5D.] **4:** Jester R. Editorial - Global shortage of nurses - Rebecca Jester for May 2023 issue. Int J Orthop Trauma Nurs. 2023 May;49:101018. doi: 10.1016/j.ijotn.2023.101018. Epub 2023 Mar 24. PMID: 37041090; PMCID: PMC10038672. **5:** test data on file

Bu belge sadece sağlık uzmanlarının kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır. Sağlık uzmanları, herhangi bir ürünü bir hastanın tedavisinde kullanmaya karar verirken her zaman kendi profesyonel klinik görüşlerini temel almalıdır. Stryker, tıbbi tavsiyede bulunmaz ve sağlık uzmanlarının herhangi bir ürünü kullanmadan önce ürünün kullanımı konusunda eğitim almalarını önerir.

Burada sunulan bilgiler, Stryker ürün seçeneklerinin çeşitliliğini göstermeyi amaçlar. Sağlık uzmanı herhangi bir Stryker ürünü kullanmadan önce mutlaka ambalajdan çıkan ürün prospektüsünü, ürün etiketini ve/veya kullanım talimatlarını incelemelidir. Ürünlerin bulunurluğu, her bir piyasadaki yasal ve/veya tıbbi uygulamalara bağlı olduğundan ürünler bütün piyasalarda bulunmayabilir. Stryker ürünlerinin bölgenizde bulunma durumuyla ilgili sorularınız varsa lütfen Stryker temsilcinizle iletişime geçin.

Stryker Corporation veya birimleri ya da şirket bünyesine bağlı diğer kuruluşlar, şu ticari markaların veya hizmet markalarının sahibidir, bu markaları kullanırlar veya bu markalar için başvuruda bulunmuşlardır: Stryker, Flex Financial, ProCare, ProCeed. Diğer tüm ticari markalar ilgili hak sahiplerine ait ticari markalardır. ProCeed: Smif I. Tanıtımı yapılan ürünler yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Direktiflerine uygun şekilde CE işareti taşımaktadır.

