

# Wózek z funkcją krzesła

## Uniwersalny. Prosty. Kompaktowy.

Wózek z funkcją krzesła firmy Stryker jest przeznaczony do stosowania w ośrodkach chirurgicznych i na niewielkich przestrzeniach. Zwiększa wydajność, nie pogarszając jakości opieki nad pacjentem. Aby uzyskać pożądane działanie i komfort pacjenta, można zmienić pozycję z poziomej na siedzącą.



### Okulistyczny wózek z funkcją krzesła

Okulistyczny wózek z funkcją krzesła zapewniają wszystkie korzyści standardowego wózka z funkcją krzesła oraz dwuprzegubowy podgłówek z lepszym dostępem do ułożenia pacjenta podczas zabiegu.

Wózek z łatwością składa się z **pozycji poziomej do pozycji krzesła**.

Pneumatyczne oparcie pleców można ustawić od **0 do 90 stopni**.

**Podwójne podnośniki hydrauliczne oraz hamulce ze stalowymi pierścieniami na czterech kołach** zwiększają stabilność.

**Częścią wózka od strony nóg pacjenta można poruszać jednocześnie z oparciem pleców lub niezależnie.**

**Naklejki w różnych kolorach** umożliwiają oznakowanie wózka w celu ułatwienia identyfikacji sprzętu.



Szary Czerwony Niebieski

# Wózek z funkcją krzesła



## Wyposażenie podstawowe

- Materac winylowy o grubości 5 cm (2 cali)
- Koła o średnicy 15 cm (6 cali)
- Materac pacjenta o szerokości 61 cm (24 cali)
- Podnóżek z regulacją wysokości
- Oparcie pleców z dwucylindrowym systemem pneumatycznym
- Dwukolumnowy system hydrauliczny
- Cztery gniazda na płyny infuzyjne
- System hamulców ze stalowymi pierścieniami na czterech kołach i sterowaniem z obu stron wózka
- Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga bez użycia rąk
- Składane poręcze boczne z wygodnym oparciem
- Termoformowana osłona ABS ze zintegrowaną tacą z uchwytem na butlę tlenową
- Wielopozycyjna dźwignia typu pushbar (wyłącznie model 5050)
- Niezależna sekcja stóp pacjenta
- Dwuprzegubowy podgłówek z lepszym dostępem (5051)
- Poduszki pod głowę – Ultra Komfort (5051)
  - 8 cm (3 cale), płaskie lub wklęsłe

## Dane techniczne

<b>Numer modelu</b>	5050/5051
<b>Długość całkowita</b>	193 cm (76 cali)
<b>Szerokość</b>	76 cm (30 cali)
Całkowita	76 cm (30 cali)
Leża	70 cm (27,5 cala)
<b>Udźwig</b>	181 kg (400 funtów)
<b>Zakres wysokości (do wierzchu leża)*</b>	
Maks. wysokość	85 cm (33,5 cala)
Min. wysokość	56 cm (22 cala)
<b>Regulacja leża</b>	
Oparcie pleców	0° - 90°
Wysoko	0° - 80°
Nisko	± 18°
<b>Poręcze boczne</b>	±45°
Standardowo	25 x 79 cm (10 x 31 cali)
<b>Materac dla pacjenta</b>	61 x 188 cm (24 x 74 cali)
<b>Średnica kół</b>	15 cm (6 cali)

## Wyposażenie dodatkowe

- Materac Enhanced Comfort o grubości 5 cm (2 cali)
- Materac Enhanced Comfort o grubości 8 cm (3 cali)
- Wieszaki na płyny infuzyjne
  - Zamocowane
  - Standardowe, zdejmowane
- Pasy do unieruchamiania pacjenta
- Możliwość przedłużenia okresu gwarancji
- Regulowane podparcie pod ramiona i zacisk (5051) (wymagana szyna na akcesoria chirurgiczne)
- System dostarczania powietrza/wieszak na serwetę chirurgiczną (5051)
- Szyna na akcesoria chirurgiczne (5051) (jest dostępna ze wszystkimi poręczami bocznymi do przenoszenia pacjentów)
- Podpórka pod nadgarstki do stosowania podczas skroniowego lub górnego dostępu operacyjnego (5051)

## Medical

Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Podjęcie decyzji o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek z produktów firmy Stryker lekarz musi zapoznać się z ulotką informacyjną, etykietami oraz instrukcją użytkowania produktu.

Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: Stryker i Stretcher Chair. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Przedstawione produkty oznaczono symbolem CE zgodnie ze stosowanymi przepisami i dyrektywami UE.

Niniejsze materiały nie są przeznaczone do dystrybucji poza obszarem UE i ESWH.




Stryker Medical  
3800 E. Centre Ave., Portage  
MI 49002 U.S.A



16226PL Rev. A  
SDL 12/2019  
2017-16226

Copyright © 2019 Stryker  
stryker.com

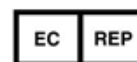

Stryker European Operations B.V.  
Herikerbergweg 110  
1101 CM Amsterdam  
The Netherlands

Dystrybucja:  
Stryker Polska Sp. z o.o.  
Poleczki 35  
02-822 Warszawa, Polska  
t. +48 22 429 55 50