

stryker

SV2

Lit d'hôpital

Personnalisable pour s'adapter à vos besoins



La polyvalence, son principal atout

Chez Stryker, la création d'un lit d'hôpital tel que le SV2 est un travail d'équipe. Nous nous entourons de professionnels médicaux du monde entier tels que vous afin de proposer un lit que vous pourrez personnaliser en fonction de vos besoins.



Tête de lit mobile


Une position plus ergonomique pour les professionnels de santé.

Panneaux de commande intégrés

Les commandes intuitives apportent une fonctionnalité supplémentaire aux professionnels de santé comme aux patients, quelle que soit la position du lit.

Double recul

Le dossier peut être reculé de 89 mm et le système de plicature des genoux de 39 mm pour soulager la pression dans la région sacrée et limiter le glissement du patient.

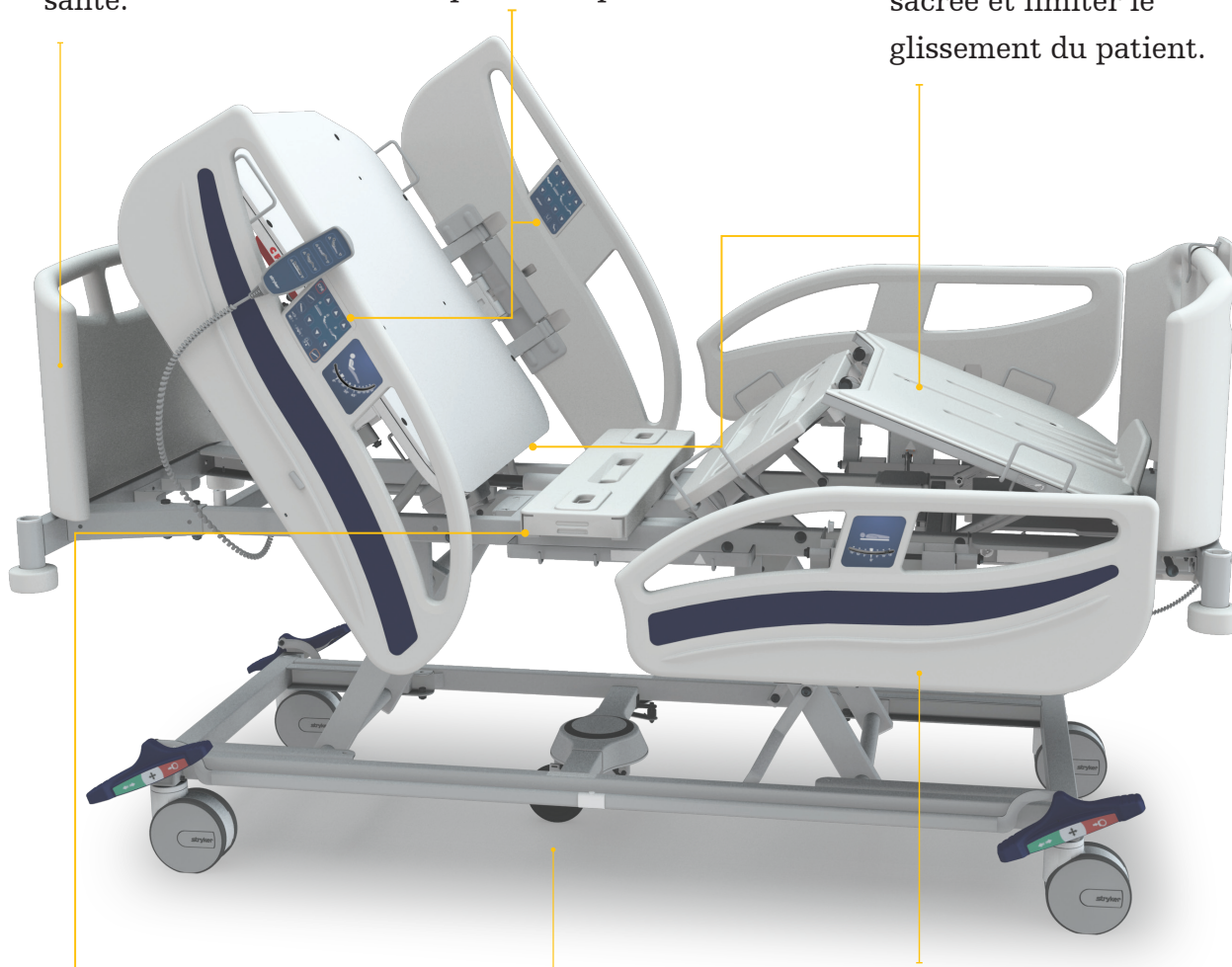

Éclairage permanent sous le lit

Donne la visibilité pour sortir du lit pendant la nuit, contribuant à réduire les chutes des patients.

5^e roue

Maniabilité du lit optimisée par la présence de cinq roues, contribuant à réduire les blessures du dos pour les professionnels de santé. La cinquième roue guide le lit en direction rectiligne et facilite la mobilité dans les espaces étroits.

Barrières rabattables

Simplifient la sortie du lit pour les patients tout en améliorant leur sécurité par une couverture intégrale et la quasi-disparition des ouvertures auxquelles ils risquent de s'accrocher. Utilisation facilitée pour les professionnels de santé qui peuvent les rabattre d'une seule main.



Charge maximale utile de 250 kg



Durée de vie prévue de 10 ans



CEI 60601-1-2:2014



Témoin de position basse

Le lit d'hôpital SV2, l'équilibre entre forme et fonctionnalité, participe à l'amélioration du bien-être et du confort des patients tout en permettant aux professionnels de santé de travailler plus efficacement. La sécurité des patients et des soignants est toujours prioritaire.



Témoin de position basse

Le témoin de position basse signale aux professionnels de santé que le lit est en position de hauteur minimale, afin de réduire le risque de blessures des patients dues aux chutes. La nuit, les soignants voient clairement les lits et peuvent s'assurer qu'ils sont en position basse.

Sortie intelligente

La fonction de sortie intelligente relève le dossier et amène la surface du lit à la hauteur la plus adaptée pour en sortir facilement. Le patient peut alors sortir du lit en s'appuyant sur la barrière de sécurité.



Barrières de sécurité

La sécurité des patients est au cœur de nos préoccupations. Les barrières rabattables du lit SV2 facilitent la sortie du lit et améliorent la sécurité du patient en couvrant intégralement la base du matelas. Elles peuvent être rabattues individuellement d'une seule main. Leur conception réduit les ouvertures susceptibles de devenir des pièges et facilite un nettoyage approfondi.

Commandes intégrées à la barrière

Le lit SV2 est équipé de doubles commandes intégrées à la barrière afin que les patients comme les professionnels de santé puissent le manipuler facilement. Le boîtier de commande pour le personnel soignant permet au professionnel de santé de verrouiller les commandes côté patient et d'activer la fonction électronique de remise à plat d'urgence du relève-dossier (CPR).



Boîtier de commande patient

Chaque patient doit pouvoir adopter la position la plus confortable pour lui. Grâce au boîtier de commande patient, celui-ci peut régler facilement la position du lit selon ses besoins.

Boîtier de commande pour le personnel soignant

Les professionnels de santé ont souvent besoin de se déplacer autour du lit pour administrer les soins nécessaires au patient. Le boîtier de commande pour le personnel soignant permet de manipuler le lit depuis différents emplacements. Le soignant peut notamment activer la fonction CPR électronique et les positions décline, proclive et d'examen pour s'occuper du patient, quel que soit son emplacement.



Avec les commandes par appui unique, patients et professionnels de santé ajustent facilement la position du lit en évitant les efforts physiques. Une conception ergonomique qui bénéficie aux patients comme aux professionnels de santé.



Le lit d'hôpital SV2 est conçu pour être polyvalent, quel que soit l'établissement. Entièrement réglable, il est facile à utiliser pour les professionnels de santé et confortable pour les patients.

Grâce à sa plage étendue de réglages de hauteur de 37 à 75 cm, le lit peut être rapproché du sol pour éviter les chutes et relevé pour permettre aux professionnels de santé de travailler dans une position ergonomique.

Pour les patients de grande taille, une rallonge agrandit le lit de 31 cm. Le support porte-couvertures intégré au pied du lit

permet de ranger les vêtements du patient, le linge et le boîtier de commande pour le personnel soignant.

La cinquième roue facilite la prise de virages, contribuant à éviter les blessures du dos des professionnels de santé. Elle se révèle particulièrement utile pour manœuvrer dans les espaces étroits.




La tête de lit mobile permet aux professionnels de santé de travailler dans une position plus ergonomique. La tête et le pied de lit s'escamotent facilement pour accéder rapidement au patient.

Des leviers CPR sont disposés à gauche et à droite du dossier. Ils sont facilement accessibles, que les barrières latérales soient relevées ou abaissées.

L'activation de la fonction de remise à plat d'urgence du relève-dossier ramène le lit à 0°, position nécessaire pour une CPR efficace.

L'éclairage permanent sous le lit améliore la visibilité pour les patients qui se lèvent la nuit et aide à éviter les chutes.

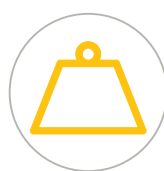

Charge maximale utile de 250 kg



Rallonge de lit 31 cm



Réglage de hauteur 37 à 75 cm

Personnalisable. Pour s'adapter à vos besoins.

La prestation des soins de santé devrait être personnalisée en fonction des besoins des patients, de leurs proches et du personnel soignant. C'est pourquoi Stryker propose une gamme diversifiée de produits et de services qui contribuent à améliorer la santé et le bien-être des patients comme des professionnels de santé.

SV2

Le SV2 est un lit à multiples fonctionnalités qui offre des fonctions standard telles qu'un indicateur de position basse, une double commande sur la barrière latérale et des commandes électroniques accessibles via un bouton par appui unique commodément disposé. Le lit SV2 peut être personnalisé par des fonctions en option.



1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (possibilité de sélectionner plusieurs fonctions)

SV2 Configuration Plus

Nous avons à cœur de vous fournir un lit adapté à vos besoins. En plus du SV2, nous proposons deux offres supplémentaires pour vous aider à prendre votre décision. L'offre Configuration Plus inclut toutes les fonctions standard avec en plus : des roues doubles, une cinquième roue et le boîtier de commande pour le personnel soignant.



Options incluses : 1, 2 et 5

SV2 Configuration Complète


L'offre SV2 Configuration Complète correspond à notre modèle entièrement équipé, incluant toutes les options disponibles pour répondre à vos besoins.

Options incluses : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7



Résumé des options

- | | |
|---|--|
| 1 5 ^e roue | 4 Rallonge de lit avec support porte-couvertures |
| 2 Boîtier de commande pour le personnel soignant | 5 Roues doubles |
| 3 Boîtier de commande patient | 6 Éclairage sous le lit |
| | 7 Dossier radiotransparent et support de cassette |

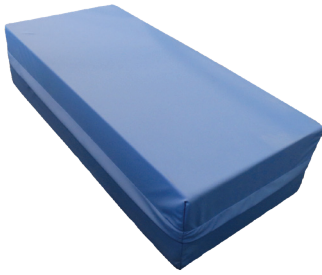

Coussin réhausseur pour rallonge de lit

Coussin réhausseur 12 cm

(P) 33 cm x (l) 71 cm x (H) 18 cm

Poids net : 1,4 kg

Coussin réhausseur 14 cm

(P) 33 cm x (l) 71 cm x (H) 20 cm

Poids net : 1,6 kg



Potence pour intraveineuse en acier inoxydable


Réglable en hauteur

Capacité de charge :

2 kg par crochet

Largeur : 42 cm

Hauteur : de 107 cm à 176 cm

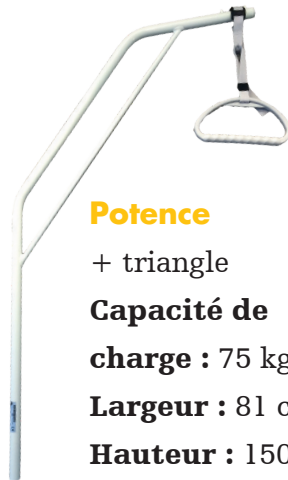

Potence

+ triangle

Capacité de charge : 75 kg

Largeur : 81 cm

Hauteur : 150 cm




Tige porte sérum droite

Réglable en hauteur

Capacité de charge :

2 kg par crochet

Hauteur : de 116,7 cm à 178 cm

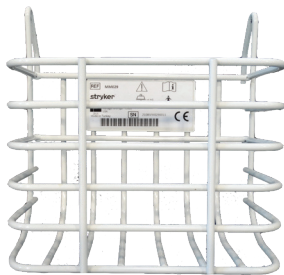

Panier pour poches Foley

203 mm x 198 mm x 139 mm [lxHxP]



Support pour obus à oxygène

275 mm x 390 mm x 145 mm [lxHxP]

Couleurs du lit



Bleu Stryker :
Pantone 534C



Blanc :
(RAL 9002)



Gris soie :
(RAL 7044)



Bleu pastel :
(RAL 5024)




Jaune de sécurité :
(RAL 1003)


3 options bois



Bois

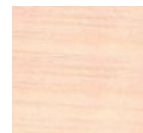

Érable

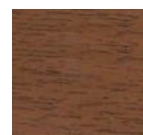

Noyer

Conforme aux normes de lit internationales

- CEI 60601-1 éd. 3.1: 2012
- CEI 60101-1- 6 éd. 3.1: 2013
- CEI 62366 éd. 1.1:2014
- CEI 60601-2-52:2009 + A1:2015
- CEI 60601-2-54 éd. 1.1: 2015
- CEI 60601-1-2:2014 éd. 4.0


Les matelas SV sont conçus pour le confort du patient hospitalisé. Les matelas de la gamme SV sont indiqués dans l'aide à la prévention et au traitement des escarres.

Matelas mousse


Options de matelas	Taille	Options de barrière coupe-feu
Mousse standard 12 cm	200 x 86 x 12	<ul style="list-style-type: none"> •Aucune •EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175
Mousse standard 14 cm	200 x 86 x 14	<ul style="list-style-type: none"> •Aucune •EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175

Propriétés

- Soutien du patient durable
- Adaptable à la plupart des cadres de lit
- Réversible
- Mousse haute résilience monodensité
- S'adapte à toutes les positions du lit

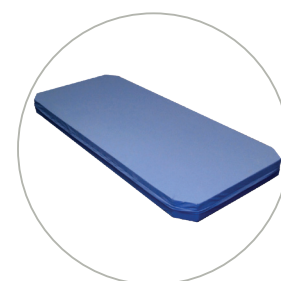

Matelas mousse

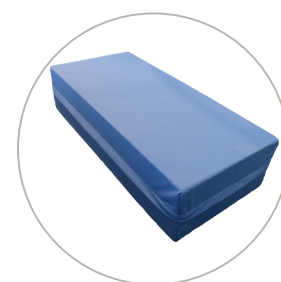

Matelas de soutien

Matelas mousse visco-élastique

La surface en mousse visco-élastique s'adapte à la morphologie du patient, répartit le poids uniformément et épouse la forme du corps dans toutes les positions, pour plus de confort et une redistribution des points de pression.

Options de matelas	Taille	Options de barrière coupe-feu
Mousse visco-élastique 12 cm	200 x 86 x 12	<ul style="list-style-type: none"> •Aucune •EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175 •BS7177



Matelas visco-élastique

Propriétés

- Thermosensible
- Réduit la pression d'interface
- Housse imperméable
- S'adapte à la morphologie
- Housse extensible dans toutes les directions
- Perméable à la vapeur

Les produits et services s'inscrivent dans l'engagement de Stryker pour la satisfaction des clients. Notre solution ProCare fournit un service et une assistance pour répondre aux besoins de votre établissement.

Services ProCare

Avec les services ProCare, nos techniciens expérimentés vous permettent de vous assurer que votre équipement est prêt à fonctionner au moment voulu. ProCare est un partenariat sur lequel vous pouvez compter, qui vous soulage d'une préoccupation et vous donne une raison supplémentaire de savoir que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour votre personnel et vos patients.



Flex Financial


La division Flex Financial de Stryker offre une large gamme d'options conçues pour répondre aux besoins de votre établissement. Nous travaillons en collaboration avec nos clients pour les aider à trouver la solution de financement qui convient à leurs besoins*.

Faire la différence. Réduire notre empreinte.

Nous considérons que le respect de notre planète est aussi important que la santé de ses habitants.



Les déchets dangereux et non dangereux sont recyclés par notre établissement.

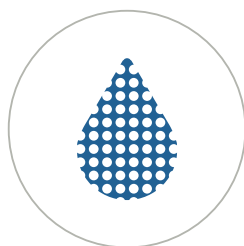

Utilisation de peintures chimiques respectueuses de l'environnement.



Conformité au système de management environnemental ISO 14001:2004

Medical

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les chirurgiens soient formés à l'utilisation de tout produit spécifique avant son utilisation dans une intervention chirurgicale.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les chirurgiens doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation (si applicable) avant d'employer tout produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, SV2. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union européenne. Le lit SV2, le matelas et les accessoires sont des Dispositifs Médicaux de classe I.

Le SV2 est destiné à être utilisé par des patients adultes dans un environnement médico-chirurgical et de soins intensifs nécessitant l'utilisation d'un lit d'hôpital. Aucun produit décrit dans ce document n'est pris en charge par l'Assurance Maladie.

Ce document n'est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA.



OTHMED-BRO-60_16251FR-BL Rev. 1
SDL 08/2020
2018_16876

Copyright © 2020 Stryker
stryker.com



Stryker Medical
3800 E Center Avenue
Portage, Michigan 49002
USA

Distribué par:

Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330, Pusignan
France

t : +33 4 72 45 36 00
f : +33 4 72 45 36 99

333 710 275 RCS Lyon
Capital social: 27 495 520 EUR