

stryker

SV2

Cama hospitalar

Personalizável para as suas necessidades



A versatilidade é a sua característica mais marcada

Na Stryker, a criação de uma cama hospitalar como a nossa SV2 requer um trabalho de colaboração. Ao trabalharmos em conjunto com profissionais médicos em todo o mundo, como é o seu caso, desenvolvemos uma cama de alta qualidade que pode personalizar à medida das suas necessidades específicas.



Cabeceira móvel


Permite um posicionamento ergonómico para os cuidadores e benefícios melhorados para o doente em qualquer posição da cama.

Painéis de controlo integrados

Os controlos intuitivos proporcionam uma grande funcionalidade em qualquer posição da cama, tanto para o cuidador como para o doente.

Regressão dupla

Permite uma regressão articulada de 89 mm na zona lombar e de 39 mm na zona dos joelhos para ajudar a reduzir a pressão na região sacra e a movimentação do doente.

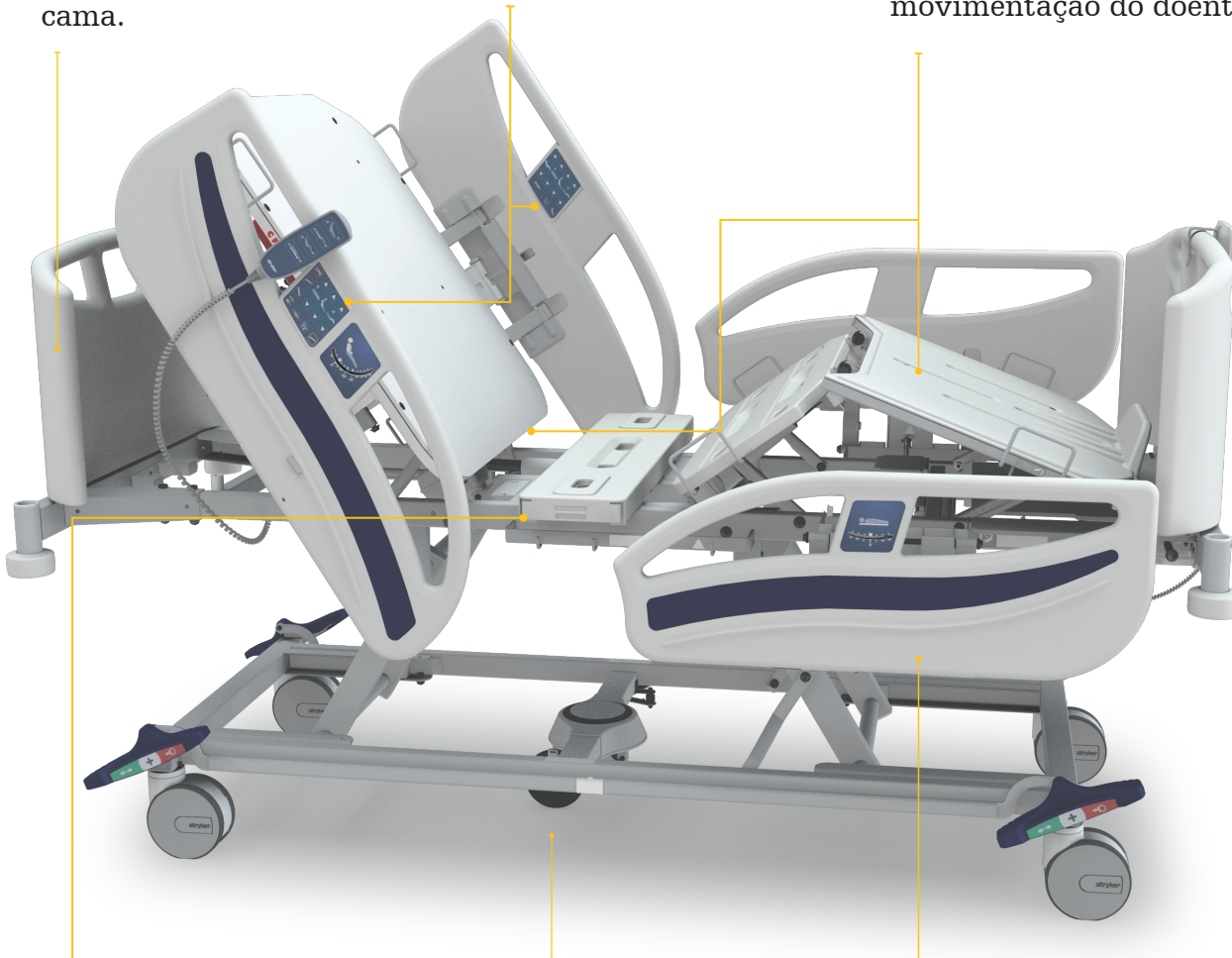

250 kg de capacidade em segurança



Esperança de vida de 10 anos



IEC 60601-1-2:2014



Indicador de cama rebaixada

Luz de presença debaixo da cama

Melhora a visibilidade do doente durante a noite quando sai da cama, ajudando a evitar quedas.

5.ª roda

A mobilidade da quinta roda melhora a manobrabilidade da cama e ajuda a reduzir as lesões dorsais do cuidador. A quinta roda permite que a cama avance a direito e facilita a mobilidade em espaços pequenos.

Grades laterais rebatíveis

Simplificam a saída do doente e aumentam a sua segurança porque cobrem totalmente e minimizam os espaços onde o doente possa ficar entalado, e facilitam a utilização por parte dos cuidadores, uma vez que as grades são rebatíveis apenas com uma mão.

A cama hospitalar SV2 consegue combinar a forma e a funcionalidade para melhorar o bem-estar e o conforto dos doentes ao mesmo tempo que auxilia os cuidadores na prestação de cuidados eficientes. A prioridade é a segurança do doente e do cuidador:



Indicador de cama rebaixada

O indicador de cama rebaixada indica claramente quando a cama está na posição mais baixa, o que ajuda a reduzir lesões por queda dos doentes. Durante a noite, os cuidadores têm uma visão clara das camas para poderem garantir que todas estão na posição mais baixa.



Saída inteligente

O nosso objetivo é evitar a queda dos doentes. A função de saída inteligente eleva a zona das costas e traz a superfície da cama para a altura de saída mais fácil. Os doentes podem sair da cama com a ajuda das grades laterais de segurança.



Grades laterais de segurança

A segurança do doente é a nossa principal prioridade. As grades laterais rebatíveis da SV2 facilitam a saída do doente e melhoram a segurança porque cobrem completamente a base do colchão. As grades laterais podem ser rebatidas individualmente utilizando apenas uma mão. O design minimiza espaços onde é possível ficar entalado e permite uma limpeza fácil e profunda.

Controlos integrados nas grades laterais

A SV2 está equipada com controlos duplos nas grades laterais, para que tanto o doente como o cuidador possam operar a cama com facilidade. A unidade da grade lateral que se encontra voltada para o enfermeiro permite que o cuidador bloqueie os controlos para o doente e utilize a função eletrónica de reanimação cardiopulmonar em caso de emergência.



Controlo para o doente

Todos os doentes merecem estar numa posição o mais confortável possível. O controlo para o doente permite que o doente ajuste facilmente a posição da cama às suas necessidades.



Unidade de controlo para enfermeiros

Os profissionais de saúde requerem flexibilidade para se movimentarem à volta da cama e prestarem aos doentes os cuidados necessários. A unidade de controlo para enfermeiros permite o controlo da cama a partir de diferentes pontos. Equipada com uma funcionalidade eletrónica de reanimação cardiopulmonar, posições de Trendelenburg, antiTrendelenburg e de exame, é possível cuidar dos doentes a partir de diferentes pontos.



Os controlos de um só toque permitem que os doentes e os cuidadores ajustem facilmente a posição da cama, eliminando a necessidade de trabalho manual. Proporciona um design ergonómico tanto aos doentes como aos cuidadores.

Versátil. Durante todo o episódio de cuidados.



A cama hospitalar SV2 foi construída para ser uma cama versátil em qualquer hospital, considerando as necessidades de eficiência e segurança. É totalmente ajustável, tanto para facilidade de utilização do cuidador como para conforto do doente.

A vasta amplitude de ajuste de altura, de 37 cm a 75 cm, permite que a cama chegue perto do chão para evitar quedas do doente e assegura uma posição de trabalho ergonómica para os cuidadores.

Os doentes mais altos beneficiam de uma extensão de cama que estende a cama em mais 31 cm. O suporte para roupa associado

é uma unidade de armazenamento integrada que se encontra aos pés da cama, onde poderá guardar a roupa do doente, os lençóis e a unidade de controlo para enfermeiros.

A quinta roda, especialmente útil em espaços confinados, melhora a condução e a viragem, potencialmente reduzindo as lesões dorsais do cuidador.



A cabeceira móvel permite uma posição de trabalho mais ergonómica para os cuidadores. A cabeceira e os pés da cama são facilmente amovíveis, o que permite ao cuidador um acesso rápido ao doente.

As alavancas de reanimação cardiopulmonar encontram-se do lado direito e do lado esquerdo da zona lombar. Essas alavancas são de fácil acesso com as grades laterais levantadas ou rebaixadas.

A ativação da reanimação pulmonar posiciona a cama a 0°, a posição necessária para efetuar o procedimento com eficácia.

A luz de presença debaixo da cama melhora a visibilidade do doente que se levante durante a noite e ajuda a prevenir as quedas.



250 kg de capacidade em segurança



Extensão de cama 31 cm



Ajuste da altura 37 cm–75 cm

Os cuidados de saúde devem ser personalizados para se ajustarem às necessidades do doente, da família e do cuidador. É por isso que a Stryker oferece uma diversa gama de produtos e serviços que ajudam a melhorar a saúde e o bem-estar tanto do doente como do cuidador.

SV2 Custom

A SV2 é uma cama com muitas funcionalidades e valor acrescentado, que inclui funcionalidades como um indicador de cama rebaixada, controlos duplos nas grades laterais e controlos eletrónicos convenientes de um toque. A SV2 Custom é personalizável com funcionalidades opcionais.

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (opção para selecionar várias funcionalidades)



SV2 Package Plus

É importante para nós proporcionarmos uma cama que se ajuste às suas necessidades. Para além da SV2 Custom, oferecemos dois pacotes extra para facilitar a tomada de decisões.

A Package Plus inclui todas as funcionalidades padrão e ainda rodízios duplos, uma quinta roda e uma unidade de controlo para enfermeiros.

Opções incluídas: 1, 2 e 5



SV2 Package Complete


A SV2 Complete é o nosso modelo totalmente equipado que inclui todas as opções disponíveis para as suas necessidades.

Opções incluídas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7



Opções por ordem

- | | |
|--|---|
| 1 Quinta roda | 5 Rodízios duplos |
| 2 Unidade de controlo para enfermeiros | 6 Luz debaixo da cama |
| 3 Controlo para o doente | 7 Zona lombar translúcida aos raios-X com suporte de cassete |
| 4 Extensão de cama com suporte para roupa | |

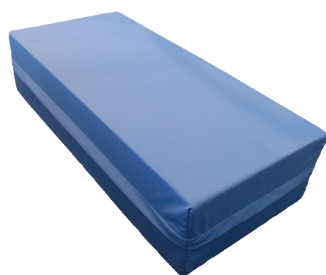

Reforço para extensão de cama

Reforço de 12 cm

(P) 33 cm x (L) 71 cm x (A) 18 cm

Peso líquido: 1,4 kg

Reforço de 14 cm

(P) 33 cm x (L) 71 cm x (A) 20 cm

Peso líquido: 1,6 kg

Cores da cama



Azul Stryker:
Pantone 534C



Branco:
(RAL 9002)



Cinza seda:
(RAL 7044)



Azul pastel:
(RAL 5024)



Amarelo sinal:
(RAL 1003)



Suporte de soros em aço inoxidável

Altura ajustável


Peso suportado:

2 kg por gancho

Largura: 42 cm

Altura:

107 cm – 176 cm

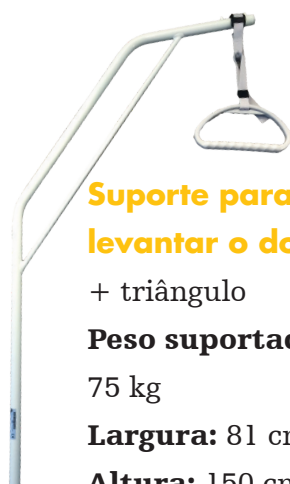

Suporte para levantar o doente + triângulo

+ triângulo

Peso suportado:

75 kg

Largura: 81 cm

Altura: 150 cm



Porta Soros amovível de duas secções

Altura ajustável

Peso suportado:

2 kg por gancho

Altura:

116,7 cm - 178 cm



Cesto para sacos Foley

203 mm x 198 mm x

139 mm [L x A x P]



Suporte para garrafa de oxigénio

275 mm x 390 mm x

145 mm [L x A x P]


3 opções de madeira



Madeira



Ácer

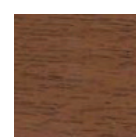

Nogueira

Cumpra as normas internacionais para camas

- IEC 60601-1 Ed. 3.1: 2012
- IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015
- IEC 60101-1- 6 Ed. 3.1: 2013
- IEC 60601-2-54 Ed. 1.1: 2015
- IEC 62366 Ed. 1.1:2014
- IEC 60601-1-2:2014 Ed. 4.0


Os colchões da série SV foram concebidos para o conforto dos doentes durante a sua estadia hospitalar. Os colchões SV têm a finalidade de auxiliar na prevenção e no tratamento de úlceras de pressão.

Colchões da série espuma

Opções de colchão	Tamanho	Opções de barreira de fogo
Espuma normal de 12 cm	200 x 86 x 12	• Nenhuma • EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175
Espuma normal de 14 cm	200 x 86 x 14	• Nenhuma • EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175

Propriedades

- Apoio do doente duradouro e económico
- Adaptável à maior parte das estruturas de cama
- Possibilita viragem
- Espuma de elevada resistência e de monodensidade
- Adequa-se a todas as posições da cama

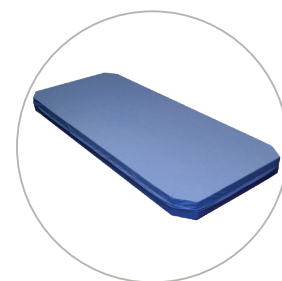

Colchão de espuma



Colchão do reforço

Colchões da série espuma viscoelástica

A superfície de espuma viscoelástica molda-se à forma do doente, distribui o peso e ajusta-se ao corpo em qualquer posição, proporcionando um maior conforto e a redistribuição de pressão.

Opções de colchão	Tamanho	Opções de barreira de fogo
Espuma viscoelástica de 12 cm	200 x 86 x 12	• Nenhuma • EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175 • BS7177

Propriedades

- Sensível à temperatura
- Reduz a pressão de contacto
- Capa impermeável
- Ajusta-se à forma do corpo
- Capa elástica
- Permeável ao vapor



Colchão viscoelástico

Produtos e serviços de alta qualidade fazem parte do compromisso da Stryker para com a satisfação do cliente. A nossa solução de serviços ProCare fornece os padrões mais elevados de serviço e assistência para as necessidades da sua instituição.

Serviços ProCare

Com os serviços ProCare, os nossos técnicos de formação avançada ajudam a garantir que o seu equipamento está pronto a funcionar sempre que necessário. A ProCare é uma parceria em que pode confiar para ter menos uma preocupação e mais uma razão para se sentir confiante de que faz os possíveis pelos profissionais de saúde e doentes.



Flex Financial


Através do negócio Flex Financial da Stryker, fornecemos uma vasta gama de alternativas inteligentes concebidas para se ajustarem às necessidades da sua organização. Colaboramos com os nossos clientes e prestamos assistência na busca de uma solução financeira adequada às suas necessidades*.

Fazer a diferença. Reduzir o nosso impacto.

Consideramos que o bem-estar do nosso planeta é tão significativo quanto a saúde dos indivíduos que nele habitam.



Reciclamos tanto os resíduos perigosos como os não perigosos.

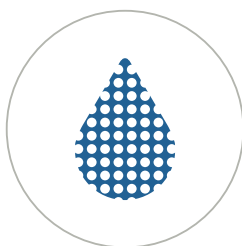

Uso de químicos de tinta ecológicos.



**ISO 14001:2004
Conformidade com o Sistema de Gestão Ambiental**

*A disponibilidade do programa varia dependendo do país e da carteira de produtos. Contacte o representante de vendas da sua zona para saber mais informações e disponibilidade.

Medical

Este documento destina-se exclusivamente a profissionais de saúde.

Um profissional de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide quanto à utilização de um produto particular no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes de o utilizarem numa cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita às práticas regulamentares e/ou clínicas em vigor nos mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respetivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker, SV2. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou titulares.

Os produtos ilustrados têm a marcação CE em conformidade com as regulamentações e diretivas da UE.

Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre (European Free Trade Association — EFTA).



OTHMED - BRO - 60 16 25 1PT

OTHMED-BRO-60_16251PT Rev. 1

SDL 08/2020

2017-16251

Copyright © 2020 Stryker

stryker.com