

stryker

SV2

Ziekenhuisbed

Volledig aanpasbaar aan uw behoeften



De veelzijdigheid is het grootste voordeel van dit bed

Het ontwikkelen van een ziekenhuisbed als de SV2 vereist samenwerking. Dankzij onze samenwerking met zorgverleners, uit alle delen van de wereld, kunnen wij een kwaliteitsbed aanbieden dat u volledig op uw specifieke behoeften kunt afstemmen.



Mobiele hoofdeindplank


Maakt meerdere ergonomische instellingen voor zorgverleners en voor de patiënt voor elke bedstand mogelijk.

Geïntegreerde bedieningspanelen

De intuïtieve bediening zorgt in elke bedstand voor een betere functionaliteit voor zowel de zorgverlener als de patiënt.

Dubbele regressie

Van een rugsteun van 89 mm en een knieknik van 39 mm, wat zorgt voor minder druk op het sacrum en het verplaatsen van de patiënt gemakkelijker maakt.

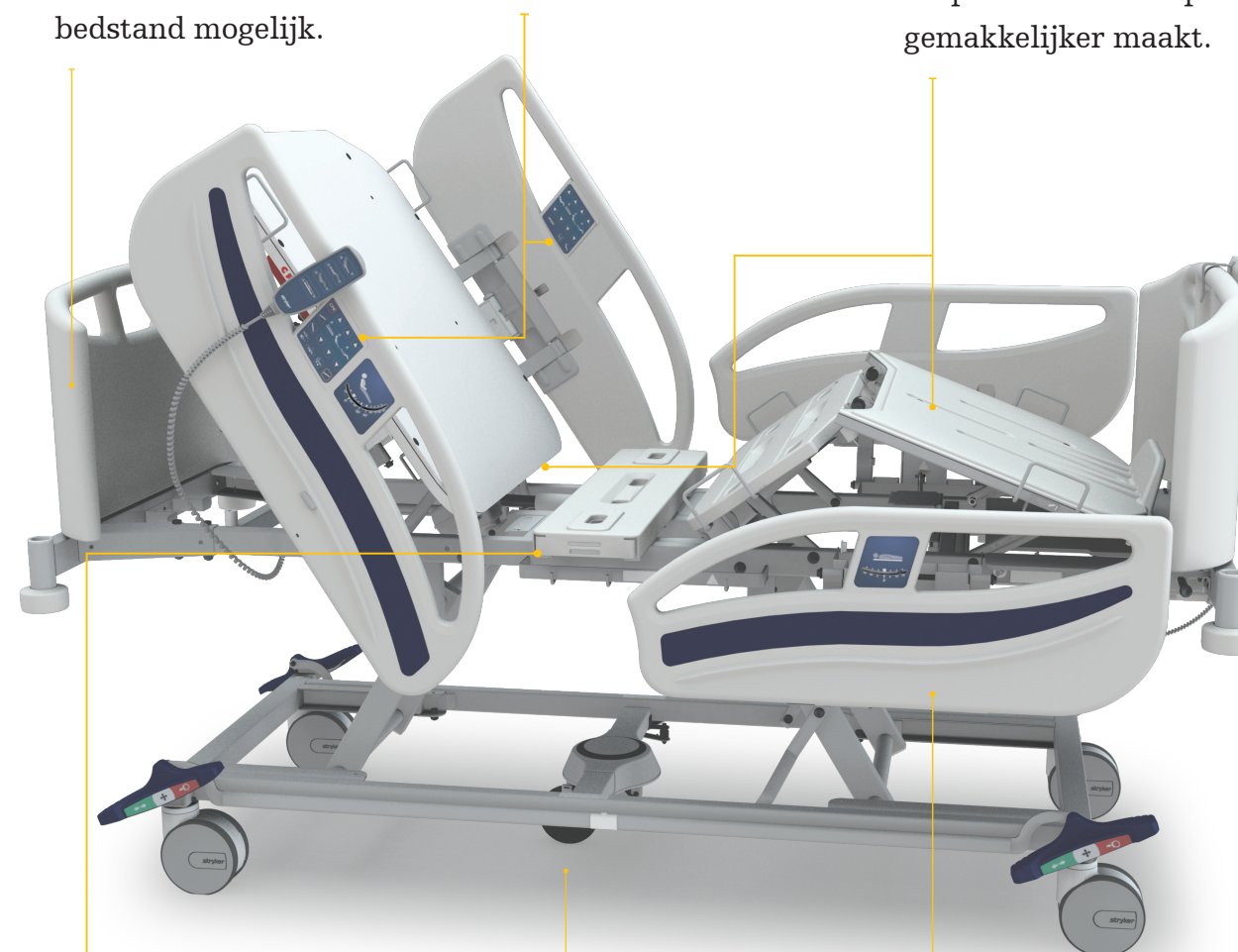

"Always-on" verlichting onder het bed


Biedt patiënten 's nachts beter zicht bij het verlaten van het bed, waardoor patiënten minder snel ten val komen.

Vijfde wiel

Vergroot de manoeuvreerbaarheid van het bed en is daardoor minder belastend voor de rug van de zorgverlener. Het vijfde wiel zorgt ervoor dat het bed rechthoekig gaat en er gemakkelijker in kleine ruimten mee kan worden gemanoeuvreerd.

Neerklapbare zijhekken

Zorgen ervoor dat de patiënt niet alleen gemakkelijker maar ook veiliger uit bed kan stappen, omdat de hekken de hele lengte van het bed afdekken en het aantal openingen waarin men bekneld kan raken, tot een minimum is beperkt. Neerklapbaar met slechts één hand, voor extra gebruiksgemak voor zorgverleners.

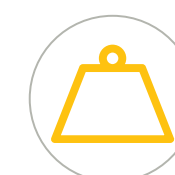

Veilige werkbelasting tot 250 kg



Levensduur van 10 jaar



IEC 60601-1-2:2014



Indicator laagste bedstand

Het SV2-ziekenhuisbed combineert vorm en functie voor het verbeteren van het welzijn en het comfort van de patiënt terwijl tegelijkertijd zorgverleners er efficiënter door gaan werken. De veiligheid staat altijd voorop voor zowel de patiënt als de zorgverlener:



Indicator laagste bedstand

De indicator voor de laagste bedstand geeft aan of het bed in de laagste stand staat, waarmee wordt voorkomen dat patiënten zich bezeren of iets oplopen wanneer ze uit bed vallen. 's Nachts kunnen zorgverleners in één oogopslag zien of de bedden in de laagste stand staan.

Slimme uitstap

Onze aandacht is gericht op het voorkomen van vallen van patiënten. De slimme uitstap zet de rugsteun omhoog en brengt het bedoppervlak op uitstaphoogte, waardoor patiënten minder snel zullen vallen. Patiënten kunnen zich bij het uit bed stappen vasthouden aan een van de zijhekken.

Zijhekken voor veiligheid

De veiligheid van de patiënt heeft onze hoogste prioriteit. De zijhekken van het SV2-bed zijn neerklapbaar zodat de patiënt gemakkelijk uit bed kan stappen, en zorgen voor optimale veiligheid van de patiënt doordat de hekken van het hoofd- tot het voeteneinde bescherming bieden. Elk zijhek kan met slechts één hand worden neergeklapt. Door het ontwerp is het aantal openingen zo klein mogelijk waardoor er gemakkelijk en grondig kan worden schoongemaakt.



Geïntegreerde bediening van de zijhekken

De SV2 heeft een dubbele bediening voor de zijhekken, zodat zowel de patiënt als de zorgverlener de zijhekken kan bedienen. Met de zijhekbieding voor de verpleegkundige kan de zorgverlener de patiëntbediening vergrendelen en in een noodgeval de elektronische reanimatiefunctie gebruiken.



Afstandsbediening voor de patiënt

Iedere patiënt verdient het om in de meest comfortabele positie in bed te liggen of te zitten. Met de afstandsbediening voor de patiënt kunnen patiënten het bed zeer eenvoudig in de gewenste stand zetten.



Afstandsbediening voor de verpleegkundige

Zorgverleners moeten zich vrij rond het bed kunnen bewegen om hun patiënten de juiste zorg te kunnen bieden. Met de afstandsbediening voor de verpleegkundige kan het bed in verschillende standen worden gezet. Dankzij elektronische CPR-functionaliteit, Trendelenburg, anti-Trendelenburg en onderzoekspositie kan de zorg voor uw patiënten vanuit verschillende locaties worden geleverd.



Met de one-touch bediening kunnen patiënten en zorgverleners de stand van het bed heel eenvoudig veranderen en hoeft er veel minder met de hand worden gedaan. Ergonomisch ontwerp voor zowel patiënt als zorgverlener.



Het SV2-ziekenhuisbed is een veelzijdig bed voor ziekenhuizen door zowel zijn efficiëntie als zijn veiligheid. Dit bed is volledig aanpasbaar qua gebruikersgemak voor de zorgverlener en qua comfort voor de patiënt.

Door de ruime hoogteafstelling (37 tot 75 cm) kan het bed zeer laag worden gezet zodat de patiënt niet uit bed kan vallen en hoog genoeg voor een ergonomische werkhouding van de zorgverlener.

Voor grote patiënten kan het bed met extra 31 cm worden verlengd. De beddengoedlade is een ingebouwde opslagruimte aan het

voeteneinde waarin de patiënt zijn of haar kleding en wasgoed kan opbergen en de verpleegkunde zijn of haar afstandsbediening.


Het vijfde wiel maakt het sturen en draaien van het bed gemakkelijker, wat minder belastend is voor de rug van de zorgverlener en waardoor het bed in nauwe ruimten beter te manoeuvreren is.

Door de mobiele hoofdeindplank is een meer ergonomische werkhouding voor zorgverleners mogelijk. Het hoofd- en voeteneinde kunnen gemakkelijk worden verwijderd zodat een zorgverlener snel de patiënt kan helpen.

CPR-hendels bevinden zich aan de linker- en rechterkant van de rugsteun. De hendels zitten in het zicht en worden gebruikt voor het omhooghalen en laten zakken van de zijhekkens.

Het activeren van de noodhendel voor reanimatie zet het bed op 0° wat belangrijk is voor het goed kunnen reanimeren van patiënten.

Door de "Always-on" verlichting onder het bed hoeft de patiënt niet in het donker uit bed te stappen waardoor de kans kleiner is dat de patiënt valt en letsel oploopt.

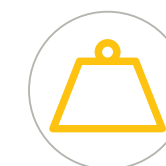

Veilige werkbelasting tot 250 kg



Geïntegreerd bedverlengstuk 31 cm



Hoogteafstelling 37 – 75 cm

De gezondheidszorg moet zich aanpassen aan de wensen en behoeften van de patiënt, zijn of haar familie en de zorgverlener. Daarom levert Stryker allerlei producten en services die de gezondheid en het welzijn van zowel patiënten als zorgverleners kunnen helpen verbeteren.

SV2 Aanpasbaar

De SV2 is een waardevol bed met zeer veel mogelijkheden, waaronder standaardfuncties als een indicator voor laagste bedstand, dubbele bediening voor zijhekken en een handige one-touch knop voor de elektronische bediening. De SV2 Aanpasbaar kan met diverse functies worden uitgebreid.

1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 (optie voor het selecteren van meerdere functies)

SV2-pakket Plus

Het leveren van bedden die aan uw vraag voldoen, is belangrijk voor ons. Naast de SV2 Aanpasbaar leveren wij twee extra pakketten voor een zo groot mogelijke keuze. Het pakket Plus bevat alle standaardfuncties plus dubbele zwenkwielen, een vijfde wiel en een afstandsbediening voor de verpleegkundige.

Meegeleverde opties: 1, 2 en 5

SV2-pakket Compleet


Dit pakket is ons compleet uitgeruste model met alle beschikbare opties voor al uw wensen.

Meegeleverde opties: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7



Overzicht van de opties

- | | |
|---|---|
| 1 Vijfde wiel | 5 Dubbele zwenkwielen |
| 2 Afstandsbediening voor de verpleegkundige | 6 Verlichting onder het bed |
| 3 Afstandsbediening voor de patiënt | 7 Röntgendoorlaatbare rugsteun met cassettehouder |
| 4 Bedverlengstuk met beddengoedlade | |

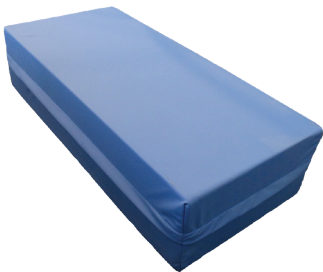

Peluw voor bedverlengstuk

Peluw van 12 cm

(D) 33 cm x (B) 71 cm x (H) 18 cm
Nettogewicht: 1,4 kg

Peluw van 14 cm

(D) 33 cm x (B) 71 cm x (H) 20 cm
Nettogewicht: 1,6 kg



Roestvrij stalen IV-paal

In hoogte verstelbaar
Draagvermogen:
2 kg per haak
Breedte: 42 cm
Hoogte 107 - 175 cm



Papegaai voor patiënt

+ driehoek
Draagvermogen:
75 kg
Breedte: 81 cm
Hoogte 150 cm



Rechte infuuspiaal

In hoogte verstelbaar
Draagvermogen:
2 kg per haak
Hoogte 116,7 cm - 178 cm



Urinezakhaken

203 x 198 x
139 mm [BxHxD]



Zuurstoffleshouder

275 x 390 x 145 mm
[BxHxD]

Conform internationale maatstaven voor bedden

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| • IEC 60601-1 Ed. 3.1: 2012 | • IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015 |
| • IEC 60101-1 Ed. 3.1: 2013 | • IEC 60601-2-54 Ed. 1.1: 2015 |
| • IEC 62366 Ed. 1.1:2014 | • IEC 60601-22014 Ed. 4.0 |

Bedkleuren



Stryker blauw:
Pantone 534C



Wit:
(RAL 9002)



Zijdegrijs:
(RAL 7044)



Pastelblauw:
(RAL 5024)




Signaalgeel:
(RAL 1003)

Drie houten opties



Hout

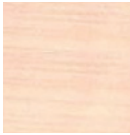

Esdoorn



Walnoot

De SV-matrassen zijn specifiek bedoeld voor een comfortabel verblijf tijdens een ziekenhuisopname. Deze SV-matrassen helpen bij het voorkomen en behandelen van doorligwonden.

Schuimmatrassen

Matrasmodellen	Afmeting	Brandvertraging
12 cm basisschuim	200 x 86 x 12	•Geen •EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175
14 cm basisschuim	200 x 86 x 14	•Geen •EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175

Kenmerken

- Duurzame en kostenbesparende ondersteuning van patiënten
 - Aanpasbaar aan de meeste bedden
 - Omkeerbaar
- Zeer veerkrachtig en mono-dichtheidsschuim
 - Comfortabel bij alle bedstanden


Matrassen van visco-elastisch schuim

De bovenkant van het visco-elastische schuim past zich aan het lichaam van de patiënt aan, verdeelt het gewicht van de patiënt gelijkmatig en volgt de lichaamscontouren van de patiënt voor meer comfort en een betere drukverdeling.


Matrasmodellen	Afmeting	Brandvertraging
12 cm visco-elastisch schuim	200 x 86 x 12	•Geen •EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175 •BS7177

Kenmerken

- Temperatuurgevoelig
 - Vermindert de druk op het patiëntenligvlak
 - Waterdichte hoes
- Past zich aan de vorm van het lichaam aan
 - Stretch-hoes
 - Dampdoorlatend

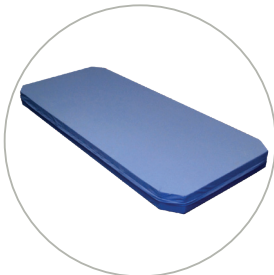

Schuimmatras

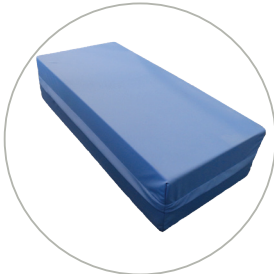

Peluwmatras



Visco-matras

Kwalitatief hoogstaande producten en services zijn onderdeel van de commitment van Stryker om klanten tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Onze ProCare-services voldoen aan de hoogste normen met een uitstekende ondersteuning voor de behoeften van uw instelling.

ProCare-services

Via de ProCare-services zorgen onze uiterst deskundige technici ervoor dat uw apparatuur altijd klaar is voor gebruik. ProCare is een partner waarop u kunt rekenen. Zij nemen u de zorg uit handen en zorgen er tevens voor dat u alles voor uw medewerkers en patiënten kunt doen wat in uw vermogen ligt.




Flexibele financiering

Onze flexibele financiële mogelijkheden voorzien in een scala aan alternatieven die passen bij de behoeften van uw organisatie. Wij werken samen met onze klanten om de financiële oplossing te vinden die aansluit op uw behoeften*.

Het verschil maken. Onze ecologische voetafdruk verminderen. Het welzijn van onze planeet gaat ons aan het hart en is voor ons net zo belangrijk als de gezondheid van de mensen die er leven.



Gevaarlijke en onschadelijke afvalstoffen worden door ons bedrijf gerecycled.

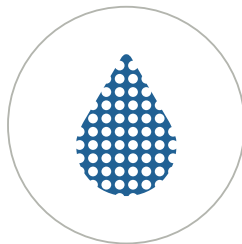

Gebruik van milieuvriendelijke verfchemicaliën



ISO 14001:2004 Conform het milieubeheersysteem

*Programmabeschikbaarheid is afhankelijk van het land en de productportfolio. Neem voor informatie en beschikbaarheid contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

Medical

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Een professional in de gezondheidszorg moet altijd op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en adviseert dat professionals in de gezondheidszorg worden getraind in het gebruik van elk specifiek product voordat zij dit gebruiken.

De verstrekte informatie is bedoeld om het volledige aanbod van Stryker-producten te laten zien. Een medische zorgverlener moet vóór het gebruik van een Stryker-product altijd de bijsluiter, het productetiket en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Sommige producten zijn mogelijk niet verkrijgbaar op alle markten omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de registratie- en/of medische praktijk op de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen heeft over de beschikbaarheid van Stryker-producten in uw regio.

Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde bedrijven zijn eigenaar van, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handelsmerken of servicemerken: Stryker, SV2. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars of houders.

De beschreven producten zijn overeenkomstig de toepasselijke EU-regelgeving en -richtlijnen voorzien van de CE-markering.

Dit materiaal is niet bedoeld voor distributie buiten de EU en EFTA.



OTHMED-BRO-60_16251NL

SDL 11/2020

2017-16251