

stryker

**SV2**

# Hastane Yatađı

**İhtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir**



### **En önemli özelliđi, çok yönlü olması**

Stryker'da SV2 modelimiz gibi bir hastane yatađının üretilmesi birlikte çalışmayı gerektirir. Bütün dünyada sizin gibi tıp uzmanları ile birlikte çalışarak özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceđiniz kaliteli bir yatak sunuyoruz.



**Hareketli yatak başı**


Hastaya bakım verenlerin yatağı daha ergonomik şekilde konumlandırabilmesini ve hastanın tüm yatak pozisyonlarından daha iyi faydalanmasını sağlar.

**Entegre kontrol panelleri**

Sezgisel kontroller hem bakım verenlere hem de hastaya tüm yatak pozisyonlarında büyük işlevsellik sunar.

**İkili regresyon**

Hem sakral basıncı hem de hastanın kaymasını azaltmaya yardımcı olmak üzere 89 mm sırt desteği ve 39 mm diz bölgesinden bükülme regresyonu sağlar.

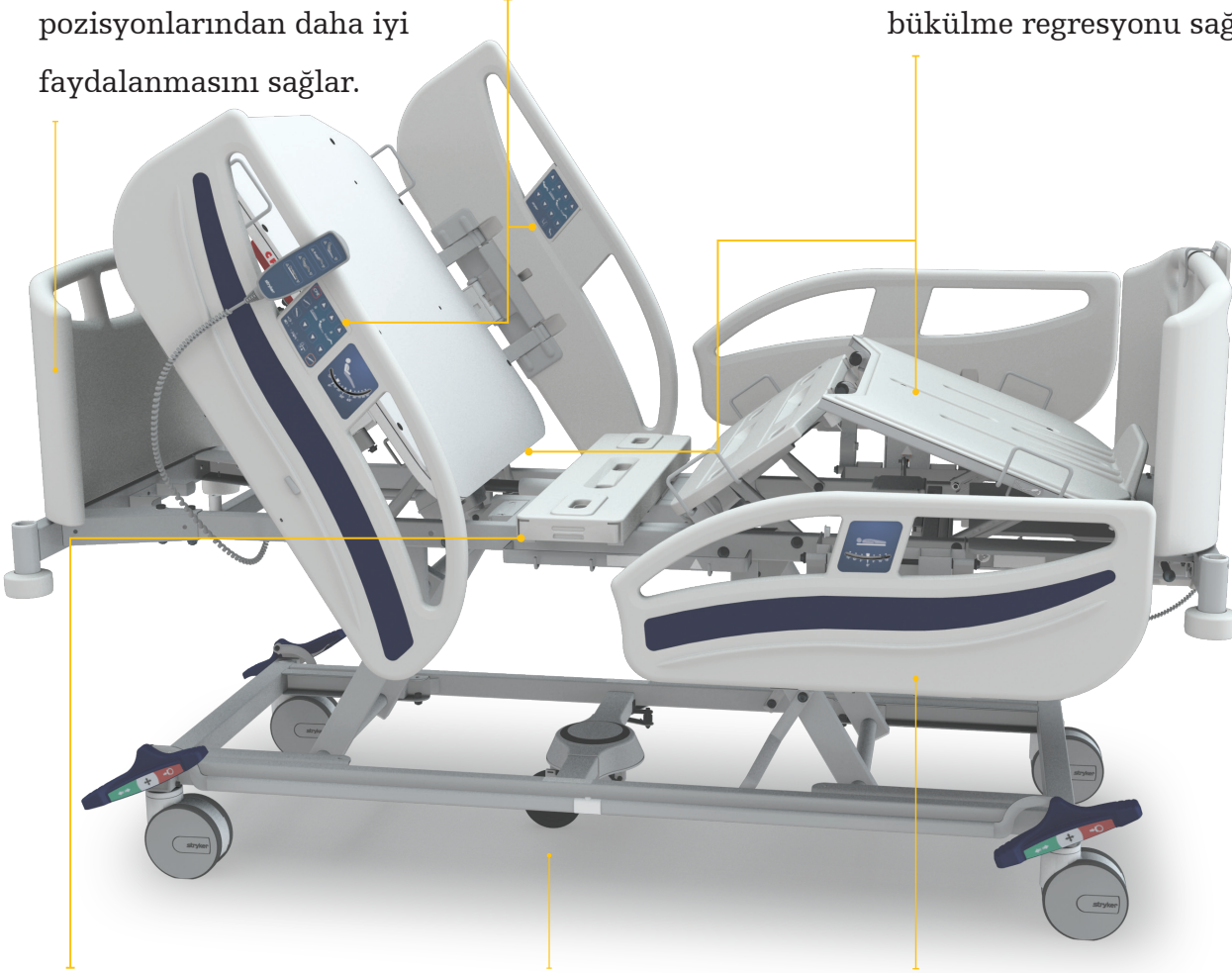**"Her zaman açık" duran yatak altı ışığı**

Geceleri yataktan kalkarken hastanın etrafı daha iyi görebilmesini sağlayarak düşmeleri önlemeye yardımcı olur.

**5. teker**

Beşinci tekerin hareketliliği, yatağın manevra yeteneğini artırarak hastaya bakım verenlerin sırt akatlanmalarını ve ağırlarını azaltmaya yardımcı olur. Beşinci teker yatağın düz bir şekilde gitmesine olanak verir ve küçük alanlarda hareket etmesini kolaylaştırır.

**Katlanılan yan korkuluklar**

Hastanın yataktan kalkmasını kolaylaştırır; sıkışma boşluklarını tamamen kapatarak ve en aza indirerek hastanın güvenliğini artırır. Yan korkulukların sadece tek elle indirilebilmesi hastaya bakım verenlere kullanım kolaylığı sağlar.



250 kg güvenli çalışma yükü



10 yıl kullanım ömrü



IEC 60601-1-2:2014



Alçak yatak göstergesi

**SV2 hastane yatağı, bir yandan bakım verenlerin verimli bir şekilde çalışmasına yardım ederken diğer yandan da hastaların sağlığını ve konforunu artırmak üzere biçim ve işlevselliği başarılı bir şekilde birleştirir. Hastaların ve bakım verenlerin güvenliğini her zaman ön planda tutarız:**



### **Alçak yatak göstergesi**

Alçak yatak göstergesi, yatak en alçak seviyede olduğunda bunu açıkça göstererek düşmelerden kaynaklanan hasta yaralanmalarını azaltmaya yardım eder. Gece olduğunda bakım verenler yatakların durumunu açıkça görebilir ve böylece hepsinin en alçak konumda olmasını sağlayabilirler.



### **Akıllı kalkış**

Odaklandığımız temel nokta hastaların düşmesini önlemektir. Akıllı kalkış fonksiyonu, sırt desteğini kaldırır ve yatak yüzeyini en kolay kalkış yüksekliğine getirir. Hastalar, güvenlik yan korkuluğuna tutunarak yataktan kalkabilirler.

### **Güvenlik yan korkulukları**

Hasta güvenliği bir numaralı önceliğimizdir. SV2 aşağıya katlanan yan korkuluklar, hastanın kalkışını kolaylaştırır ve şilte tabanını tamamen kaplayarak güvenliğini artırır. Yan korkulukların her biri sadece tek bir elle aşağı indirilebilir. Tasarımı, sıkışma boşluklarını en aza indirir, kolay ve etkili bir şekilde temizlenmelerine olanak sağlar.

### Entegre yan korkuluk kontrolleri

SV2'de ikili yan korkuluk kontrolleri vardır, böylece hem hasta hem de bakım veren yatağı kolayca çalıştırabilir. Hemşireye dönük olan yan korkuluk ünitesi, acil bir durumda bakım verenlerin hasta kontrollerini kilitleyerek elektronik CPR fonksiyonunu kullanmalarına imkan verir.



### Hasta kumandası

Bütün hastalar en rahat konumda olmayı hak ederler. Hasta kumandası, hastaların yatak konumunu ihtiyaçlarına göre kolayca ayarlamalarını sağlar.

### Hemşire kontrol ünitesi

Sağlık görevlileri, yatağın etrafında hareket etmek ve hastalarına gereken bakımı sağlamak için esnekliğe ihtiyaç duyarlar. Hemşire kontrol ünitesi, yatağın farklı konumlardan kontrol edilmesine olanak verir. Elektronik CPR fonksiyonu, Trendelenburg, ters Trendelenburg ve muayene pozisyonu ile donatılmış olup hastalarınızın bakımı farklı konumlardan sağlanabilir.



**Tek tuş kontroller, hastaların ve bakım verenlerin yatak pozisyonunu kolayca ayarlamasını sağlayarak bedensel iş gereksinimini ortadan kaldırır. Hem hastalara hem de bakım verenlere ergonomik bir tasarım sunar.**

**Çok yönlü.** Bakım süresi boyunca.



**SV2 hastane yatağı, hem verimlilik hem de güvenlik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bütün hastaneler için çok yönlü bir yatak olarak geliştirilmiştir. Hem bakım verenin kullanım kolaylığına hem de hastanın konforuna göre tamamen ayarlanabilir.**

37 ila 75 cm'lik geniş yükseklik ayar aralığı, hastaların düşmesini önlemek üzere yatağı yere yakın duruma getirir ve bakım verenler için de ergonomik bir çalışma pozisyonu sağlamaya yardımcı olur.

Uzun boylu hastalar, yatağı 31 cm daha uzatan yatak uzatıcıdan faydalanabilirler.

Birleşik nevresim taşıyıcı, hastanın giysilerinin, kirli çamaşırların ve ayakucu başlığındaki hemşire kontrol ünitesinin saklanabileceği ve ayakucu başlığında bulunan gömülü bir saklama birimidir.

5. teker, gelişmiş yönlendirme ve döndürme sağlayarak bakım verenin sırt sakatlanmalarını ve ağırlarını azaltır ve dar alanlarda özellikle faydalıdır.



Hareketli yatak başı, bakım verenler için daha ergonomik bir çalışma pozisyonu sağlar. Bakım verenlerin hastalarına daha çabuk bir şekilde erişmesini sağlamak üzere baş ve ayak başlıkları kolayca çıkarılabilir.

Sırt desteğinin hem sol hem de sağ tarafında CPR kolları yer almaktadır. Yan korkuluklar kalkık ve inik pozisyondayken de kollara kolayca erişilebilir.

CPR serbest bırakma özelliğinin aktive edilmesi, yatağı etkili bir CPR için gereken 0° konumuna getirir.


Her zaman açık duran yatak altı ışığı, geceleri yataktan kalkarken hastanın etrafı daha iyi görebilmesini sağlayarak hastaların düşmesini önlemeye yardımcı eder.



250 kg güvenli çalışma yükü



Yatak Uzatıcı  
31 cm

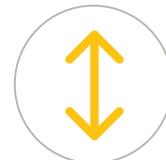

Yükseklik ayarı  
37 – 75 cm

**Sağlık bakımı hastaların, ailelerin ve bakım verenlerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilmelidir. İşte bu sebeple Stryker, hem hastaların hem de bakım verenlerin sağlık ve zindeliğini geliştirmeye yardım eden geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunar.**

### **SV2 Custom**

SV2; alçak yatak göstergesi, ikili yan korkuluk kontrolleri ve pratik tek tuş elektronik kontroller gibi standart özellikleri içeren, özellik açısından zengin ve değer odaklı bir yataktır. SV2 Custom, isteğe bağlı özellikler eklenerek özelleştirilebilir.

**1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 (birden fazla özellik seçme opsiyonu)**

### **SV2 Package Plus**

Size ihtiyaçlarınıza uyan bir yatak sunmak bizim için önemlidir. SV2 Custom'a ek olarak, karar vermeyi kolaylaştıracak iki ekstra paket sunuyoruz. Package Plus, tüm standart özellikler artı ikiz teker, beşinci bir teker ve hemşire kontrol ünitesini içerir.

**Dahil olan seçenekler: 1, 2 ve 5**

### **SV2 Package Complete**

SV2 Complete, ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere mevcut tüm seçenekleri içeren tam donanımlı modelimizdir.


**Dahil olan seçenekler: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7**



### **Sırayla seçenekler**

- |                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 5. teker                | <b>4</b> Nevresim taşıyıcılı yatak uzatma             |
| <b>2</b> Hemşire kontrol ünitesi | <b>5</b> İkiz tekerler                                |
| <b>3</b> Hasta kumandası         | <b>6</b> Yatak altı ışığı                             |
|                                  | <b>7</b> Kaset tutuculu röntgen geçirgen sırt desteği |



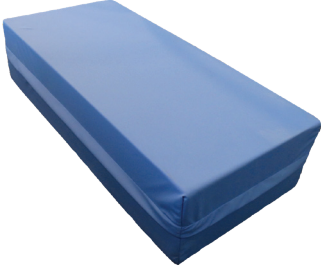

### Yatak uzatma için ek parça

#### 12 cm'lik ek parça


(D) 33 cm x (G) 71 cm x (Y) 18 cm

Net ağırlık: 1,4 kg

#### 14 cm'lik ek parça

(D) 33 cm x (G) 71 cm x (Y) 20 cm

Net ağırlık: 1,6 kg

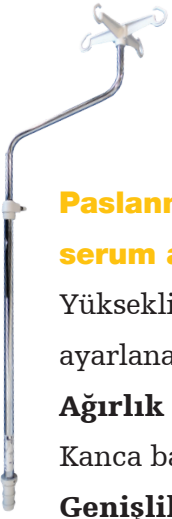

### Paslanmaz çelik serum askısı

Yüksekliği ayarlanabilir

**Ağırlık kapasitesi:**

Kanca başına 2 kg

**Genişlik:** 42 cm

**Yükseklik:**

107 cm – 176 cm



### Tutunmalık

+ Üçgen

**Ağırlık**

**kapasitesi:** 75 kg

**Genişlik:** 81 cm

**Yükseklik:**

150 cm



### Düz serumluk askısı


Yüksekliği ayarlanabilir

**Ağırlık kapasitesi:**

Kanca başına 2 kg

**Yükseklik:**

116,7 cm - 178 cm

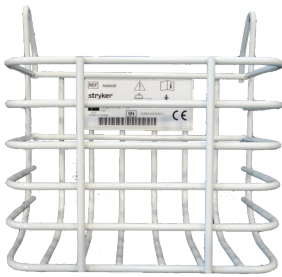

### İdrar torba sepeti

203 mm x 198 mm x

139 mm [GxYxD]



### Oksijen tüp taşıyıcı

275 mm x 390 mm x

145 mm [GxYxD]

### Uluslararası yatak standartlarına uygundur

- IEC 60601-1 Bas. 3.1: 2012
- IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015
- IEC 60101-1- 6 Bas. 3.1: 2013
- IEC 60601-2-54 Bas. 1.1: 2015
- IEC 62366 Bas. 1.1:2014
- IEC 60601-1-2:2014 Bas. 4.0

### Yatak renkleri



Stryker Mavisi:  
Pantone 534C



Beyaz:  
(RAL 9002)



İpek Gri:  
(RAL 7044)



Pastel Mavi:  
(RAL 5024)



Sinyal Sarı  
(RAL 1003)

### 3 ahşap seçeneği



Ahşap



Akçağaç



Ceviz

**SV şilte serisi, hastaları hastanede kaldıkları süre boyunca rahat ettirmek üzere tasarlanmıştır. SV şilteleri, basınç ülserlerinin önlenmesine ve tedavisine yardımcı olmaya yöneliktir.**

### Sünger serisi şilteler

Şilte seçenekleri	Boyut	Yangın bariyeri seçenekleri
12 cm standart sünger	200 x 86 x 12	•Yok •EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175
14 cm standart sünger	200 x 86 x 14	•Yok •EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175

### Özellikleri

- Uzun ömürlü ve uygun maliyetli hasta desteği
- Çok esnek ve mono-yoğunluklu sünger
- Pek çok yatak çerçevesine uygun
- Tüm yatak pozisyonlarına uyar
- Döndürülebilir


### Viskoelastik sünger serisi şilteler

Viskoelastik sünger yüzeyi hastanın vücuduna göre şekil alır ve ağırlığı eşit şekilde dağıtır. Vücudu her konumda çevreleyerek konforu artırır ve basıncın yeniden dağıtılmasını sağlar.

Şilte seçenekleri	Boyut	Yangın bariyeri seçenekleri
12 cm viskoelastik sünger	200 x 86 x 12	•Yok •EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175 •BS7177

### Özellikleri

- Sıcaklığa karşı duyarlı
- Vücut şeklini alır
- Ara yüz basıncını azaltır
- Multi-stretch kılıf
- Su geçirmez kılıf
- Buhar geçirgen

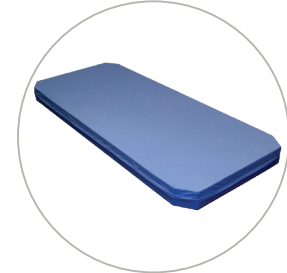

**Sünger şilte**



**Ek şilte**




**Visco şilte**

**Bir fark yaratmak.** Etkimizi azaltıyoruz.

Gezegenimizin durumunun, üzerinde yaşayan insanların sađlıđı kadar önemli olduđunu düşünüyoruz.



**Hem zararlı hem de zararlı olmayan atıklar kendi tesisimizde geri dönüştürülür.**

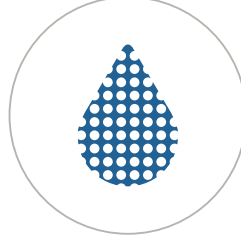

**Çevre dostu boya kimyasallarının kullanımı.**



**ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemine uygundur**

## Medical

**Bu belge sadece sađlık görevlilerinin kullanımına yönelik olarak hazırlanmıřtır.**

Sađlık görevlisi, hastanın tedavisi sırasında, özel bir ürünü kullanıp kullanmamaya karar verirken, daima kendi profesyonel klinik karar becerisine güvenmelidir. Stryker, tıbbi tavsiyede bulunmamakta ve özel herhangi bir ürünü, cerrahi girişimlerde kullanmadan önce, kullanımı konusunda sađlık görevlilerinin eđitim almalarını önermektedir.

Verilen bilgiler, Stryker tarafından sunulan geniş ürün yelpazesini ortaya koymak üzere hazırlanmıřtır. Herhangi bir Stryker ürünü kullanmadan önce bir sađlık uzmanının ambalajdan çıkan ürün prospektüsünü, ürün etiketini ve/veya kullanma talimatlarını mutlaka incelemesi gerekir.

Ürünlerin piyasada bulunması, ilgili pazarlardaki yasal ve/veya tıbbi uygulamalara bađlı olduđundan, ürünler tüm pazarlarda bulunmayabilir. Stryker ürünlerinin bölgenizde bulunma durumuyla ilgili sorularınız için lütfen Stryker temsilcinizle iletişime geçiniz.

Stryker Corporation veya birimleri ya da şirket bünyesine bađlı diđer kuruluşlar, řu ticari markalara veya servis işaretlerine sahiptirler, bunları kullanırlar veya bunlar için başvuruda bulunmuşlardır: Stryker, SV2. Diđer tüm ticari markalar, bunların ilgili sahiplerinin veya hamillerinin ticari markalarıdır.

Tanıtmı yapılan ürünler yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Direktiflerine uygun řekilde CE işareti taşımaktadır.

Bu materyal AB ve EFTA dıřındaki ülkelere yönelik deđildir.



OTHMED - BRO - 6 0 1625 1 TR

OTHMED-BRO-60\_16251TR Rev. 1

SDL 08/2020

2017-16251

Copyright © 2020 Stryker

stryker.com