

Wózek transportowy



Łatwy transport pacjentów

Wózek transportowy firmy Stryker posiada piąte koło ulepszające przyczepność i sterowanie na zakrętach oraz dźwignie hamulców centralnych zapewniających optymalną stabilność.



Piąte koło

Opuszczane piąte koło zapewnia lepszą możliwość manewrowania.



System hamulców

Metalowy system hamulców zapewnia stabilność.



Składane poręczce boczne

Składane poręczce boczne pomagają zapewnić bezpieczeństwo pacjenta.

Opcja **dostępnej z czterech stron wózka obsługi hamulców i sterowania** ułatwia pracę personelowi.

Opcjonalne **podparcie kolan** zwiększa wygodę pacjenta.

Odbojniki w różnych kolorach umożliwiają dostosowanie wózka w celu ułatwienia identyfikacji sprzętu.



Granatowy



Szary



Czerwony

Wózek transportowy



Wyposażenie podstawowe

- Koła Omni Surface o średnicy 20 cm (8 cali)
- Składane poręcze boczne w modelu z leżem 66 cm (26 cali) (składane w kierunku nóg)
- Składane poręcze boczne w modelu z leżem 76 cm (30 cali) (składane w kierunku głowy)
- Cztery gniazda na płyny infuzyjne
- Dźwignie hamulca centralnego zlokalizowane po obu stronach wózka
- Zintegrowana taca z uchwytem na butlę tlenową
- Piąte koło kierunkowe (unoszone/opuszczane)
- Odbojniki rolkowe
- Nieruchoma nożna część leża
- Oparcie pleców z dwucylindrowym systemem pneumatycznym
- Dwukolumnowy system hydrauliczny
- Podwójny system hydrauliczny ze sterowaniem nożnym po obu stronach wózka
- Możliwość uzyskania pozycji Trendelburga bez użycia rąk
- Osłony kół

Dane techniczne

	Leże 66 cm	Leże 76,2 cm
Numer modelu	747	748
Długość całkowita	211 cm	211 cm
Szerokość całkowita	76 cm	86 cm
Udźwig	227 kg	227 kg
Zakres wysokości (do wierzchu leża)*		
Maks. wysokość	91 cm	91 cm
Min. wysokość	55 cm	55 cm
Regulacja leża		
Oparcie pleców	0°–90°	0°–90°
Podparcie kolan		0°–30°
Poz. Trendelenb./anty-Trendelenb.	± 18°	± 18°
Materac dla pacjenta	66 cm x 192 cm	76 cm x 192 cm
Poręcze boczne	34 cm x 140 cm	34 cm x 140 cm
Średnica kół	20 cm	20 cm

Gwarancja

Jeden rok na części, robociznę i transport lub dwa lata na części. Gwarancja może różnić się w zależności od kraju. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Stryker Medical.

Wyposażenie dodatkowe i opcje dotyczące materaca

- Materac IsoFlex SE o szerokości 76 cm (30 cali)
- Materac ComfortGel SE o szerokości 66 cm lub 76 cm (26 cali lub 30 cali)
- Materac Ultra Comfort SE o szerokości 76 cm (30 cali) z możliwością wyboru grubości 8 cm lub 10 cm (3 cale lub 4 cale) lub 66 cm x 10 cm (26 cali x 4 cale)
- Półka na defibrylator
- Półka na defibrylator/szczyt wózka/przedłużenie leża
- Podnózek/uchwyt na kartę pacjenta
- Obsługa hamulców i sterowania dostępną z czterech stron wózka
- Składane uchwyty do prowadzenia wózka
- Wieszaki na płyny infuzyjne
 - Mocowane na stałe, składane, dwu- lub trójstopniowe, od strony nóg pacjenta
 - Wyjmowane
- Pasy do unieruchomienia pacjenta
- Taca na narzędzia/posiłki
- Miękkie wyściółki poręczy
- Pionowy uchwyt na butlę tlenową
- Możliwość przedłużenia okresu gwarancji
- Podparcie kolan z regulacją ręczną (korbą) (wyłącznie model 748)

Medical

Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Podjęcie decyzji o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregośkolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregośkolwiek z produktów firmy Stryker lekarz musi zapoznać się z ulotką informacyjną, etykietami oraz instrukcją użytkowania produktu.

Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Przedstawione produkty oznaczono symbolem CE zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.

Niniejsze materiały nie są przeznaczone do dystrybucji poza obszarem UE i ESWH.




01252005PL
01252005PL Rew. J.3
DLS 12/2019
2017-16227

Copyright © 2019 Stryker
stryker.com



Stryker Medical
3800 E. Centre Ave., Portage
MI 49002 U.S.A.

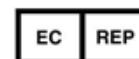

Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
The Netherlands

Dystrybucja:
Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa, Polska
t. +48 22 429 55 50