

stryker



Massima flessibilità
per una cura migliore

Monitor/defibrillatore LIFEPAK® 15

Versatile. Intuitivo. Potente.

Gestisci le emergenze dei tuoi pazienti con un dispositivo altamente adattabile che può essere utilizzato in qualsiasi area dell'ospedale. Si tratta di un monitor/defibrillatore facile da utilizzare e che fornisce informazioni immediate per un intervento rapido, pronto all'uso in ogni momento e pertanto la soluzione ideale anche per gli eventi più critici. Scopri un sistema di monitoraggio completamente accessorizzato con energia incrementabile fino a 360 J, guida avanzata alla CPR e visibilità aumentata per semplificare il lavoro e migliorare gli esiti dei pazienti.

Adattabile

- Ideale per qualsiasi area dell'ospedale, dai carrelli di emergenza al monitoraggio avanzato
- Standardizzazione delle apparecchiature e ottimizzazione della formazione del personale
- Si adatta ai protocolli e alle esigenze di assistenza di tutti i reparti con opzioni altamente configurabili

Facile da usare


- Un pulsante, una funzione: attivazione rapida delle terapie, indipendentemente dal livello di abilità degli operatori sanitari
- Consente di rispondere in tutta sicurezza con un facile accesso a una tastiera intuitiva
- Consente di ricevere i dati della CPR per un efficace riesame post-evento attraverso gli elettrodi per defibrillazione standard

Potente

- Consente di trattare i pazienti difficili da defibrillare con energia incrementabile fino a 360 J
- Consente di migliorare la qualità della CPR attraverso il feedback fisiologico utilizzando le tendenze della EtCO₂
- Consente di accelerare l'intervento delle équipe mediche grazie a semplici operazioni di acquisizione e trasmissione dei referti degli ECG a 12 derivazioni ad altre strutture o reparti

Affidabile

- Massima soddisfazione degli utenti in tutte le singole categorie (MD Buyline, Q3 2019)¹
- Controllo della disponibilità dei dispositivi con il monitoraggio virtuale e avvisi automatici per le modifiche di stato
- Manutenzione del dispositivo con piani personalizzati e formazione per gli ingegneri clinici in loco

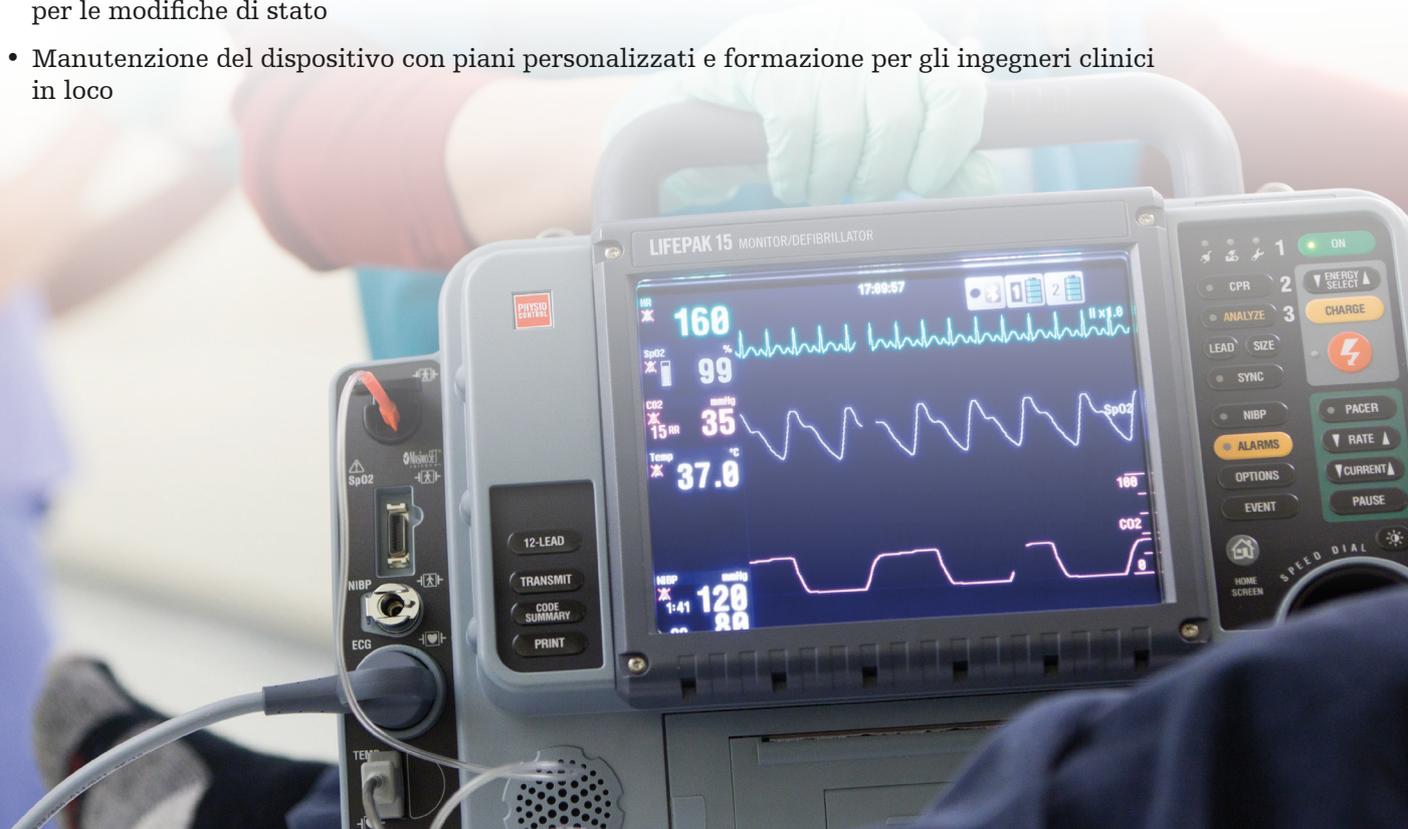

Massima flessibilità a colpo d'occhio

Assicura una facile gestione dei pazienti affetti da STEMI grazie al monitoraggio dell'andamento del tratto ST e alle trasmissioni dell'ECG a 12 derivazioni tramite il sistema LIFENET®

Le due batterie agli ioni di litio a lunga durata garantiscono sei ore di monitoraggio, con opzione aggiuntiva di alimentazione CA

L'impugnatura resistente agli urti e lo schermo a doppio strato resistono alle cadute dal letto e durante il trasporto

Consente di mantenere una frequenza di compressioni costante senza la necessità di un dispositivo esterno aggiuntivo o di costosi elettrodi speciali con un metronomo CPR dal suono chiaro

L'ampio schermo ad alta risoluzione ottimizza la visibilità e include un terzo canale per il monitoraggio delle forme d'onda



Consente una facile raccolta dei dati relativi ai pazienti e alle prestazioni della CPR per una documentazione accurata e una rapida analisi con il software e il servizio di revisione dati CODE-STAT™

Aiuta a identificare il ritorno della circolazione spontanea (ROSC) e a misurare la qualità della CPR con intervalli di forme d'onda EtCO₂ fino a 0-20 mmHg (in conformità alle linee guida ERC) mediante il monitoraggio integrato Medtronic Microstream™ EtCO₂

Il connettore del cavo rinforzato garantisce un'erogazione sicura della terapia

La stampante da 100 mm offre una chiara visibilità delle forme d'onda e dei dati di riepilogo dei pazienti

Riduce la necessità di dispositivi palmari aggiuntivi grazie alle opzioni di monitoraggio avanzato, tra cui PSNI, EtCO₂, SpO₂, CO, Met, ECG a 12 derivazioni, temperatura e pressione invasiva



**Una tradizione
di fiducia**

strykeremergencycare.com

Bibliografia

1. MD Buylne. Monitor/Defibrillator User Satisfaction Ratings. Q3 2019. <https://www.tractmanager.com/>

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Stryker o visitare il sito web all'indirizzo strykeremergencycare.com

Emergency Care

Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario. Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui decide di usare un particolare prodotto nel trattamento di un determinato paziente. Stryker non offre consulenze mediche ed esorta il personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo nelle procedure.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di illustrare l'offerta dei prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare le istruzioni per l'uso per conoscere istruzioni, indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali eventi avversi completi, prima di usare qualsiasi prodotto Stryker. È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili in tutti i mercati poiché la loro disponibilità è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Per domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona, rivolgersi al proprio rappresentante. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. I prodotti descritti sono contrassegnati dal marchio CE in conformità alle normative e direttive dell'UE in vigore.

Stryker o le sue affiliate sono proprietarie, usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: CODE-STAT, LIFENET, LIFEPAK, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

L'assenza di un prodotto, una funzione, un nome di servizio o un logo dal presente elenco non costituisce una rinuncia al marchio commerciale di Stryker o ad altri diritti di proprietà intellettuale relativamente a detto nome o logo.

05/2021

GDR 3308975_G

Copyright © 2021 Stryker

 **CE Classe IIb (0123)**
Physio-Control, Inc
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Numero verde 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Paesi Bassi
Tel. +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001