

**stryker**

Monitor/desfibrilador

**LIFEPAK® 35**



**Intuitivo.  
Clínicamente avanzado.  
LIFEPAK TOUGH.**





Cuando atiende una emergencia, necesita  
un monitor/desfibrilador que sea  
**clínicamente avanzado y resistente<sup>1,2</sup>.**





Diseñado sobre la base de un legado de confianza.

## Preparado para el futuro.

Durante décadas, hemos desarrollado la tecnología y los dispositivos que los reanimadores como usted utilizan en situaciones críticas. Nuestra merecida reputación se caracteriza por prestar atención al detalle y ofrecer dispositivos con un rendimiento que va más allá.

El desarrollo de nuevos productos lleva tiempo, pero los resultados valen la pena. Cada paso de nuestro proceso ha estado inspirado por su compromiso, ya que abordamos sus necesidades con el objetivo de superar sus expectativas. Este LIFEPAK 35 puede ser diferente, tanto por fuera como por dentro, pero el objetivo principal sigue siendo el mismo: **ayudar a salvar vidas.**

## Presentación del **LIFEPAK 35**

El LIFEPAK 35 es un monitor/desfibrilador clínicamente avanzado con tecnología y herramientas patentadas dispuestas sobre una plataforma moderna e intuitiva<sup>3</sup> que permiten prestar una atención avanzada al cliente. Es un dispositivo preparado para su uso que se ha diseñado para facilitar una atención cardíaca segura<sup>1</sup> y permitir la excelencia clínica en el entorno sanitario moderno de hoy en día.



### **Intuitivo**

La pantalla táctil grande y fácil de usar<sup>3</sup> del LIFEPAK 35 y las herramientas avanzadas de ayuda a la toma de decisiones clínicas proporcionan una experiencia clínica personalizable que contribuye a reducir la carga cognitiva<sup>3</sup>.



### **Clínicamente avanzado**

Cuando cada segundo cuenta, necesita herramientas y dispositivos que trabajen con la misma rapidez que usted. Gracias a las funciones de conexión avanzadas que ofrecen información y orientación, el LIFEPAK 35 estará siempre de su lado, cuando el tiempo no lo esté.



### **LIFEPAK TOUGH**

Diseñada teniendo presente el legado de los productos que salvan vidas y reinventada para los profesionales sanitarios modernos de hoy en día, la plataforma LIFEPAK 35 ofrece la confianza y la resistencia que contribuyen a prestar una atención al paciente avanzada.

# Atención al paciente avanzada en la actualidad y **en el futuro**

En colaboración con clientes como usted, hemos diseñado un dispositivo que le ayuda a tener un mayor control en las situaciones críticas. El monitor/desfibrilador LIFEPAK 35 combina en perfecto equilibrio las tecnologías clínicas avanzadas y la facilidad de uso<sup>1,2</sup> en un dispositivo en el que puede confiar en las situaciones difíciles<sup>3</sup>.

El modo SunVue™ permite ver fácilmente la pantalla con diferentes ajustes de luz<sup>3</sup>.

Las herramientas de documentación integradas pueden ayudarle a reducir el tiempo del tratamiento y los errores de cálculo<sup>1</sup>.

La tecnología cprINSIGHT® contribuye a mejorar la eficacia de la RCP en el modo DEA al reducir las pausas\* durante las compresiones torácicas<sup>5</sup>.

Crea una lista de eventos personalizada con hasta 40 medicamentos y 40 tratamientos<sup>2,7</sup>.

Agilice de forma rápida y sencilla la atención al paciente mediante la configuración de recordatorios personalizados para medicamentos y tratamientos<sup>1</sup>.

Los puertos para cables en ángulo recto orientados hacia la parte frontal permiten acceder con facilidad a los accesorios de monitorización<sup>3</sup>.



\* Las pausas previas a la descarga se redujeron drásticamente a una media de 8 segundos frente a una media de 22 segundos con el DEA convencional. La FCT con cprINSIGHT fue del 86 % frente al 80 % en el grupo del DEA convencional.



LIFEPAK 35: XGA de 10,4", 1024 x 768, 52,9"²

iPad

LIFEPAK 15:

VGA de 8,4", 640 x 480, 33,8"²

## Pantalla táctil grande y resistente

La pantalla táctil de alta definición de 10,4" permite personalizar nuestras funciones. El vidrio duradero y reforzado químicamente<sup>2</sup> es compatible con el uso de guantes dobles y está diseñado para resistir impactos directos y caídas<sup>2</sup>. Se pueden ver a la vez hasta 12 parámetros de monitorización mientras se ordena y cambia el nombre de las derivaciones<sup>3</sup>.

Las opciones de tratamiento, entre las que se incluye el modo DEA pediátrico, ayudan a tratar a los pacientes con un aumento de la energía bifásica de 1 J a 360 J\*<sup>2,6</sup>.

Optimiza el flujo de trabajo al transmitir los datos para su análisis a través de conexiones Wi-Fi o Bluetooth integradas<sup>1</sup>.

Con pulsar una sola vez la pantalla, el personal sanitario puede alternar entre el tiempo real y el tiempo transcurrido durante un suceso<sup>1</sup>.

La interfaz de usuario intuitiva es fácil de utilizar y requiere muy poca formación\*\*<sup>3</sup>.

La visualización en tiempo real de 12/15 derivaciones con STJ Insight™ ofrece una representación gráfica del ECG para facilitar el diagnóstico de las lesiones miocárdicas<sup>1</sup>.

El sistema de batería doble de iones de litio FLEX ofrece nueve horas de monitorización<sup>4</sup>.

El soporte integrado se puede colocar en una posición que optimice su visualización<sup>1</sup>.




\* Consulte las Instrucciones de uso del monitor/desfibrilador LIFEPAK 35 3350861, 2024, para conocer los intervalos de edad para pacientes pediátricos y neonatales.

\*\* Basado en los participantes encuestados.




La tecnología avanzada promueve **la claridad y la confianza**

## Céntrese en atender al paciente con nuestras herramientas de tratamiento clínicamente avanzadas

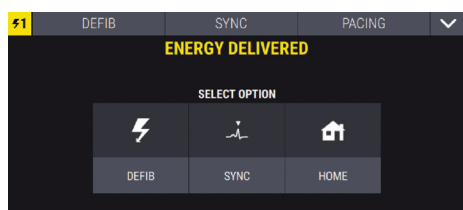


### Menú de decisiones posterior a la sincronización

Después de cada descarga, en la pantalla, aparecerá de forma automática un menú de selección de modos que pedirá al profesional sanitario que evalúe las necesidades del paciente<sup>3</sup>.

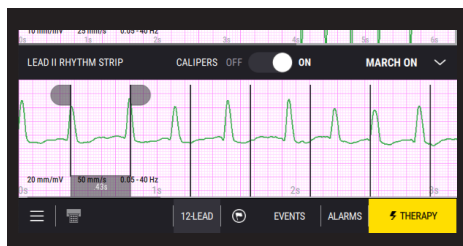

### Calibradores digitales

Muestra en la pantalla el cálculo automático del intervalo cardíaco<sup>1</sup>.

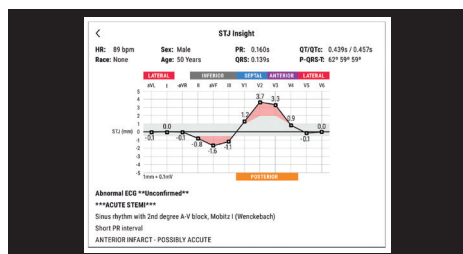

### Información de STJ

Presenta una vista mejorada de las mediciones del segmento ST para ayudar a evaluar la ubicación y la magnitud de los cambios isquémicos del segmento ST. La monitorización de las tendencias del segmento ST también proporciona una alerta automática de los cambios clínicamente significativos para ayudar a los profesionales sanitarios a diagnosticar las lesiones miocárdicas<sup>1</sup>.

## Mejore **su respuesta**

Desde la calle hasta la sala de urgencias, nuestro objetivo es crear flujos de trabajo fluidos que le permitan prestar una atención rápida y de alta calidad bajo presión. El LIFEPAK 35 le permite personalizar las listas de sucesos y de medicamentos<sup>1,7</sup>, realizar un seguimiento del tiempo de la RCP<sup>1</sup> y crear recordatorios que se muestren en la pantalla<sup>1,3</sup>. Al optimizar los procesos, le permitimos centrarse en lo que realmente importa: salvar vidas.

## Manténgase conectado con las soluciones digitales para el sector sanitario LIFENET<sup>8</sup>



### Esté preparado con LIFENET Asset

Gestione los dispositivos de forma remota, reciba las alertas de los estados y vea la ubicación estática o dinámica de los dispositivos<sup>9</sup>.



### Responda eficazmente con LIFENET Care

Mejore la atención sanitaria mediante la transmisión, el uso compartido y la captura de los datos de los pacientes para facilitar la comunicación y la coordinación del equipo<sup>8</sup>.



### Revise rápidamente con CODE-STAT<sup>TM</sup>

Acceda a los datos o compártalos de forma automática, revise el rendimiento e identifique oportunidades de mejora<sup>9</sup>.





## LIFEPAK TOUGH™

Sometido a pruebas rigurosas y con una clasificación IP55, el LIFEPAK 35 está preparado para ayudarle a atender la próxima emergencia<sup>1,2</sup>.



# Un legado de **confianza**

Durante seis décadas, nos hemos asociado con nuestros clientes para diseñar soluciones y desarrollar tecnologías que ayuden a salvar vidas. Nuestros dispositivos se han llevado a la cima del monte Everest y han estado en órbita en la Estación Espacial Internacional. En la actualidad, encontrará más de medio millón de unidades en uso en camiones de bomberos, ambulancias y carritos de paradas de hospitales de todo el mundo<sup>10</sup>. Cuando se asocia con nosotros, también obtiene un servicio y una asistencia excelentes. Nuestro compromiso inquebrantable con la calidad da lugar a dispositivos en los que puede confiar en situaciones críticas, para que pueda centrarse en lo que mejor sabe hacer: salvar vidas en la comunidad, el campo y el hospital.



Para obtener más información sobre el monitor/desfibrilador LIFEPAK 35, póngase en contacto con su representante local de Stryker o visite [stryker.com](https://www.stryker.com).

## Referencias:

1. Datos archivados. Stryker OI 3350861. 2. Datos archivados. Stryker SHVR 3338410. 3. Datos archivados. Stryker HFVR 3338373. 4. Datos archivados. Stryker 3352191. Rev. A. 5. de Graaf, C., Beesems, S. G., Oud, S., Stickney, R. E., Piraino, D. W., Chapman, F. W., & Koster, R. W. (2021). Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. *Resuscitation*, 162, 320-328. 6. Datos archivados. Stryker UND-3331509 sección 6.5. 7. Datos archivados. Stryker Manual técnico 3350864. 8. Datos archivados. Stryker LCCR 3349947 y 3347969. 9. Datos internos en archivo. LSWSIFU. 3327690. 10. Según los datos de ventas internos

Este documento solo deben usarlo profesionales sanitarios. Un profesional sanitario debe basarse siempre en su propio juicio clínico y profesional a la hora de decidir si utilizar un determinado producto para tratar a un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que adquieran formación en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo.

La información que se presenta tiene por objeto demostrar la variedad de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe consultar siempre las instrucciones de uso para obtener información detallada sobre indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles efectos secundarios antes de utilizar cualquiera de los productos de Stryker. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Póngase en contacto con su representante de Stryker si tiene alguna pregunta sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su zona. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Stryker o sus empresas vinculadas poseen, utilizan o han solicitado las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue y Stryker. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños o titulares. La ausencia de un producto, una función, un nombre de servicio o un logotipo de esta lista no constituye una renuncia por parte de Stryker a su marca comercial ni a otros derechos de propiedad intelectual en relación con dicho nombre o logotipo.

04/2025

EC-L35-BROC-1654500\_REV-0\_es\_es Copyright © 2025 Stryker



## Fabricado por:

Physio-Control, Inc.  
11811 Willows Road NE  
Redmond, WA, 98052, EE. UU.  
Teléfono gratuito: 800 442 1142  
[stryker.com](https://www.stryker.com)

## Distribuido por:

Stryker European Operations Ltd.  
Anngrove IDA Business & Technology Park  
Carrigtwohill  
Co. Cork,  
T45 HX08