

stryker

LIFEPAK® 35

Moniteur/défibrillateur



**Intuitif.
Avancé sur le plan clinique.
LIFEPAK TOUGH.**



Lorsque vous devez répondre à des situations d'urgence, il vous faut un moniteur/défibrillateur **avancé sur le plan clinique et robuste^{1,2}**.



S'appuie sur un héritage de confiance.

Prêt à affronter l'avenir.

Depuis des décennies, nous développons des technologies et des dispositifs auxquels les premiers intervenants tels que vous ont recours lors des événements critiques. Notre réputation durement acquise repose sur notre souci du détail et sur les performances de nos produits, toujours au-delà des attentes.

Le développement de nouveaux produits exige du temps, mais les résultats en valent la peine. Chaque étape de notre processus s'inspire de votre engagement, car nous répondons à vos besoins avec pour ambition de dépasser vos attentes. Ce LIFEPAK 35 ne ressemble peut-être pas aux autres, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais l'objectif reste le même : **vous aider à sauver des vies.**

Présentation du LIFEPAK 35

Le LIFEPAK 35 est un moniteur/défibrillateur avancé sur le plan clinique, doté d'une technologie ainsi que d'outils exclusifs et mis au point sur une plateforme intuitive³ et moderne, afin d'offrir des soins de pointe aux patients. Ce dispositif prêt pour l'avenir est conçu pour favoriser l'administration de soins cardiaques en toute confiance¹ et permettre l'excellence clinique dans l'environnement médical moderne d'aujourd'hui.



Intuitif

Le grand écran tactile³ facile à utiliser du LIFEPAK 35 et ses outils de pointe d'aide à la décision clinique offrent une expérience clinique personnalisable contribuant à la réduction du fardeau cognitif³.



Avancé sur le plan clinique

Lorsque chaque seconde compte, vous avez besoin d'outils/d'un dispositif aussi rapides que vous. Grâce à ses fonctionnalités connectées avancées fournissant informations et conseils, vous pouvez compter sur le LIFEPAK 35, même quand le temps joue contre vous.



LIFEPAK TOUGH

Créée grâce à l'héritage de plusieurs générations de produits sauvant des vies et repensée pour les professionnels de la santé modernes d'aujourd'hui, la plateforme LIFEPAK 35 repose sur une base de confiance et de robustesse pouvant contribuer à l'amélioration des soins aux patients.

Améliorer les soins aux patients dès aujourd'hui et pour **les années à venir**

En partenariat avec des clients tels que vous, nous avons mis au point un dispositif afin de vous permettre d'acquérir davantage de maîtrise sur les événements critiques. Le moniteur/défibrillateur LIFEPAK 35 allie technologies cliniques avancées et facilité d'utilisation^{1,2} dans un dispositif sur lequel vous pouvez compter dans les situations difficiles³.

Le mode SunVue™ permet de visualiser facilement l'écran dans différentes conditions d'éclairage³.

Les outils de documentation intégrés peuvent contribuer à réduire le temps de traitement et les erreurs de calcul¹.

cprINSIGHT® aide à améliorer les performances de RCP en mode DAE en réduisant les pauses* entre les compressions thoraciques⁵.

Créez une liste d'événements personnalisée comprenant jusqu'à 40 médicaments et 40 traitements^{2,7}.

Rationalisez rapidement et facilement les soins aux patients en définissant des rappels personnalisés pour les médicaments et les traitements¹.

Les ports de câble à angle droit frontaux permettent de faciliter l'accès aux accessoires de surveillance³.



* Les pauses pré-choc ont été réduites à une moyenne de 8 secondes, contre une moyenne de 22 secondes avec le DAE conventionnel. La fraction de compression thoracique avec cprINSIGHT était de 86 % contre 80 % dans le groupe du DAE conventionnel.

LIFEPAK 35 : XGA 10,4", 1 024 x 768, 52,9 po²

iPad

LIFEPAK 15 :

VGA 8,4", 640 x 480, 33,8 po²

Un écran tactile à la fois grand et robuste

L'écran tactile haute définition de 10,4 pouces offre un affichage personnalisé de nos fonctionnalités. Le verre durable et renforcé chimiquement² peut être utilisé avec deux paires de gants. Il est également conçu pour résister aux impacts directs ainsi qu'aux chutes² et vous permet d'afficher jusqu'à 12 paramètres de surveillance simultanément, tout en triant et en renommant les dérivation³.

Les options thérapeutiques, y compris le mode DAE pédiatrique, permettent de traiter les patients avec une augmentation de l'énergie biphasique de 1 J à 360 J*^{2,6}.

Rationalisez le flux de travail en transmettant des données pour analyse via le Wi-Fi ou le Bluetooth intégrés¹.

Une simple pression sur l'écran permet au soignant de basculer entre l'heure actuelle et le temps écoulé lors d'un événement¹.

L'interface utilisateur intuitive est facile à utiliser et ne nécessite que très peu de formation**³.

L'affichage en direct 12/15 dérivation³ avec STJ Insight™ fournit une représentation graphique de l'ECG pour faciliter le diagnostic des lésions myocardiques¹.



Le système FLEX de double batterie lithium-ion permet une période de surveillance de neuf heures⁴.


La béquille intégrée peut être utilisée pour une visibilité optimale¹.

* Se reporter au mode d'emploi du moniteur/défibrillateur LIFEPAK 35 3350861, 2024 afin de connaître les tranches d'âge pour les patients enfants et nouveau-nés.

** Selon les participants interrogés.


Une technologie de pointe pour **plus de précision et de confiance**

Concentrez-vous sur les soins aux patients grâce à nos outils thérapeutiques cliniquement avancés

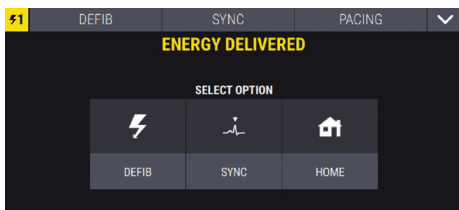


Menu de décision post-synchronisation

Un menu de sélection de mode s'affiche automatiquement à l'écran après chaque choc, invitant le médecin à prendre en compte les besoins du patient³.

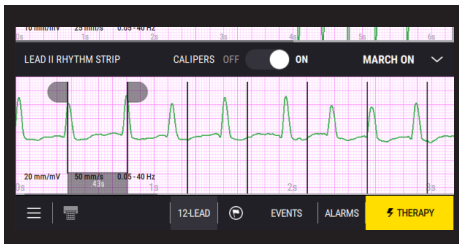

Compas numériques

Affiche le calcul automatisé de l'intervalle cardiaque à l'écran¹.

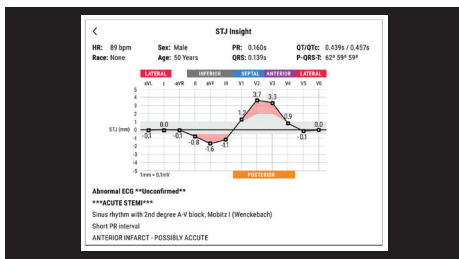

STJ Insight

Présente une vue améliorée des mesures du segment ST pour faciliter l'évaluation de l'emplacement et de l'amplitude des modifications de l'ischémie sur le segment ST. La surveillance des tendances du segment ST fournit également une alerte automatisée des changements cliniquement significatifs pour aider les cliniciens à diagnostiquer les lésions myocardiques¹.

Réduisez **votre temps de réaction**

Que ce soit dans les rues ou aux urgences, notre objectif est de créer des flux de travail fluides vous permettant de dispenser des soins rapides et de haute qualité même lorsque vous êtes sous pression. Le LIFEPAK 35 vous permet de personnaliser des listes d'événements et de médicaments^{1,7}, de suivre le temps de RCP¹ et de programmer des rappels qui s'afficheront à l'écran^{1,3}. En rationalisant les processus, nous vous laissons vous concentrer sur ce qui compte vraiment : sauver des vies.

Restez connecté grâce aux solutions de santé digitales **LIFENET⁸**



Tenez-vous prêt avec **LIFENET Asset**

Contrôlez vos dispositifs à distance, recevez des alertes d'état et affichez la localisation statique/dynamique des dispositifs⁹.



Réagissez efficacement avec **LIFENET Care**

Améliorez la qualité des soins en transmettant, partageant et enregistrant les données des patients dans le but d'améliorer la communication et la coordination de l'équipe⁸.



Analysez rapidement avec **CODE-STATTM**

Accédez automatiquement aux données ou partagez-les, évaluez les performances et identifiez les axes d'amélioration⁹.



LIFEPAK TOUGH™

Testé rigoureusement et doté d'un indice de protection IP55, le LIFEPAK 35 est prêt à vous accompagner quel que soit le lieu de votre prochaine intervention^{1,2}.

Un héritage de **confiance**

Depuis six décennies, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mettre au point des solutions et développer des technologies qui aident à sauver des vies. Nos dispositifs ont atteint le sommet du mont Everest et été placés en orbite dans la Station spatiale internationale. Plus d'un demi-million d'unités sont actuellement utilisées dans les camions de pompiers, les ambulances et les chariots d'urgence hospitaliers à travers le monde¹⁰. En collaborant avec nous, vous bénéficiez également d'un service et d'une assistance d'excellence. Notre engagement sans compromis en matière de qualité nous permet de mettre au point des dispositifs sur lesquels vous pouvez compter dans les situations critiques. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : sauver des vies au sein de la communauté, sur le terrain et à l'hôpital.



Pour plus d'informations sur le moniteur/défiibrillateur LIFEPAK 35, contactez votre représentant commercial Stryker local ou rendez-vous sur le site [stryker.com](https://www.stryker.com).

Références :

1. Données internes, Stryker OI 3350861. 2. Données internes, Stryker SHVR 3338410. 3. Données internes, Stryker HFVR 3338373. 4. Données internes, Stryker 3352191 rév. A. 5. de Graaf, C., Beesems, S. G., Oud, S., Stickney, R. E., Piraino, D. W., Chapman, F. W., & Koster, R. W. (2021). Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. *Resuscitation*, 162, 320-328 6. Données internes, Stryker UND-3331509 section 6.5. 7. Données internes, Manuel technique Stryker 3350864. 8. Données internes, Stryker LCCR 3349947 et 3347969. 9. Données internes. LSWSIFU. 3327690. 10. Selon les données commerciales internes

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de la santé. Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser un produit particulier pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter les possibilités offertes par les produits Stryker. Avant toute utilisation des produits Stryker, les professionnels de la santé doivent systématiquement se référer aux instructions d'utilisation pour consulter la liste complète des indications, contre-indications, avertissements, précautions et potentiels effets indésirables. Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région. Les caractéristiques de l'appareil sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Stryker ou ses entités apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue et Stryker. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires ou détenteurs respectifs. L'absence de tout nom de produit, fonctionnalité ou service, ou de tout logo dans la liste ci-dessus ne saurait constituer une renonciation d'une marque commerciale ou de toute propriété intellectuelle détenue par Stryker relative au dit nom ou logo.

04/2025

EC-L35-BROC-1654500_REV-0_fr_fr Copyright © 2025 Stryker



Fabriqué par :

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 États-Unis
Numéro gratuit : 800 442 1142
[stryker.com](https://www.stryker.com)

Distribué par :

Stryker European Operations Ltd.
Anngrove, IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill
Co. Cork,
T45 HX08