

stryker

LIFEPAK® 35

monitor/defibrylator



**Intuicyjny.
Zaawansowany klinicznie.
LIFEPAK TOUGH.**



W sytuacjach zagrożenia życia potrzebny jest monitor/defibrylator, który oferuje **zaawansowane funkcje kliniczne i wytrzymałość^{1,2}**.



Zaufanie budowane przez lata. **Gotowi na przyszłość.**

Od dziesięcioleci opracowujemy technologie i urządzenia, z których korzystają ratownicy w sytuacjach zagrożenia życia. Nasza zasłużona reputacja zobowiązuje nas do szczególnej dbałości o szczegóły i parametry.

Opracowywanie nowych produktów wymaga czasu, ale wyniki są tego warte. To właśnie zaangażowanie Was – osób ratujących ludzkie życie było naszą inspiracją na każdym etapie tego procesu i pozwoliło nam stworzyć produkt, który wykracza poza oczekiwania jego odbiorców. Monitor/defibrylator LIFEPAK 35 może różnić się od poprzednich modeli zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, ale cel pozostaje niezmienny: **ratowanie ludzkiego życia.**

Przedstawiamy monitor/ defibrylator **LIFEPAK 35**

LIFEPAK 35 to monitor/defibrylator wyposażony w zaawansowane funkcje kliniczne, narzędzia i technologie, który powstał na bazie nowoczesnej, intuicyjnej³ platformy. To urządzenie opracowane z myślą o przyszłych rozwiązaniach, które pozwala zapewnić pacjentom, u których doszło do nagłych zdarzeń kardiologicznych opiekę na najwyższym poziomie¹.



Intuicyjna obsługa

Duży, intuicyjny ekran dotykowy³ monitora/defibrylatora LIFEPAK 35 oraz zaawansowane narzędzia wspierające podejmowanie decyzji klinicznych umożliwiają dostosowanie pracy urządzenia do indywidualnych potrzeb i ograniczyć obciążenie związane z jego obsługą³.



Zaawansowane funkcje kliniczne

Gdy liczy się każda sekunda, potrzebne są narzędzia/urządzenia, które działają równie szybko, jak Ty. Dzięki zaawansowanym funkcjom łączności, które zapewniają wgląd w dane i wskazówki, urządzenie LIFEPAK 35 to rozwiązanie, na którym możesz polegać.



LIFEPAK TOUGH

Zaprojektowana na bazie produktów przeznaczonych do ratowania życia z myślą o potrzebach współczesnego personelu medycznego wytrzymałe urządzenie LIFEPAK 35 to rozwiązanie, któremu możesz zaufać.

Wyższy poziom opieki nad pacjentem teraz i **w przyszłości**

We współpracy z naszymi klientami zaprojektowaliśmy urządzenie, które w sytuacjach zagrożenia życia daje Ci jeszcze większą kontrolę. Monitor/defibrylator LIFEPAK 35, który łączy zaawansowane technologie kliniczne i łatwość obsługi^{1,2}, to urządzenie, na którym można polegać w trudnych sytuacjach³.

Tryb SunVue™ zapewnia dobrą widoczność zawartości ekranu w różnych warunkach oświetlenia³.

Dostępne w urządzeniu narzędzia do prowadzenia dokumentacji pomagają skrócić czas potrzebny do rozpoczęcia leczenia i ograniczyć liczbę błędów w obliczeniach¹.

Technologia cprINSIGHT® pomaga poprawić skuteczność RKO w trybie AED poprzez zmniejszenie liczby przerw* podczas wykonywania uciśnień klatki piersiowej⁵.

Urządzenie umożliwia utworzenie listy zdarzeń niestandardowych zawierającej maksymalnie 40 leków i 40 różnych terapii^{2,7}.

Możliwość skonfigurowania niestandardowych przypomnień o lekach i terapiach pozwala szybko i łatwo usprawnić opiekę¹.

Umieszczone z przodu monitora/defibrylatora i ustawione pod kątem prostym gniazda do podłączenia akcesoriów do monitorowania zapewniają łatwy dostęp do tych urządzeń³.



* Przerwy przed dostarczeniem impulsu zostały zredukowane do średnio 8 sekund w porównaniu ze średnio 22 sekundami w przypadku konwencjonalnych defibrylatorów AED. Dzięki technologii cprINSIGHT frakcja uciśnień klatki piersiowej (CCF) wyniosła 86 procent w porównaniu z 80 procentami w grupie konwencjonalnych defibrylatorów AED.

LIFEPAK 35: 10,4 cala XGA, 1024 × 768, 52,9 cala²

iPad

LIFEPAK 15:

8,4 cala VGA, 640 × 480, 33,8 cala²

Duży, wytrzymały ekran dotykowy

Ekran dotykowy HD o przekątnej 10,4 umożliwia dostosowanie wyświetlanych elementów do indywidualnych potrzeb. Wytrzymałe, wzmocnione chemicznie szkło² jest przystosowane do obsługi w dwóch parach rękawic i zostało zaprojektowane tak, aby wytrzymać uderzenia i upadki². Ekran umożliwia jednocześnie przeglądanie do 12 monitorowanych parametrów, a także szeregowanie i zmianę nazw odprowadzeń³.

Opcje terapii, w tym tryb AED dla pacjentów pediatrycznych, pomagają leczyć pacjentów z zastosowaniem rosnącej energii dwufazowej w zakresie od 1 J do 360 J^{*2,6}.

Przesyłanie danych do analizy za pośrednictwem wbudowanego modułu Wi-Fi lub Bluetooth usprawnia przebieg akcji ratunkowej¹.

Jedno dotknięcie ekranu wystarczy, aby przełączyć się między czasem rzeczywistym a czasem, który upłynął podczas trwania zdarzenia¹.

Intuicyjny interfejs użytkownika jest łatwy w obsłudze i wymaga tylko minimalnego przeszkolenia^{**3}.

Funkcja STJ Insight™ zapewnia podgląd na żywo zapisu EKG z 12 lub 15 odprowadzeń, co ułatwia diagnozowanie uszkodzeń mięśnia sercowego¹.

Dwa akumulatory litowo-jonowe FLEX umożliwiają prowadzenie monitorowania aż przez dziewięć godzin⁴.

Zintegrowana podpórka pozwala uzyskać optymalną widoczność ekranu¹.




* Zakresy wieku dzieci i noworodków podano w instrukcji obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 35 nr 3350861, 2024.

**Na podstawie odpowiedzi badanych uczestników.


Zaawansowana technologia zwiększa **przejrzystość danych i pewność podejmowania decyzji**

Nasze zaawansowane narzędzia kliniczne pozwalają skupić swoją uwagę na pacjencie

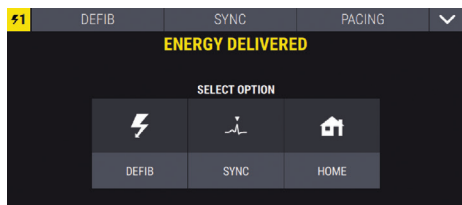


Menu decyzji po dostarczeniu wyładowania

Po każdym wyładowaniu na ekranie automatycznie wyświetlane jest menu wyboru trybu, które przypomina o konieczności sprawdzenia stanu pacjenta³.

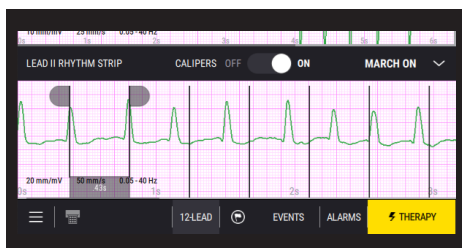

Cyfrowa suwmiarka kardiologiczna

Wyświetlają na ekranie obliczone automatycznie odstępy na zapisie EKG¹

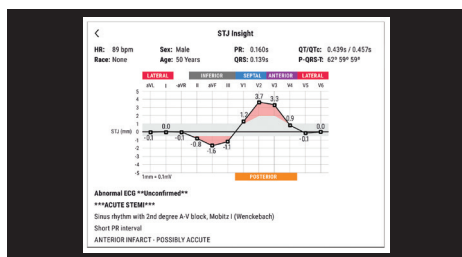

STJ Insight

Przedstawia rozszerzony widok pomiarów odcinka ST, który pomaga w ocenie lokalizacji i wielkości niedokrwienia serca. Monitorowanie trendów odcinka ST zapewnia również automatyczne wyświetlanie powiadomień o istotnych klinicznie zmianach, które pomagają diagnozować uszkodzenia mięśnia sercowego¹.

Jeszcze lepiej udzielona **pomoc**

Od ulicy po oddział ratunkowy – naszym celem jest stworzenie takiego przebiegu diagnozy i leczenia, które pozwolą zapewniać pacjentom szybką i wysokiej jakości opiekę nawet w najtrudniejszych warunkach. Urządzenie LIFEPAK 35 umożliwia dostosowanie list zdarzeń i leków^{1,7}, monitorowanie czasu RKO¹ oraz tworzenie przypomnień wyświetlanych na ekranie^{1,3}. Usprawniając procesy, umożliwiamy skupienie się na tym, co naprawdę ważne – ratowaniu życia.

Łączność dzięki cyfrowym rozwiązaniom w zakresie opieki zdrowotnej LIFEPAK⁸



Gotowość dzięki LIFEPAK Asset

Zdalne zarządzanie urządzeniami, otrzymywanie alertów o stanie urządzeń oraz wyświetlanie statycznej/dynamicznej lokalizacji urządzenia⁹.



Skuteczna pomoc dzięki LIFEPAK Care

Przesyłanie, udostępnianie i pobieranie danych pacjentów w celu usprawnienia komunikacji w zespole i koordynacji jego działań pozwalają zapewnić wyższą jakość opieki⁸.



Szybka ocena dzięki CODE-STATTM

Automatyczne pobieranie lub udostępnianie danych, ocena skuteczności i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy⁹.



LIFEPAK TOUGH™

Poddane rygorystycznym testom urządzenie LIFEPAK 35 o klasie ochrony IP55 jest gotowe do działania w każdych warunkach^{1,2}.

Zaufanie budowane przez lata

Od sześciu dekad współpracujemy z naszymi klientami w celu opracowywania rozwiązań i technologii, które pomagają ratować życie. Nasze urządzenia zostały wniesione na szczyt Mount Everest oraz znalazły się na orbicie w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Obecnie ponad pół miliona urządzeń jest używanych w wozach strażackich, ambulansach i szpitalnych wózkach resuscytacyjnych na całym świecie¹⁰. Współpraca z nami to doskonały serwis i wsparcie. Nasze bezkompromisowe podejście do jakości pozwala nam produkować urządzenia, na których można polegać w sytuacjach zagrożenia życia, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej – ratowaniu życia w lokalnej społeczności, na miejscu zdarzenia i w szpitalu.



Więcej informacji na temat monitora/defibrylatora LIFEPAK 35 można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Stryker lub na stronie internetowej stryker.com.

Materiały referencyjne:

1. Dane własne, Stryker OI 3350861. 2. Dane własne, Stryker SHVR 3338410. 3. Dane własne, Stryker HFVR 3338373. 4. Dane własne, Stryker 3352191, wersja A. 5. de Graaf, C., Beesems, S. G., Oud, S., Stickney, R. E., Piraino, D. W., Chapman, F. W., & Koster, R. W. (2021). Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. *Resuscitation*, 162, 320-328. 6. Dane własne, Stryker UND-3331509, punkt 6.5. 7. Dane własne, Instrukcja techniczna Stryker 3350864. 8. Dane własne, Stryker LCCR 3349947 i 3347969. 9. Wewnętrzne dane własne. LWSWIFU. 3327690. 10. W oparciu o wewnętrzne dane sprzedażowe.

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Podejmując decyzję o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca przeszkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu firmy Stryker personel medyczny musi zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi zawierającą pełne informacje dotyczące wskazań do stosowania, przeciwwskazań, ostrzeżeń, ostrzeżeń oraz potencjalnych zdarzeń niepożądanych. Określone produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach, ponieważ ich dostępność jest zależna od przepisów prawnych i/lub wytycznych medycznych obowiązujących na danych rynkach. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker w danej lokalizacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Firma Stryker lub jej podmioty stowarzyszone są właścicielami lub użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków handlowych bądź usługowych: CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue i Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli lub dysponentów. Brak nazwy produktu, funkcji, usługi bądź logo na tej liście nie jest równoznaczny ze zrzeczeniem się praw do znaków towarowych firmy Stryker ani innych praw własności intelektualnej dotyczących tej nazwy lub logo.

04/2025

EC-L35-BROC-1654500_REV-0_pl_pl Copyright © 2025 Stryker



Wyprodukowane przez:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 USA
Numer bezpłatny 800 442 1142
stryker.com

Dystrybucja:

Stryker European Operations Ltd.
Anngrove IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill
Co. Cork,
T45 HX08