

stryker

LIFEPAK® 35

Monitor/desfibrilhador



**Intuitivo.
Clinicamente avançado.
LIFEPAK TOUGH.**



Quando responde a emergências, precisa de um monitor/desfibrilhador que seja **cl clinicamente avançado e resistente.**^{1,2}



Baseado num legado de confiança. **Preparado para o futuro.**

Durante décadas, desenvolvemos tecnologias e dispositivos que os socorristas utilizam durante eventos críticos. A nossa merecida reputação inclui a atenção ao detalhe e um desempenho que excede o que é expectável.

O desenvolvimento de novos produtos demora algum tempo, mas os resultados valem a pena. Cada etapa do nosso processo foi inspirada pelo seu compromisso, uma vez que demos resposta às suas necessidades com o objetivo de superar as suas expectativas. Este LIFEPAK 35 pode ser diferente, tanto por dentro como por fora, mas o foco continua a ser o mesmo: **ajudar a salvar vidas.**

Apresentamos o **LIFEPAK 35**

O LIFEPAK 35 é um monitor/desfibrilhador clinicamente avançado com ferramentas e tecnologias patenteadas, baseadas numa plataforma intuitiva e moderna³ para cuidados avançados prestados aos doentes. É um dispositivo preparado para o futuro, concebido para promover cuidados cardíacos de confiança¹ e permitir a excelência clínica no contexto atual de cuidados de saúde modernos.



Intuitivo

O ecrã tátil grande e fácil de utilizar do LIFEPAK 35³ e as ferramentas avançadas de apoio à decisão clínica proporcionam uma experiência clínica personalizável que ajuda a reduzir a carga cognitiva.³



Clinicamente avançado

Quando cada segundo conta, precisa de ferramentas/dispositivos que se movam tão rapidamente como o utilizador. Com funcionalidades avançadas de ligação que fornecem informações e orientação, o LIFEPAK 35 está do seu lado de forma fiável – quando o tempo não o está.



LIFEPAK TOUGH

Construída com base num legado de produtos que salvam vidas e reinventada para o profissional de saúde moderno dos dias de hoje, a plataforma LIFEPAK 35 representa uma base de confiança e resistência que pode ajudar a melhorar os cuidados prestados aos doentes.

Melhore os cuidados prestados aos doentes agora e **no futuro**

Trabalhando em parceria com clientes como o utilizador, concebemos um dispositivo para ajudar a disponibilizar um maior controlo durante eventos críticos. O monitor/desfibrilhador LIFEPAK 35 equilibra tecnologias clínicas avançadas e facilidade de utilização^{1,2} num dispositivo em que pode confiar em situações desafiantes.³

O modo SunVue™ permite que o ecrã seja facilmente visualizado em diferentes configurações de luz.³

As ferramentas de documentação integradas podem ajudar a reduzir o período até ao tratamento e os erros de cálculo.¹

O cprINSIGHT® ajuda a melhorar o desempenho de RCP no modo DAE, reduzindo as pausas* durante as compressões torácicas.⁵

Crie uma lista de eventos personalizada com até 40 medicações e 40 tratamentos^{2,7}

Simplifique os cuidados prestados aos doentes de forma rápida e fácil através da definição de lembretes personalizados para medicações e terapias.¹

As portas de cabo em ângulo reto frontais permitem um acesso fácil aos acessórios de monitorização.³



* As pausas pré-choque foram reduzidas para uma média de 8 segundos vs. uma média de 22 segundos com o DAE convencional. A FCT com o cprINSIGHT foi de 86% vs. 80% no grupo DAE convencional.

LIFEPAK 35: XGA de 10,4", 1024 x 768, 52,9 pol.²

iPad

LIFEPAK 15:

VGA de 8,4", 640 x 480, 33,8 pol.²

Um ecrã tátil grande e resistente

O ecrã tátil de alta definição de 10,4" permite uma visualização personalizável das nossas funcionalidades. O vidro resistente e reforçado quimicamente² é fácil de utilizar com luvas e foi concebido para resistir a impactos diretos e quedas.² Pode visualizar até 12 parâmetros de monitorização ao mesmo tempo, ordenando e renomeando derivações.³

As opções de terapia, incluindo o modo DAE pediátrico, ajudam a tratar doentes com energia bifásica crescente de 1 J a 360 J.*^{2,6}

Simplifique o fluxo de trabalho, transmitindo dados para análise através de Wi-Fi ou Bluetooth integrados.¹

Um único toque no ecrã permite que um prestador de cuidados alterne entre o tempo real e o tempo decorrido durante um evento.¹

A interface de utilizador intuitiva é fácil de utilizar e requer o mínimo de formação.**³

A visualização em tempo real de 12/15 derivações com o STJ Insight™ fornece uma representação gráfica do ECG para ajudar a diagnosticar lesões do miocárdio.¹



O sistema de bateria dupla de íões de lítio FLEX permite nove horas de monitorização.⁴


O suporte de apoio integrado pode ser posicionado para uma visualização ideal.¹

* Consulte as Instruções de funcionamento do monitor/desfibrilhador LIFEPAK 35; 3350861, 2024, para obter informações sobre intervalos de idades pediátricas e neonatais.

** Com base nos participantes inquiridos.


A tecnologia avançada promove a **clareza e a confiança**

Concentre-se nos cuidados prestados aos doentes com as nossas ferramentas de terapia clinicamente avançadas

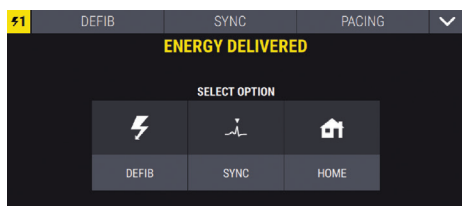


Menu de decisão pós-sincronização

Um menu de seleção de modo é apresentado automaticamente no ecrã após cada choque, indicando ao médico para ter em consideração as necessidades do doente.³

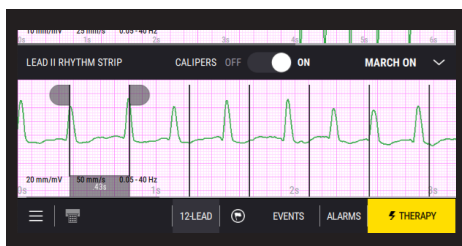

Calibradores digitais

Apresenta o cálculo automático do intervalo cardíaco no ecrã¹

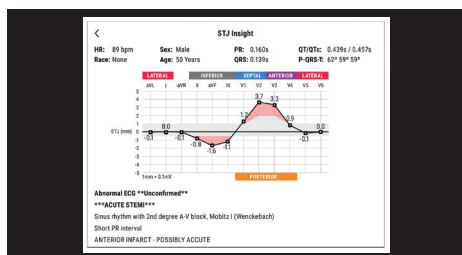

STJ Insight

Apresenta uma visualização melhorada das medições dos segmentos ST para ajudar na avaliação da localização e magnitude das alterações isquémicas dos segmentos ST. A monitorização de tendências de ST também fornece um alerta automático de alterações clinicamente significativas para ajudar os médicos a diagnosticar lesões do miocárdio.¹

Aumente **a sua capacidade de resposta**

Da rua para a sala de emergência, o nosso foco é criar fluxos de trabalho contínuos que lhe permitam fornecer cuidados rápidos e de alta qualidade sob pressão. O LIFEPAK 35 permite-lhe personalizar listas de eventos e medicações,^{1,7} monitorizar o tempo de RCP¹ e criar lembretes no ecrã.^{1,3} Ao simplificar os processos, permitimos que se concentre no que realmente importa: salvar vidas.

Mantenha-se ligado com as soluções de cuidados de saúde digitais LIFENET⁸



Mantenha-se preparado com o LIFENET Asset

Faça a gestão remota dos seus dispositivos, receba alertas de estado e visualize a localização estática/dinâmica do dispositivo.⁹



Responda de forma eficaz com o LIFENET Care

Fomente melhores cuidados, transmitindo, partilhando e recolhendo dados do doente para melhorar a comunicação e a coordenação da equipa.⁸



Analise rapidamente com o CODE-STAT™

Aceda ou partilhe dados automaticamente, analise o desempenho e identifique oportunidades de melhoria.⁹



LIFEPAK TOUGH™

Rigorosamente testado e com uma classificação IP55, o LIFEPAK 35 está pronto para onde quer que a sua próxima chamada o leve.^{1,2}

Um legado de **confiança**

Durante seis décadas, colaborámos com os nossos clientes para conceber soluções e desenvolver tecnologia que ajude a salvar vidas. Os nossos dispositivos foram transportados até ao topo do Monte Everest e colocados em órbita na Estação Espacial Internacional. Encontrará mais de meio milhão de unidades em utilização hoje em dia em camiões de bombeiros, ambulâncias e carros de emergências hospitalares em todo o mundo.¹⁰ Quando colaborar connosco, obterá também um excelente serviço e suporte. O nosso compromisso intransigente para com a qualidade produz dispositivos nos quais pode contar em situações críticas – para que se possa concentrar naquilo que faz melhor: salvar vidas na comunidade, no terreno e no hospital.



Para obter mais informações sobre o monitor/desfibrilhador LIFEPAK 35, contacte o representante de vendas local da Stryker ou visite [stryker.com](https://www.stryker.com).

Referências:

1. Dados em arquivo, Stryker OI 3350861. 2. Dados em arquivo, Stryker SHVR 3338410. 3. Dados em arquivo, Stryker HFVR 3338373. 4. Dados em arquivo, Stryker 3352191 Rev A. 5. de Graaf, C., Beesems, S. G., Oud, S., Stickney, R. E., Piraino, D. W., Chapman, F. W., e Koster, R. W. (2021). Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. *Resuscitation*, 162, 320-328 6. Dados em arquivo, Stryker UND-3331509, secção 6.5. 7. Dados em arquivo, Stryker manual técnico 3350864. 8. Dados em arquivo, Stryker LCCR 3349947 e 3347969. 9. Dados internos no ficheiro. LWSWIFU. 3327690. 10. Com base em dados de vendas internos

Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde. Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre as instruções de utilização para obter orientações completas em termos de indicações, contraindicações, advertências, precauções e potenciais acontecimentos adversos antes de utilizar qualquer produto da Stryker. Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Stryker ou as entidades afiliadas possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue e Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou detentores. A ausência do nome de um produto, funcionalidade ou serviço ou de um logótipo nesta lista não constitui uma renúncia da Stryker sobre os direitos de propriedade da marca comercial ou de outros direitos de propriedade intelectual relacionados com esse nome ou logótipo.



Fabricado por:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 EUA
N.º de tel. gratuito: 800 442 1142
[stryker.com](https://www.stryker.com)

Distribuído por:

Stryker European Operations Ltd.
Anngrove IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill
Co. Cork,
T45 HX08