

stryker

LIFEPAK® 35

monitor/defibrillator



**Intuitiv.
Avansat clinic.
LIFEPAK TOUGH.**



Atunci când răspundeți la situații de urgență,
aveți nevoie de un monitor/defibrilator care
este **avansat clinic și durabil.**^{1,2}



Consolidat pe încredere. **Pregătit pentru viitor.**

De zeci de ani, am dezvoltat tehnologii și dispozitive la care au ajuns primii respondenți ca dumneavoastră în timpul evenimentelor critice. Reputația noastră câștigată cu greu este bazată pe atenția la detalii și performanță care depășește limitele.

Dezvoltarea de noi produse necesită timp – dar rezultatele merită. Fiecare etapă a procesului nostru a fost inspirată de dedicarea dumneavoastră, iar noi ne-am concentrat pe nevoile dumneavoastră cu scopul de a vă depăși așteptările. Acest dispozitiv LIFEPAK 35 poate fi diferit, atât în interior, cât și în exterior, însă obiectivul rămâne același: **să ajute la salvarea de vieți.**

Vă prezentăm **LIFEPAK 35**

LIFEPAK 35 este un monitor/defibrilator avansat din punct de vedere clinic, cu instrumente și tehnologie patentate, construite pe o platformă intuitivă³ și modernă pentru îngrijirea avansată a pacienților. Este un dispozitiv pregătit pentru viitor, conceput pentru a susține îngrijirea cardiacă¹ cu încredere și pentru a facilita excelența clinică în mediul modern al asistenței medicale de astăzi.



Intuitiv

Ecranul tactil mare și ușor de utilizat³ al LIFEPAK 35, împreună cu instrumentele avansate de suport decizional clinic, oferă o experiență clinică personalizabilă care contribuie la reducerea încărcăturii cognitive.³



Avansat clinic

Când fiecare secundă contează, aveți nevoie instrumente/dispozitive care să țină pasul cu dumneavoastră. Cu capacități avansate de conectivitate ce oferă informații și ghidare, LIFEPAK 35 este mereu alături de dumneavoastră, chiar și în momente critice.



LIFEPAK Tough

Dezvoltat pe baza unei tradiții de produse salvatoare de vieți și reinventat pentru profesionistul din domeniul sănătății de astăzi, platforma LIFEPAK 35 se sprijină pe o fundație de încredere și rezistență, care contribuie la avansarea îngrijirii pacientului.

Promovarea îngrijirii pacienților în prezent și în viitor

Lucrând în parteneriat cu clienți ca dumneavoastră, am proiectat un dispozitiv care să vă ofere mai mult control în timpul situațiilor critice. Monitorul/defibrilatorul LIEPAK 35 îmbină tehnologiile clinice avansate și ușurința de utilizare^{1,2} într-un dispozitiv pe care vă puteți baza în situații dificile.³

Modul SunVue™ permite vizualizarea ușoară a ecranului în diferite condiții de luminozitate

Instrumentele de documentare integrate pot ajuta la reducerea timpului până la tratament și a erorilor de calcul.¹

cprINSIGHT® ajută la îmbunătățirea performanței resuscitării cardiopulmonare (RCP) în modul DEA prin reducerea pauzelor* în timpul compresiunilor toracice.⁵

Creați o listă de evenimente personalizate cu până la 40 de medicamente și 40 de tratamente^{2,7}

Optimizați rapid și ușor îngrijirea pacientului setând mementouri personalizate pentru medicamente și terapii.¹

Porturile de cablu orientate frontal, în unghi drept permit accesul ușor la accesoriile de monitorizare.³



* Pauzele înainte de șoc au fost reduse la o medie de 8 secunde, comparativ cu o medie de 22 de secunde la DEA-ul convențional.
Raportul de compresie toracică (CCF) cu cprINSIGHT a fost de 86%, comparativ cu 80% în grupul cu DEA convențional.

LIFEPAK 35: 10,4" XGA, 1024x768, 52,9 in²

iPad

LIFEPAK 15:

8,4" VGA, 640x480, 33,8 in²

Un ecran tactil mare și rezistent

Ecranul tactil de înaltă definiție, de 10,4", permite afișarea personalizabilă a funcțiilor noastre. Sticla durabilă, ranforsată chimic², este compatibilă cu două straturi de mănuși și este proiectată să reziste atât la impacturi directe, cât și la căzături.² Puteți vizualiza până la 12 parametri de monitorizare simultan, având totodată posibilitatea de a sorta și redenumi electrozii.³

Opțiunile terapeutice, inclusiv modul DEA pentru copii, ajută la tratarea pacienților cu energie bifazică ajustabilă de la 1 J la 360 J.*^{2,6}

Optimizați fluxul de lucru transmițând date pentru analiză prin Wi-Fi sau Bluetooth încorporat.¹

O singură atingere a ecranului permite utilizatorului să comute între timpul real și cel scurs în timpul unui eveniment.¹

Interfața intuitivă cu utilizatorul este ușor de utilizat și necesită instruire minimă.**³

Vizualizarea în timp real cu 12/15 derivații cu STJ Insight™ oferă o reprezentare grafică a ECG-ului pentru a ajuta la diagnosticarea leziunii miocardice.¹

Sistemul de baterii duble FLEX litiu-ion permite monitorizarea timp de nouă ore.⁴

Suportul integrat poate fi poziționat pentru vizualizare optimă.¹




*Consultați Instrucțiunile de utilizare ale monitorului/defibrilatorului LIFEPAK 35; 3350861, 2024 pentru intervalele de vârstă pediatrică și neonatale.

**Pe baza participanților chestionați.


Tehnologia avansată promovează **claritatea și încrederea**

Concentrați-vă pe îngrijirea pacientului cu instrumentele noastre de terapie avansate clinic

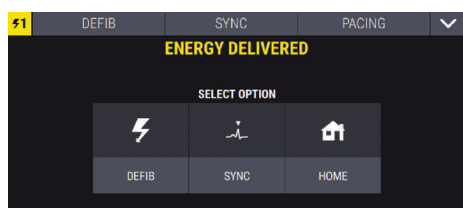


Meniu de decizie post-sincronizare

Un meniu de selecție a modului este afișat automat pe ecran după fiecare șoc, invitând medicul să reevalueze nevoile pacientului.³

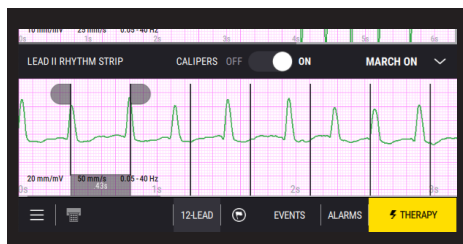

Șubler digital

Afișează calculul automat al intervalului cardiac pe ecran¹

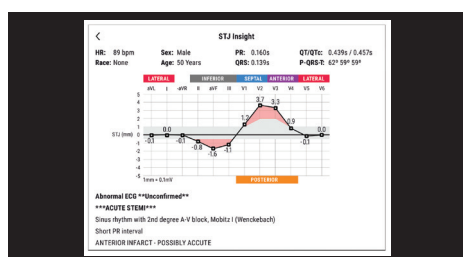

STJ Insight

Prezintă o vizualizare îmbunătățită a măsurătorilor segmentului ST pentru a ajuta la evaluarea locației și magnitudinii modificărilor segmentului ST ischemic. Monitorizarea trendului ST asigură, de asemenea, o alertă automată a modificărilor semnificative din punct de vedere clinic pentru a ajuta medicii să diagnosticheze leziunile miocardice.¹

Îmbunătățiți-vă **reacțiile**

De pe stradă până în camera de urgență, ne concentrăm pe crearea unor fluxuri de lucru fluide care să vă ofere puterea de a oferi îngrijire rapidă și de înaltă calitate, chiar și sub presiune. LIFEPAK 35 vă permite să personalizați evenimentele și listele de medicamente,^{1,7} să urmăriți timpul de resuscitare cardiopulmonară (RCP)¹ și să creați mementouri pe ecran^{1,3}. Prin eficientizarea proceselor, vă oferim posibilitatea să vă concentrați pe ceea ce contează cu adevărat — salvarea de vieți.

Rămâneți conectat cu soluțiile digitale LIFEENET pentru asistență medicală⁸



Fiți pregătit cu LIFEENET Asset

Gestionați-vă de la distanță dispozitivele, primiți alerte de stare și vizualizați locația statică/dinamică a dispozitivului.⁹



Răspundeți eficient cu LIFEENET Care

Realizați o mai bună îngrijire prin transmiterea, partajarea și capturarea datelor pacienților pentru a îmbunătăți comunicarea și coordonarea echipei.⁸



Revizuiți rapid cu CODE-STAT™

Accesați sau partajați automat date, revizuiți performanța și identificați oportunitățile de îmbunătățire.⁹



LIFEPAK TOUGH™

Testat riguros și având clasificarea IP55, LIFEPAK 35 este pregătit să vă însoțească oriunde vă va duce următorul apel.^{1,2}

Soluții de **încredere**

Timp de șase decenii, am realizat un parteneriat cu clienții noștri pentru a proiecta soluții și pentru a dezvolta tehnologii care ajută la salvarea vieților. Dispozitivele noastre au fost transportate până pe vârful Muntelui Everest și pe orbită, în Stația Spațială Internațională. Sunt peste jumătate de milion de aparate în uz astăzi pe autospecialele de pompieri, ambulanțe și trolerele de resuscitare din spitale din întreaga lume.¹⁰ Parteneriatul cu noi vă oferă, de asemenea, mentenanță și suport excelente. Angajamentul nostru ferm pentru calitate dă naștere la dispozitive pe care vă puteți baza în situații critice – pentru ca dumneavoastră să vă puteți concentra pe ceea ce faceți cel mai bine: salvarea de vieți în comunitate, pe teren și în spital.



Pentru mai multe informații despre monitorul/defibrilatorul LIFEPAK 35, contactați reprezentantul local de vânzări Stryker sau vizitați stryker.com.

Referințe:

1. Date la dosar, Stryker OI 3350861. 2. Date la dosar, Stryker SHVR 3338410. 3. Date la dosar, Stryker HFVR 3338373. 4. Date la dosar, Stryker 3352191 Rev A. 5. de Graaf, C., Beesems, S. G., Oud, S., Stickney, R. E., Piraino, D. W., Chapman, F. W., & Koster, R. W. (2021). Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. Resuscitation, 162, 320-328. 6. Date la dosar, Stryker UND-3331509 secțiunea 6.5. 7. Date la dosar, Manualul tehnic Stryker 3350864. 8. Date la dosar, Stryker LCCR 3349947 și 3347969. 9. Date interne la dosar: LSWSIFU. 3327690. 10. Pe baza datelor interne de vânzări

Acest document este destinat exclusiv utilizării de către personalul medical. Personalul medical trebuie să se bazeze întotdeauna pe propriile cunoștințe clinice specializate când decide să utilizeze un anumit produs în tratarea unui anumit pacient. Stryker nu oferă consultanță medicală și recomandă ca personalul medical să fie instruit cu privire la utilizarea oricărui produs înainte de a îl utiliza.

Informațiile oferite au scopul de a prezenta oferta de produse Stryker. Înainte de a utiliza orice produs Stryker, personalul medical trebuie să consulte întotdeauna instrucțiunile de funcționare pentru instrucțiuni de utilizare complete, indicații, contraindicații, avertismente, atenționări și posibilele evenimente adverse. Este posibil ca unele produse să nu fie disponibile pe toate piețele, deoarece disponibilitatea produselor depinde de reglementările și/sau practicile medicale de pe fiecare piață. Dacă aveți întrebări despre disponibilitatea produselor Stryker în zona dvs., adresați-vă reprezentantului companiei. Specificațiile se pot modifica fără înștiințare prealabilă.

Stryker sau entitățile afiliate acestuia dețin, utilizează sau au depus cereri de înregistrare pentru următoarele mărci comerciale sau mărci de servicii: CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue și Stryker. Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale proprietarilor sau deținătorilor respectivi ai acestora. Absența numelui unui produs, al unei caracteristici sau al unui serviciu sau absența vreunei sigle din această listă nu constituie o renunțare la marca respectivă comercială Stryker sau la drepturile de proprietate intelectuală asupra numelui sau siglei respective.

04/2025

EC-L35-BROC-1654500_REV-0_ro_ro Copyright © 2025 Stryker



Fabricat de:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 SUA
Număr de telefon gratuit 800 442 1142
stryker.com

Distribuit de:

Stryker European Operations Ltd.
Anngrove IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill
Co. Cork,
T45 HX08