

stryker

LIFEPAK® 35

monitor/defibrillator



**Intuïtief.
Klinisch geavanceerd.
LIFEPAK TOUGH.**



Wanneer elke seconde telt, heeft u een gebruiksvriendelijke monitor/defibrillator¹ nodig die is ontworpen voor de hedendaagse zorgverlener.



Gebaseerd op een geschiedenis van vertrouwen.

Klaar voor de toekomst.

Al tientallen jaren hebben we technologie en apparaten ontwikkeld die zorgverleners zoals u nodig hebben. We staan goed bekend om ons oog voor details en prestaties die grenzen verleggen.

Het ontwikkelen van baanbrekende producten kost tijd, maar de resultaten zijn het waard. Elke stap van ons proces is geïnspireerd door uw betrokkenheid, omdat we hebben ingespeeld op uw behoeften met als doel uw verwachtingen te overtreffen. Dit nieuwste apparaat is een beetje anders, zowel van binnen als van buiten, maar de focus blijft hetzelfde: levens redden.

Maak kennis met de **LIFEPAK 35**

De LIFEPAK 35 is een klinisch geavanceerde monitor/defibrillator met bedrijfseigen hulpmiddelen en technologie die zijn gebaseerd op een intuïtief¹, modern platform voor geavanceerde patiëntenzorg. Het is een toekomstbestendig apparaat dat is ontworpen om betrouwbare cardiale zorg te bevorderen² en klinische uitmuntendheid mogelijk te maken in de hedendaagse moderne zorgomgeving.



Intuïtief

Met het slanke, lichtgewicht en ergonomisch ontwerp bieden het grote, gebruiksvriendelijke touchscreen¹ en de geavanceerde hulpmiddelen voor klinische besluitvorming van de LIFEPAK 35 een aanpasbare klinische ervaring die de cognitieve belasting helpt te verminderen.¹



Klinisch geavanceerd

Wanneer elke seconde telt, heeft u patiëntenzorg nodig die net zo snel reageert als u. Dankzij geavanceerde verbonden mogelijkheden die inzicht en begeleiding bieden, is LIFEPAK 35 een betrouwbare metgezel als de tijd dringt.



LIFEPAK TOUGH

Het LIFEPAK 35-platform is gebaseerd op een nalatenschap van levensreddende producten en is vernieuwd voor de hedendaagse zorgprofessional. Het platform is gebaseerd op vertrouwen en robuustheid waar u op kunt vertrouwen.

Betere patiëntenzorg nu en **in de toekomst**

In samenwerking met klanten zoals u hebben we een apparaat ontworpen dat u meer controle geeft tijdens kritieke gebeurtenissen. De LIFEPAK 35-monitor/defibrillator biedt een ideale balans tussen geavanceerde klinische technologie en gebruiksgemak^{1,2}. Dit betrouwbare apparaat is speciaal ontworpen voor noodsituaties en ondersteunt hulpverleners effectief, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden.³

Ingebouwde documentatiehulpmiddelen helpen de tijd tot behandeling te verkorten en verkleinen de kans op berekeningsfouten.²

cprINSIGHT® verbetert de reanimatieprestaties in de AED-modus door pauzes tijdens borstcompressies te verminderen*.⁵

Lijsten met medicatie en behandelingsgebeurtenissen kunnen via de instellingsopties worden aangepast, met ruimte voor maximaal 40 afzonderlijke items.^{2,7}

De LIFEPAK 35 draagt bij aan gestroomlijnde patiëntenzorg en helpt de cognitieve belasting van het zorgteam te verminderen.¹

Naar voren gerichte kabelpoorten met een rechte hoek maken eenvoudige toegang tot bewakingsaccessoires mogelijk.²



* Pauzes vóór de schok werden verkort tot gemiddeld 8 seconden ten opzichte van gemiddeld 22 seconden met de conventionele AED. Borstcompressiefractie (CCF) met cprINSIGHT was 86% ten opzichte van 80% in de conventionele AED-groep.

** Gebaseerd op de ondervraagde deelnemers.

LIFEPAK 35: 10,4 inch XGA, 1024 x 768, 52,9 inch²

iPad

LIFEPAK 15:

8,4 inch VGA, 640 x 480, 33,8 inch²

Een groot, stevig touchscreen

Met het HD-touchscreen van 26,4 centimeter kunnen onze vooruitstrevende functies naar wens worden weergegeven. Het duurzame, chemisch versterkte glas³ werkt ook bij dubbele handschoenen en is ontworpen om bestand te zijn tegen stoten en vallen.² U kunt tot wel 12 bewakingsparameters tegelijk bekijken en ook afleidingen sorteren en de namen ervan wijzigen.³

Helpt patiënten van alle leeftijden te behandelen met trapsgewijs bifasische energie van 1-360 J en de AED-modus is geschikt voor volwassenen en kinderen^{1,6}

Stroomlijn de workflow door gegevens te verzenden voor analyse via ingebouwde wifi of Bluetooth.²

Met de Code/Real-time klok kan een zorgverlener schakelen tussen de werkelijke en verstreken tijd tijdens een gebeurtenis.²

De intuïtieve gebruikersinterface is gebruiksvriendelijk en vereist minimale training.^{1,**}

Liveweergave van 12/15-afleidingen met STJ Insight™ biedt een grafische weergave van het ECG om te helpen bij het diagnosticeren van myocardiale schade.²


Het FLEX lithium-ionsysteem met dubbele accu biedt negen uur bewaking.⁴

De geïntegreerde standaard biedt extra stabiliteit en zorgt voor een optimaal zicht op de crash cart.¹




Geavanceerde technologie bevordert **duidelijkheid en vertrouwen**

Focus op patiëntenzorg met onze klinisch geavanceerde behandelingshulpmiddelen

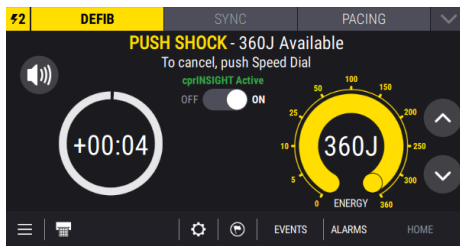


cprINSIGHT³

De LIFEPAK 35 is de enige professionele monitor/defibrillator met een algoritme dat een schokbaar ritme identificeert zonder de reanimatie te pauzeren.^{5*}

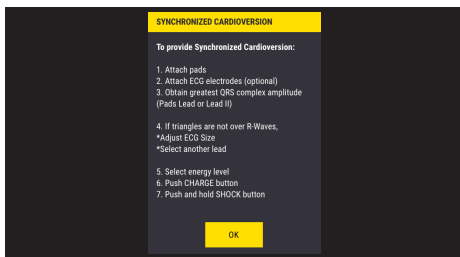

Verkorte instructies op het scherm

Biedt richtlijnen voor niet-invasieve pacing en gesynchroniseerde cardioversie.²

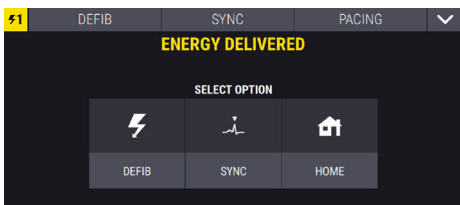

Keuzemenu na synchronisatie

De LIFEPAK 35 is ontworpen met het oog op de veiligheid van de patiënt. Tijdens het uitvoeren van gesynchroniseerde cardioversie wordt na elke schok automatisch een menu voor modusselectie op het scherm weergegeven, dat de hulpverlener aanzet tot nadenken over de behoeften van de patiënt.²

*Vanaf oktober 2024.

Stroomlijn uw **workflow**

Door ons te richten op uw behoeften binnen de ziekenhuisprotocollen en communicatiekanalen, stellen we u in staat om uit te blinken in een omgeving waar veel op het spel staat. De LIFEPAK 35 stroomlijnt het zorgproces door belangrijke klinische gegevens en gebeurtenissen in het patiëntendossier vast te leggen en biedt op maat gemaakte herinneringen voor medicatie en behandelingen om de patiëntzorg te ondersteunen.^{1,2}

Blijf verbonden dankzij de digitale gezondheidszorgoplossingen⁸ van LIFENET³



Altijd gereed met LIFENET Asset

Beheer uw apparaten op afstand, ontvang statusmeldingen en bekijk de locatie van statische/dynamische apparaten.⁹



Reageer effectief met LIFENET Care

Stimuleer betere zorg door patiëntgegevens te verzenden, te delen en vast te leggen om de teamcommunicatie en -coördinatie te verbeteren.⁸



Snel bekijken met CODE-STATTM

Open of deel automatisch gegevens, beoordeel prestaties en identificeer verbeteringsmogelijkheden.⁹



De **LIFEPAK 35** combineert een ergonomisch ontwerp met de robuustheid van **LIFEPAK TOUGH™**-constructie, zodat hij bestand is tegen vallen en perfect inzetbaar is in intensieve zorgomgevingen.



Een geschiedenis van vertrouwen

Al meer dan zestig jaar werken we nauw samen met onze klanten om oplossingen te ontwerpen en technologie te ontwikkelen die levens redden. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan een half miljoen van onze apparaten in gebruik in ambulances en crashkarren in ziekenhuizen.¹⁰ Onze onwrikbare toewijding aan kwaliteit zorgt voor betrouwbare apparatuur waarop u kunt vertrouwen in kritieke situaties — zodat u zich kunt richten op waar u het beste in bent: levens redden, in de gemeenschap, op locatie en binnen het ziekenhuis.



Neem voor meer informatie over de LIFEPAK 35-monitor/defibrillator contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger van Stryker of ga naar stryker.com.

Referenties:

1. Gegevens beschikbaar, Stryker HFVR 3338373. 2. Gegevens beschikbaar, Stryker OI 3350861. 3. Gegevens beschikbaar, Stryker SHVR 3338410. 4. Gegevens beschikbaar, Stryker 3352191 Rev A. 5. de Graaf C, Beesems SG, Oud S, et al., Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. Resuscitation. Mei 2021;162:320-28. 6. Gegevens beschikbaar, Stryker UND-3331509 sectie 6.5. 7. Gegevens beschikbaar, technische handleiding Stryker 3350864. 8. Gegevens beschikbaar, Stryker LCCR 3349947 en 3347969. 9. Interne gegevens beschikbaar. LWSIFU. 3327690. 10. Gebaseerd op interne verkoopgegevens

Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door zorgprofessionals. Een medewerker in de gezondheidszorg moet altijd vertrouwen op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel bij de beslissing om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker verstrekt geen medisch advies en raadt zorgprofessionals aan om voorafgaand aan het gebruik van een specifiek product te worden getraind in het gebruik ervan.

De gepresenteerde informatie is bedoeld om het productaanbod van Stryker te demonstreren. Voorafgaand aan het gebruik van Stryker-producten moet een zorgprofessional altijd de bedieningsinstructies raadplegen voor volledige gebruiksinstructies, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Producten zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar, omdat de beschikbaarheid van producten onderhevig is aan de regelgevings- en/of medische praktijken in de afzonderlijke markten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger als u vragen heeft over de beschikbaarheid van Stryker-producten in uw regio. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Stryker of zijn gelieerde entiteiten bezitten, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handelsmerken of dienstmerken: CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue en Stryker. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars of houders. Het ontbreken van een product-, functie- of servicenaam of -logo in deze lijst betekent niet dat Stryker afstand doet van handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die naam of dat logo.

04/2025

EC-L35-BROC-1748118_REV-0_nl_be © 2025 Stryker



Geproduceerd door:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 VS
Gratis telefoonnummer:
800 442 1142
stryker.com/emergencycare

Gedistribueerd door:

Stryker Europa
Operations Ltd. Anngrove
IDA Business & Technology
Park
Carrigtwohill
Co. Cork,
T45 HX08