

stryker

LIFEPAK® 35

monitor/defibrillator



**Intuitiv.
Avansat clinic.
LIFEPAK TOUGH.**

Când fiecare secundă contează, aveți nevoie de un monitor/defibrilator ușor de utilizat¹ conceput pentru profesioniștii din domeniul sănătății de astăzi.



Conceput pe încredere. **Pregătit pentru viitor.**

De zeci de ani, dezvoltăm tehnologii și dispozitive pe care profesioniștii din domeniul sănătății, ca dumneavoastră, le aleg și le utilizează. Reputația noastră câștigată cu greu include atenția la detalii și performanță, care depășește limitele.

Dezvoltarea de produse inovatoare necesită timp – dar rezultatele merită. Fiecare etapă a procesului nostru a fost inspirată de dedicarea dumneavoastră, iar noi ne-am concentrat pe nevoile dumneavoastră cu scopul de a vă depăși așteptările. Acest dispozitiv nou poate fi diferit, atât în interior, cât și în exterior, însă obiectivul rămâne același: să ajute la salvarea de vieți.

Vă prezentăm **LIFEPAK 35**

LIFEPAK 35 este un monitor/defibrilator avansat din punct de vedere clinic, cu instrumente și tehnologie patentate, construite pe o platformă intuitivă¹ și modernă pentru îngrijirea avansată a pacienților. Este un dispozitiv pregătit pentru viitor, conceput pentru a susține îngrijirea cardiacă² cu încredere și pentru a facilita excelența clinică în mediul modern al asistenței medicale de astăzi.



Intuitiv

Subțire, ușor și proiectat ergonomic, LIFEPAK 35 dispune de un ecran tactil mare și ușor de utilizat¹, precum și de instrumente avansate de suport decizional clinic care oferă o experiență clinică personalizabilă, contribuind la reducerea încărcăturii cognitive¹.



Avansat clinic

Când fiecare secundă contează, aveți nevoie de îngrijire a pacientului care să țină pasul cu dumneavoastră. Cu capacități avansate de conectivitate ce oferă informații și ghidare, LIFEPAK 35 este mereu alături de dumneavoastră, chiar și în momente critice.



LIFEPAK TOUGH

Bazat pe o tradiție de produse salvatoare de vieți și reinventat pentru profesionistul din domeniul sănătății de astăzi, platforma LIFEPAK 35 se sprijină pe o fundație de încredere și rezistență pe care vă puteți baza.

Promovarea îngrijirii pacienților în prezent și în viitor

Lucrând în parteneriat cu clienți ca dumneavoastră, am proiectat un dispozitiv care să vă ofere mai mult control în timpul situațiilor critice. Monitorul/defibrilatorul pentru intervenții de urgență LIFEPAK 35 îmbină tehnologii clinice avansate și ușurința în utilizare^{1,2} într-un dispozitiv pe care vă puteți baza în situații dificile.³

Instrumentele de documentare integrate pot ajuta la reducerea timpului până la tratament și a erorilor de calcul.²

cprINSIGHT® ajută la îmbunătățirea performanței resuscitării cardiopulmonare (RCP) în modul DEA prin reducerea pauzelor* în timpul compresionilor toracice.⁵

Listele de medicamente și evenimente de tratament pot fi personalizate în opțiunile de configurare pentru a include până la 40 evenimente fiecare.^{2,7}

LIFEPAK 35 ajută la eficientizarea îngrijirii pacienților și la reducerea sarcinii cognitive a echipei de îngrijire.¹

Porturile de cablu orientate frontal, în unghi drept permit accesul ușor la accesoriile de monitorizare.²



* Pauzele înainte de șoc au fost reduse la o medie de 8 secunde, comparativ cu o medie de 22 de secunde la DEA-ul convențional.
Raportul de compresie toracică (CCF) cu cprINSIGHT a fost de 86%, comparativ cu 80% în grupul cu DEA convențional.

** Pe baza participanților chestionați.

LIFEPAK 35: 10,4" XGA, 1024x768, 52,9 in²

iPad

LIFEPAK 15:

8,4" VGA, 640x480, 33,8 in²

Un ecran tactil mare și rezistent

Ecranul tactil de înaltă definiție, de 10,4", permite afișarea personalizabilă a funcțiilor noastre de generație următoare. Sticla durabilă, ranforsată chimic³, este compatibilă cu două straturi de mănuși și este proiectată să reziste atât la impacturi directe, cât și la căzături.² Puteți vizualiza până la 12 parametri de monitorizare simultan, având totodată posibilitatea de a sorta și redenumi electrozii.³

Ajută la tratarea pacienților de toate vârstele, cu energie bifazică ajustabilă de la 1 J la 360 J, precum și cu modurile DEA pentru adulți și pediatrie^{1,6}

Optimizați fluxul de lucru transmițând date pentru analiză prin Wi-Fi sau Bluetooth încorporat.²

Funcția Cod/Ceas în timp real permite personalului medical să comute între timpul real și timpul scurs în timpul unui eveniment.²

Interfața intuitivă este ușor de utilizat și necesită o instruire minimă.^{1**}

Vizualizarea în timp real cu 12/15 derivații cu STJ Insight™ oferă o reprezentare grafică a ECG-ului pentru a ajuta la diagnosticarea leziunii miocardice.²


Sistemul de baterii duble FLEX litiu-ion permite monitorizarea timp de nouă ore.⁴

Stativul integrat oferă stabilitate suplimentară și permite vizualizarea optimă pe trolerul de resuscitare.¹




Tehnologia avansată promovează **claritatea și încrederea**

Concentrați-vă pe îngrijirea pacientului cu instrumentele noastre de terapie avansate clinic

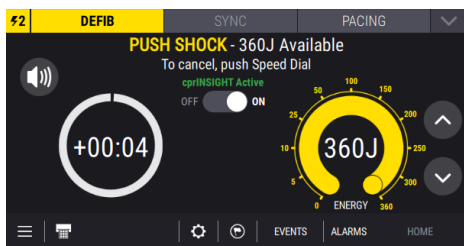


cprINSIGHT³

LIFEPAK 35 este singurul monitor/defibrilator profesional cu un algoritm care identifică un ritm ce necesită șoc fără a întrerupe manevrele de resuscitare (RCP).^{5*}

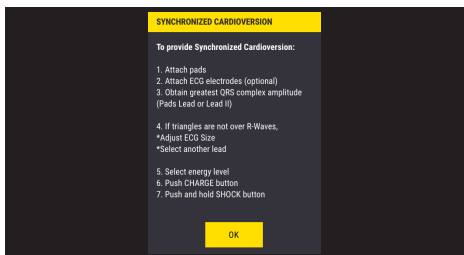

Instrucțiuni prescurtate pe ecran

Oferă ghidaj pentru stimularea cardiacă neinvazivă și cardioversia sincronizată.²

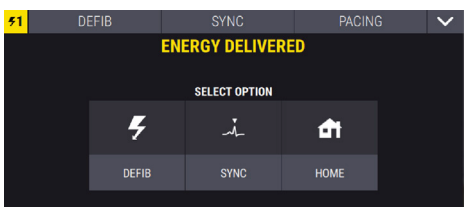

Meniu de decizie post-sincronizare

LIFEPAK 35 este conceput ținând cont de siguranța pacienților. Atunci când se efectuează cardioversia sincronizată, un meniu de selecție a modului este afișat automat pe ecran după fiecare șoc, invitând medicul să reevalueze nevoile pacientului.²

*Din octombrie 2024.

Eficientizați-vă **fluxul de lucru**

Concentrându-ne pe nevoile dumneavoastră în cadrul protocoalelor spitalului și al canalelor de comunicare, vă oferim posibilitatea de a excela în situații cu mize importante. LIFEPAK 35 eficientizează procesul de îngrijire prin captarea datelor și evenimentelor clinice importante în fișa pacientului și oferă mementouri personalizate pentru administrarea medicamentelor și terapiilor, ceea ce poate sprijini îngrijirea pacientului.^{1,2}

Rămâneți conectat cu soluțiile digitale LIFEENET³ pentru asistență medicală⁸



Fiți pregătit cu LIFEENET Asset

Gestionați-vă de la distanță dispozitivele, primiți alerte de stare și vizualizați locația statică/dinamică a dispozitivului.⁹



Răspundeți eficient cu LIFEENET Care

Realizați o mai bună îngrijire prin transmiterea, partajarea și capturarea datelor pacienților pentru a îmbunătăți comunicarea și coordonarea echipei.⁸



Revizuiți rapid cu CODE-STAT™

Accesați sau partajați automat date, revizuiți performanța și identificați oportunitățile de îmbunătățire.⁹



LIFEPAK 35 este proiectat ergonomic pentru portabilitate și robust prin **LIFEPAK TOUGH™** pentru a rezista la căderi în mediul spitalicesc solicitant.³



Soluții de încredere

Timpe de șase decenii, ne-am asociat cu clienții noștri pentru a proiecta soluții și pentru a dezvolta tehnologii care ajută la salvarea vieților. Veți găsi peste jumătate de milion de unități în uz astăzi în ambulanțe și pe trolerele de resuscitare din spitale din întreaga lume.¹⁰ Angajamentul nostru ferm față de calitate produce dispozitive pe care vă puteți baza în situații critice – pentru ca dumneavoastră să vă puteți concentra pe ceea ce faceți cel mai bine: salvarea de vieți în comunitate, pe teren și în spital.



Pentru mai multe informații despre monitorul/defibrilatorul LIFEPAK 35, contactați reprezentantul local de vânzări Stryker sau vizitați stryker.com.

Referințe:

1. Date la dosar, Stryker HFVR 3338373. 2. Date la dosar, Stryker OI 3350861. 3. Date la dosar, Stryker SHVR 3338410. 4. Date la dosar, Stryker 3352191 Rev A. 5. de Graaf C, Beesems SG, Oud S, et al., Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. Resuscitation. May 2021;162:320-28. 6. Date la dosar, Stryker UND-3331509 secțiunea 6.5. 7. Date la dosar, Manualul tehnic Stryker 3350864. 8. Date la dosar, Stryker LCCR 3349947 și 3347969. 9. Date interne la dosar. LSWSIFU. 3327690. 10. Pe baza datelor interne de vânzări.

Acest document este destinat exclusiv utilizării de către personalul medical. Personalul medical trebuie să se bazeze întotdeauna pe propriile cunoștințe clinice specializate când decide să utilizeze un anumit produs în tratarea unui anumit pacient. Stryker nu oferă consultanță medicală și recomandă ca personalul medical să fie instruit cu privire la utilizarea oricărui produs înainte de a îl utiliza.

Informațiile oferite au scopul de a prezenta oferta de produse Stryker. Înainte de a utiliza orice produs Stryker, personalul medical trebuie să consulte întotdeauna instrucțiunile de funcționare pentru instrucțiuni de utilizare complete, indicații, contraindicații, avertismente, atenționări și posibilele evenimente adverse. Este posibil ca unele produse să nu fie disponibile pe toate piețele, deoarece disponibilitatea produselor depinde de reglementările și/sau practicile medicale de pe fiecare piață. Dacă aveți întrebări despre disponibilitatea produselor Stryker în zona dvs., adresați-vă reprezentantului companiei. Specificațiile se pot modifica fără înștiințare prealabilă.

Stryker sau entitățile afiliate acesteia dețin, utilizează sau au depus cereri de înregistrare pentru următoarele mărci comerciale sau mărci de servicii: CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue și Stryker. Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale proprietarilor sau deținătorilor respectivi ai acestora. Absența numelui unui produs, al unei caracteristici sau al unui serviciu sau absența vreunei sigle din această listă nu constituie o renunțare la marca respectivă comercială Stryker sau la drepturile de proprietate intelectuală asupra numelui sau siglei respective.

04/2025

EC-L35-BROC-1748118_REV-0_ro_ro © 2025 Stryker



Fabricat de:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 SUA
Număr de telefon gratuit 800
442 1142
stryker.com

Distribuit de:

Stryker European
Operations Ltd. Anngrove
IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill
Co. Cork,
T45 HX08