

stryker

LIFEPAK® 35

Moniteur/défibrillateur



**Intuitif.
Avancé sur le plan clinique.
LIFEPAK TOUGH.**



Lorsque chaque seconde compte,
vous avez besoin d'un moniteur/
défibrillateur¹ facile à utiliser, conçu pour les
professionnels de la santé d'aujourd'hui.



S'appuie sur un héritage de confiance.

Prêt à affronter l'avenir.

Depuis des décennies, nous développons des technologies et des dispositifs auxquels les professionnels de la santé tels que vous ont recours. Notre réputation durement acquise repose sur notre souci du détail et sur les performances de nos produits, toujours au-delà des attentes.

Le développement de produits révolutionnaires exige du temps, mais les résultats en valent la peine. Chaque étape de notre processus s'inspire de votre engagement, car nous répondons à vos besoins avec pour ambition de dépasser vos attentes. Ce récent dispositif ne ressemble peut-être pas aux autres, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais l'objectif reste le même : vous aider à sauver des vies.

Présentation du **LIFEPAK 35**

Le LIFEPAK 35 est un moniteur/défibrillateur avancé sur le plan clinique, doté d'une technologie ainsi que d'outils exclusifs et mis au point sur une plateforme intuitive¹ et moderne, afin d'offrir des soins de pointe aux patients. Ce dispositif prêt pour l'avenir est conçu pour favoriser l'administration de soins cardiaques en toute confiance² et permettre l'excellence clinique dans l'environnement médical moderne d'aujourd'hui.



Intuitif

Fin, léger et ergonomique, le grand écran tactile¹ facile à utiliser du LIFEPAK 35 et ses outils de pointe d'aide à la décision clinique offrent une expérience clinique personnalisable contribuant à la réduction du fardeau cognitif¹.



Avancé sur le plan clinique

Lorsque chaque seconde compte, vous avez besoin de soins aux patients aussi rapides que vous. Grâce à ses fonctionnalités connectées avancées fournissant informations et conseils, vous pouvez compter sur le LIFEPAK 35, même quand le temps joue contre vous.



LIFEPAK TOUGH

Créée grâce à l'héritage de plusieurs générations de produits sauvant des vies et repensée pour les professionnels de la santé d'aujourd'hui, la plateforme LIFEPAK 35 repose sur une base de confiance et de robustesse sur laquelle vous pouvez compter.

Améliorer les soins aux patients dès aujourd'hui et pour les années à venir

En partenariat avec des clients tels que vous, nous avons mis au point un dispositif afin de vous permettre d'acquérir davantage de maîtrise sur les événements critiques. Le moniteur/défibrillateur LIFEPAK 35 pour les soins d'urgence allie technologies cliniques avancées et facilité d'utilisation^{1,2} dans un dispositif sur lequel vous pouvez compter dans les situations difficiles³.

Les outils de documentation intégrés peuvent contribuer à réduire le temps de traitement et les erreurs de calcul².

cprINSIGHT® aide à améliorer les performances de RCP en mode DAE en réduisant les pauses* entre les compressions thoraciques⁵.

Les listes d'événements de médicaments et de traitement peuvent être personnalisées dans les options de configuration pour inclure jusqu'à 40 événements chacune^{2,7}.

Le LIFEPAK 35 aide à rationaliser les soins aux patients et à réduire la charge cognitive de l'équipe de soins¹.

Les ports de câble à angle droit frontaux permettent de faciliter l'accès aux accessoires de surveillance².



* Les pauses pré-choc ont été réduites à une moyenne de 8 secondes, contre une moyenne de 22 secondes avec le DAE conventionnel. La fraction de compression thoracique avec cprINSIGHT était de 86 % contre 80 % dans le groupe du DAE conventionnel.

** Sur la base de participants interrogés.

LIFEPAK 35 : XGA 10,4", 1 024 x 768, 52,9 po²

iPad

LIFEPAK 15 :

VGA 8,4", 640 x 480, 33,8 po²

Un écran tactile à la fois grand et robuste

L'écran tactile haute définition de 10,4 pouces offre un affichage personnalisé de nos fonctionnalités nouvelle génération. Le verre durable et renforcé chimiquement³ peut être utilisé avec deux paires de gants. Il est également conçu pour résister aux impacts directs ainsi qu'aux chutes² et vous permet d'afficher jusqu'à 12 paramètres de surveillance simultanément, tout en triant et en renommant les dérivations³.

Aidez à traiter des patients de tous âges avec une augmentation de l'énergie biphasique de 1 J à 360 J et un mode DAE pour adulte et enfant^{1,6}.

Rationalisez le flux de travail en transmettant des données pour analyse via le Wi-Fi ou le Bluetooth intégrés².

Le module horloge/l'horloge en temps réel permettent au soignant de basculer entre l'heure actuelle et le temps écoulé lors d'un événement².

L'interface utilisateur intuitive est facile à utiliser et ne nécessite que très peu de formation^{1**}.

L'affichage en direct 12/15 dérivationes avec STJ Insight™ fournit une représentation graphique de l'ECG pour faciliter le diagnostic des lésions myocardiques².


Le système FLEX de double batterie lithium-ion permet une période de surveillance de neuf heures⁴.

La béquille intégrée permet plus de stabilité et une visibilité optimale sur le chariot d'urgence¹.




Une technologie de pointe pour **plus de précision et de confiance**

Concentrez-vous sur les soins aux patients grâce à nos outils thérapeutiques cliniquement avancés

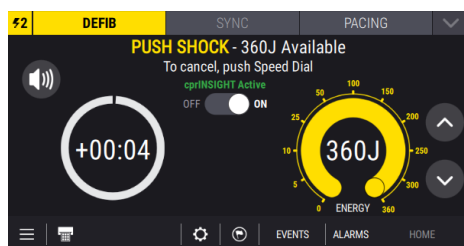


cprINSIGHT³

Le LIFEPAK 35 est le seul moniteur/défibrillateur professionnel pourvu d'un algorithme qui identifie un rythme choquable sans pause de la RCP^{5*}.

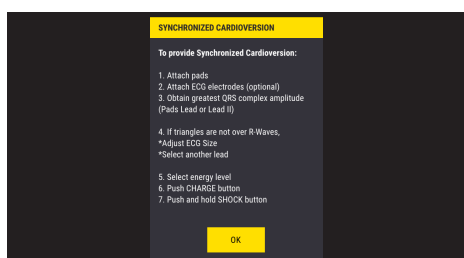

Instructions abrégées à l'écran

Donne des conseils pour une stimulation non invasive et une cardioversion synchronisée².

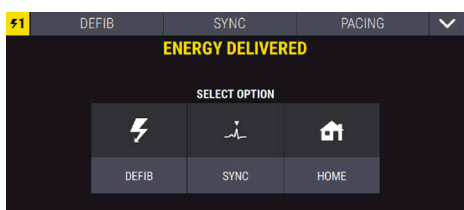

Menu de décision post-synchronisation

Le LIFEPAK 35 est conçu pour la sécurité du patient. Lors de la cardioversion synchronisée, un menu de sélection de mode s'affiche automatiquement à l'écran après chaque choc, invitant le médecin à prendre en compte les besoins du patient².

*A compter du mois d'octobre 2024.

Rationalisez votre **flux de travail**

En nous concentrant sur vos besoins dans le cadre des protocoles hospitaliers et des canaux de communication, nous vous permettons d'exceller dans un environnement comportant de grands enjeux. Le LIFEPAK 35 rationalise le processus de soins en capturant les données cliniques importantes et les événements dans le dossier patient et fournit des rappels personnalisés pour les médicaments et les traitements, ce qui permet d'améliorer les soins aux patients^{1,2}.

Restez connecté grâce aux solutions de santé digitales⁸ LIFENET³



Tenez-vous prêt avec LIFENET Asset

Contrôlez vos dispositifs à distance, recevez des alertes d'état et affichez la localisation statique/dynamique des dispositifs⁹.



Réagissez efficacement avec LIFENET Care

Améliorez la qualité des soins en transmettant, partageant et enregistrant les données des patients dans le but d'améliorer la communication et la coordination de l'équipe⁸.



Analysez rapidement avec CODE-STATTM

Accédez automatiquement aux données ou partagez-les, évaluez les performances et identifiez les axes d'amélioration⁹.



Le **LIFEPAK 35** est conçu de façon ergonomique pour la portabilité et avec **LIFEPAK TOUGH™** pour résister aux chutes au sein d'un environnement hospitalier exigeant³.



Un héritage de confiance

Depuis six décennies, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mettre au point des solutions et développer des technologies qui aident à sauver des vies. Plus d'un demi-million d'unités sont actuellement utilisées dans les ambulances et les chariots d'urgence hospitaliers à travers le monde¹⁰. Notre engagement sans compromis en matière de qualité nous permet de mettre au point des dispositifs sur lesquels vous pouvez compter dans les situations critiques. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : sauver des vies au sein de la communauté, sur le terrain et à l'hôpital.



Pour plus d'informations sur le moniteur/défibrillateur LIFEPAK 35, contactez votre représentant commercial Stryker local ou rendez-vous sur le site [stryker.com](https://www.stryker.com).

Références :

1. Données internes, Stryker HFVR 3338373. 2. Données internes, Stryker OI 3350861. 3. Données internes, Stryker SHVR 3338410. 4. Données internes, Stryker 3352191 Rév. A. 5. de Graaf C, Beeseems SG, Oud S, et al., Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. Resuscitation. Mai 2021 ;162:320-28. 6. Données internes, Stryker UND-3331509 section 6.5. 7. Données internes, Manuel technique Stryker 3350864. 8. Données internes, Stryker LCCR 3349947 et 3347969. 9. Données internes. LSWSIFU. 3327690. 10. Selon les données commerciales internes

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de la santé. Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser un produit particulier pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter les possibilités offertes par les produits Stryker. Avant toute utilisation des produits Stryker, les professionnels de la santé doivent systématiquement se référer aux instructions d'utilisation pour consulter la liste complète des indications, contre-indications, avertissements, précautions et potentiels effets indésirables. Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région. Les caractéristiques de l'appareil sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Stryker ou ses entités apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue et Stryker. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires ou détenteurs respectifs. L'absence de tout nom de produit, fonctionnalité ou service, ou de tout logo dans la liste ci-dessus ne saurait constituer une renonciation d'une marque déposée ou de toute propriété intellectuelle détenue par Stryker et désignée par ledit nom ou logo.

04/2025
EG-L35-BROC-1748118_REV-0_fr_fr © 2025 Stryker



Fabriqué par :

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052
États-Unis
Numéro gratuit : 800 442 1142
[stryker.com/emergencycare](https://www.stryker.com/emergencycare)

Distribué par :

Stryker European
Operations Ltd. Anngrove
IDA Business & Technology
Park
Carrigtwohill
Co. Cork,
T45 HX08