

StrykeFlow™ 2

Suction/Irrigation system

ストライクフロー2 サクション/イリゲーションシステム

- ▶ 簡単な接続で容易な操作
- ▶ ハイパワー灌流
- ▶ 優れたコストパフォーマンス



StrykeFlow™ 2 Suction/Irrigation system

ストライクフロー2は
内視鏡外科手術において
良好な視野確保のために
灌流／吸引を行う洗浄システムです。

ストライクフロー2の特長

・ハイパワー灌流

最大流量 3L/分で、迅速かつ確実な洗浄・処置



・スムーズ吸引

・簡便

生理食塩水バッグにポンプを差し込みサクションチューブを吸引器に接続するだけで使用可能

・優れたコストパフォーマンス

操作にはコンソールユニットなど高額な装置が不要、かつ既存のストライクフローアクセサリーの装着が可能

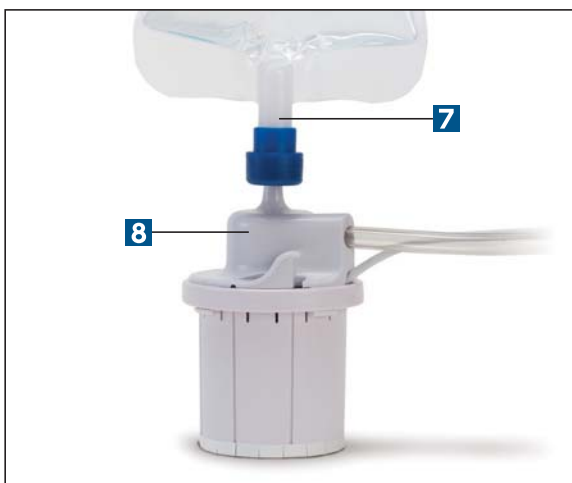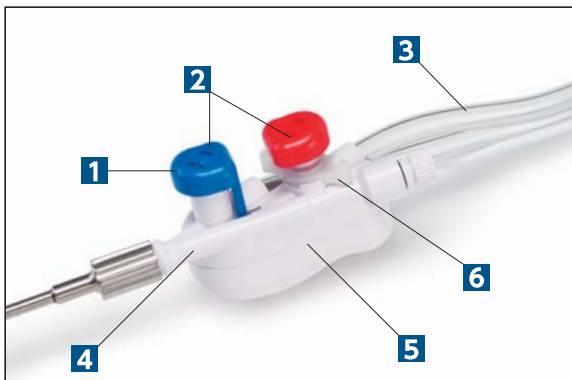

製品特長

1 Variable flow control

流量コントロールができるため、さまざまなシチュエーションに対応可能

2 “Touch & Sight” Button

色だけでなく、形状の違いにより簡単識別

青色&凸型：洗浄ボタン

赤色&凹型：吸引ボタン

3 Softer durometer tubing

ソフトで扱いやすい素材のチューブ

4 Through-flow valve design

独自デザインにより内径4mmを確保

5 Ergonomic design handpiece

人間工学に基づいたデザイン採用のハンドピースは、握りやすく疲れも軽減

6 Variable suction control

吸引弁の部分開放により、体腔内の煙を除去し常に良好な視野を確保

7 Direct-connect Irrigation interface

簡単セッティング。生理食塩水バッグにポンプを直接刺すだけで使用可能

8 “Pop-Top” Battery housing

使用済み乾電池の取り出しはワンタッチで簡単

デザイン&機能

- ・握りやすいエルゴノミックデザイン採用
- ・色と形状による操作ボタンの識別
- ・乾電池の廃棄を考慮した環境設計



製品スペック

可変式フローレート	最大 3L/分
エルゴノミックデザイン	丸みを帯びたデザイン
	軽量 363g (ハンドピース部分)
	コンパクトサイズ
	バランスのとれた設計



製品リスト

カタログ番号	製品名	規格
SR-250-70-500 ¹⁾	サクション/イリゲーション ハンドピース	ストライクフロー2
SR-250-70-402 ¹⁾		径5mm 長さ28cm
SR-250-70-403 ¹⁾	サクション/イリゲーションチップ	径5mm 長さ32cm
SR-250-70-404 ¹⁾		径10mm 長さ32cm
SR-250-70-405 ¹⁾	プールサクションチップ	径10mm 長さ32cm
SR-250-70-406 ¹⁾		径5mm 長さ32cm
SR-250-70-407 ¹⁾	ハイドロディセクターチップ	径5mm 長さ32cm
SR-250-70-408 ¹⁾		径5mm 長さ45cm
SR-250-70-409 ¹⁾	サクション/イリゲーションチップ	径5mm 長さ32cm ノーホールタイプ
	医療機器認証番号	販売名
	¹⁾ 228AFBZX00021000	ストライクフロー2サクション/イリゲーションシステム
0250-070-441 ²⁾		径5mm 長さ32cm スパチュラ型
0250-070-442 ²⁾	ストライクフロー電極チップ	径5mm 長さ32cm J型
0250-070-443 ²⁾		径5mm 長さ32cm L型
0250-070-445 ²⁾		径5mm 長さ32cm ニードル型
0250-070-450 ²⁾	ストライクフロー電極先用 シース	径5mm 長さ45cm
0250-070-460 ²⁾		径5mm 長さ32cm
0250-070-451 ²⁾		径5mm 長さ45cm スパチュラ型
0250-070-452 ²⁾	ストライクフロー電極先	径5mm 長さ45cm J型
0250-070-453 ²⁾		径5mm 長さ45cm L型
	医療機器認証番号	販売名
	²⁾ 223AFBZX00001000	ストライカー ラパロスコピック電極

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-143
HS/SE 2m 06/18

Copyright © 2018 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/