

Trident[®] HA

Acetabular System

トライデント HA アセタブラーシステム

- ▶ X3ポリエチレン・デュアルモビリティライナーの選択が可能
- ▶ HAコーティング
- ▶ 4種類のシェルバリエーション



Trident[®] HA


HAコーティング

ストライカーの溶射吹付け技術を用いて、ハイドロキシアパタイト (HA) をコーティングしています。

厚さ約50 μ mのPureFix HAコーティングは1987年より臨床使用されています。

ロッキングメカニズム

トライデントポリエチレンインサートは、円周ビードがシェルの溝と噛み合いロックします。シェルの回旋防止突起(バーブ)とインサート側の窪み(スキヤロップ)がロックすることにより回旋安定性が得られます。ポリエチレンインサートには12種類のシェル挿入位置があり、適切な位置に設置できるようになっています。

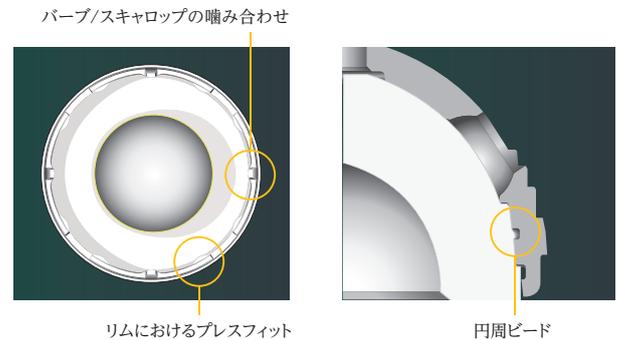

■カタログ番号一覧

トライデント HA シェル PSLタイプ*			コード	トライデント HA シェル 半球タイプ*		
ノンホール	クラスターホール	外径		外径	クラスターホール	マルチホール
540-11-40A	542-11-40A	40	A	42	502-11-42A	508-11-42A
540-11-42B	542-11-42B	42	B	44	502-11-44B	508-11-44B
540-11-44C	542-11-44C	44	C	46	502-11-46C	508-11-46C
540-11-46D	542-11-46D	46	D	48	502-11-48D	508-11-48D
540-11-48D	542-11-48D	48	D	50	502-11-50D	508-11-50D
540-11-50E	542-11-50E	50	E	52	502-11-52E	508-11-52E
540-11-52E	542-11-52E	52	E	54	502-11-54E	508-11-54E
540-11-54F	542-11-54F	54	F	56	502-11-56F	508-11-56F
540-11-56F	542-11-56F	56	F	58	502-11-58F	508-11-58F
540-11-58G	542-11-58G	58	G	60	502-11-60G	508-11-60G
540-11-60G	542-11-60G	60	G	62	502-11-62G	508-11-62G
540-11-62H	542-11-62H	62	H	64	502-11-64H	508-11-64H
540-11-64H	542-11-64H	64	H	66	502-11-66H	508-11-66H

PSLクラスター



外径40~48mm



外径50mm~



半球クラスター



外径42~50mm



外径52mm~



PSLノンホール



外径40mm~



半球マルチホール



外径42~48mm



外径50mm



外径52mm~



医療機器承認番号	販売名
*21900BZY00055000	トライデントHA寛骨臼カップシステム
22100BZX01000000	X3寛骨臼ライナー
22300BZX00018000	BIOLOX deltaセラミックフェモラルヘッド

医療機器承認番号	販売名
22400BZX00376000	リストラクションADM
22400BZX00459000	MDM/ADM寛骨臼システム

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: HE1-157_Rev1
CS/IB 1.5m 10/21

Copyright © 2021 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp