


OASYS

Occipito-cervico-thoracic system

OASYS サービカルシステム

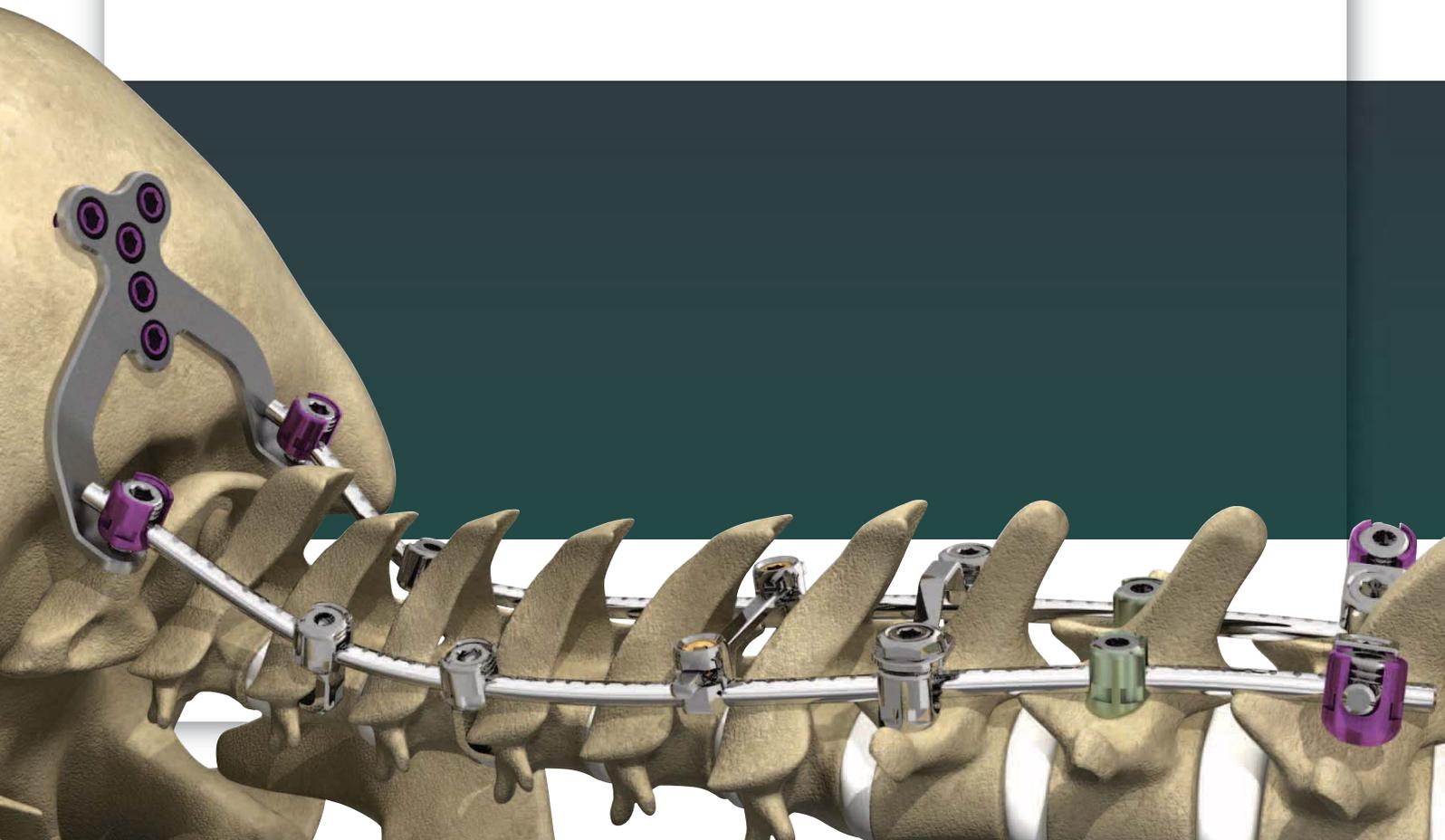

Optimal Alignment System

2004年、OASYSは日本初の頸椎後方ポリアクシャルスクリューとして発売され、高い自由度と世界最小クラスのヘッドプロファイルを特長としています。内外側スクリュー、Vitalliumロッド(コバルトクロム合金)、正中プレートを導入し、汎用性の高いシステムとしてその地位を確立してきました。

Wide Implant Variation

■スクリュー


- ・ 頭尾側又は、内外側一方向に**最大55°**の高い自由度を持つ、**ロープロファイル**なスクリュー (ノンバイアススクリューは全周60°)
- ・ 4種類のスクリューバリエーションは、部位、スクリューの刺入方法、骨質によって選択が可能

頭尾側用 (主にラテラルマックススクリューに使用)

内外側用 (主にペディクルスクリューに使用)


スムーズシャンク (C1のGoel/Harms法に使用)

ノンバイアス (主に胸椎Th3までに使用)

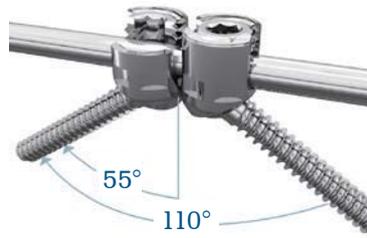

■ブロッカー

クロススレッドの発生を軽減し、容易な挿入を可能にするパッドレススレッドデザインを採用


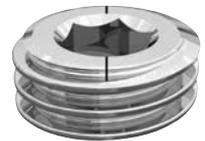


■後頭骨プレート

正中プレートとセパレートタイプの2タイプから選択可能


正中プレート

ロッド連結部がポリアクシャルヘッドとなり、簡便なロッド連結が実現

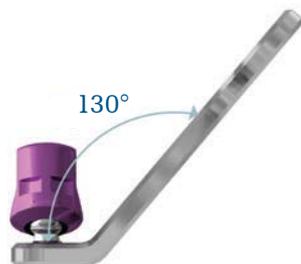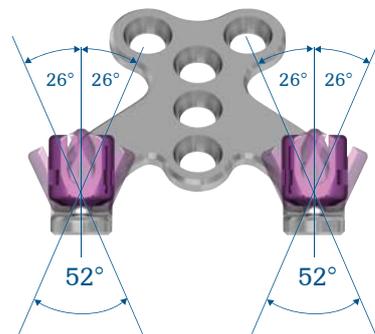

セパレートタイプ

後頭骨と頸椎の成す角度に100°、130°が選択可能
ストレートタイプ、プリベントタイプを用意

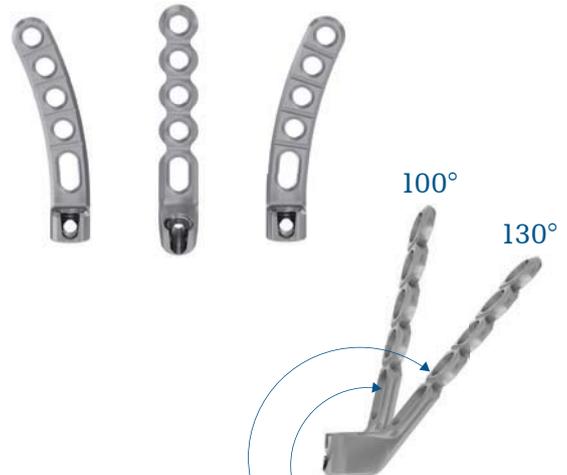

カタログ番号	品名	長さ	幅	スクリュー穴数
48571044	OASYS正中プレートスモール	27mm	30mm	5
48571045	OASYS正中プレートミディアム	30mm	38mm	5
48571046	OASYS正中プレートラージ	35mm	43mm	5
48571047	OASYSiE正中プレートラージロング	39mm	43mm	5
48571048	OASYSiE正中プレートミニ	23mm	27mm	4

■ロッド

- ・単椎間用のプリカットロッドを用意
- ・素材はチタン合金、Vitalliumの2種類
- ・トランジションロッドは全てのStryker胸腰椎システムとの連結が可能



■コネクター

トランスバースコネクター

ロッド上に設置するクリップタイプ

クロスコネクター

スクリューヘッド上に設置し硬膜を避けるアーチデザイン



2種類のオフセットコネクター

スクリューヘッドの配列に応じ12mmと20mmを用意

ロッド連結コネクター

全てのStrykerシステムと連結が可能



ポリアクシャルスクリュー 頭尾側用

カタログ番号	サイズ(径×長さ)
48552310	3.5mm × 10mm
48552312	3.5mm × 12mm
48552314	3.5mm × 14mm
48552316	3.5mm × 16mm
48552318	3.5mm × 18mm
48552320	3.5mm × 20mm
48552322	3.5mm × 22mm
48552324	3.5mm × 24mm
48552326	3.5mm × 26mm
48552328	3.5mm × 28mm
48552410	4.0mm × 10mm
48552412	4.0mm × 12mm
48552414	4.0mm × 14mm
48552416	4.0mm × 16mm
48552418	4.0mm × 18mm
48552420	4.0mm × 20mm
48552422	4.0mm × 22mm
48552424	4.0mm × 24mm
48552426	4.0mm × 26mm
48552430	4.0mm × 30mm
48552434	4.0mm × 34mm
48552438	4.0mm × 38mm
48552442	4.0mm × 42mm
48552446	4.0mm × 46mm
48552450	4.0mm × 50mm

ポリアクシャルスクリュー 内外側用

カタログ番号	サイズ(径×長さ)
48555320	3.5mm × 20mm
48555322	3.5mm × 22mm
48555324	3.5mm × 24mm
48555328	3.5mm × 28mm
48555332	3.5mm × 32mm
48555336	3.5mm × 36mm
48555340	3.5mm × 40mm
48555420	4.0mm × 20mm
48555422	4.0mm × 22mm
48555424	4.0mm × 24mm
48555428	4.0mm × 28mm
48555432	4.0mm × 32mm
48555436	4.0mm × 36mm
48555440	4.0mm × 40mm
48555444	4.0mm × 44mm
48555448	4.0mm × 48mm
48555452	4.0mm × 52mm

ポリアクシャルスクリュー スムースシャンク

48556322	3.5mm × 22mm
48556324	3.5mm × 24mm
48556326	3.5mm × 26mm
48556328	3.5mm × 28mm
48556330	3.5mm × 30mm
48556332	3.5mm × 32mm
48556334	3.5mm × 34mm
48556336	3.5mm × 36mm
48556338	3.5mm × 38mm
48556340	3.5mm × 40mm

ポリアクシャルスクリュー ノンバイアス

カタログ番号	サイズ(径×長さ)
48558310	3.5mm × 10mm
48558312	3.5mm × 12mm
48558314	3.5mm × 14mm
48558316	3.5mm × 16mm
48558318	3.5mm × 18mm
48558320	3.5mm × 20mm
48558410	4.0mm × 10mm
48558412	4.0mm × 12mm
48558414	4.0mm × 14mm
48558416	4.0mm × 16mm
48558418	4.0mm × 18mm
48558420	4.0mm × 20mm
48558520	4.5mm × 20mm
48558524	4.5mm × 24mm
48558528	4.5mm × 28mm
48558532	4.5mm × 32mm
48558536	4.5mm × 36mm
48558540	4.5mm × 40mm
48558544	4.5mm × 44mm
48558548	4.5mm × 48mm
48558552	4.5mm × 52mm

医療機器承認番号

販売名

21500BZY00559000

OASYS サービカルシステム

*1 22300BZX00463000

OASYS サービカルシステム LE

*2 22100BZX00886000

エクシア バイタリウム ロッド

正中プレート*1

カタログ番号	規格
48571044	スモール
48571045	ミディアム
48571046	ラージ
48571047	ラージロング
48571048*	ミニ



*スクリュー穴数4

後頭骨プレート

カタログ番号	規格	
48551010	1 レベル用	
48551020	2 レベル用	
48551030	マルチレベル用	
48551040	後頭骨プレート	
48551041L	プリバント左	
48551041R	プリバント右	
48551042	100°	
48551043L	プリバント左 100°	
48551043R	プリバント右 100°	

プレートスクリュー

カタログ番号	サイズ(径×長さ)
48554306	3.5mm × 6mm
48554308	3.5mm × 8mm
48554310	3.5mm × 10mm
48554312	3.5mm × 12mm
48554314	3.5mm × 14mm
48554316	3.5mm × 16mm
48554318	3.5mm × 18mm
48554320	3.5mm × 20mm
48554322	3.5mm × 22mm
48554324	3.5mm × 24mm
48554406	4.0mm × 6mm
48554408	4.0mm × 8mm
48554410	4.0mm × 10mm
48554412	4.0mm × 12mm
48554414	4.0mm × 14mm
48554416	4.0mm × 16mm
48554418	4.0mm × 18mm
48554420	4.0mm × 20mm
48554422	4.0mm × 22mm
48554424	4.0mm × 24mm
48554426	4.0mm × 26mm
48554430	4.0mm × 30mm
48554434	4.0mm × 34mm
48554438	4.0mm × 38mm
48554442	4.0mm × 42mm
48554446	4.0mm × 46mm
48554450	4.0mm × 50mm
48554454	4.0mm × 54mm
48574506*1	4.5mm × 6mm
48574508*1	4.5mm × 8mm
48574510*1	4.5mm × 10mm
48574512*1	4.5mm × 12mm
48574514*1	4.5mm × 14mm
48574516*1	4.5mm × 16mm



ロッド 3.5mm径

カタログ番号	長さ
48552025	25mm
48552030	30mm
48552040	40mm
48552080	80mm
48552120	120mm
48552240	240mm

TI 合金 トランジション ロッド

カタログ番号	サイズ (径-径)
48573600	3.5mm - 4.5mm
48573604	3.5mm - 5.5mm
48573608	3.5mm - 6.0mm

バイタリウムロッド 3.5mm径*2

カタログ番号	長さ
48553080	80mm
48553120	120mm
48553240	240mm
48553350	350mm

バイタリウム トランジション ロッド*2

カタログ番号	サイズ (径-径)
48573602	3.5mm - 4.5mm
48573606	3.5mm - 5.5mm
48573610	3.5mm - 6.0mm

コネクター

カタログ番号	種類	
48551080	オフセットコネクター 20mm	
48551081	オフセットコネクター 12mm	
48551070	トランスバースコネクター 80mm	
48551073	クロスコネクター 24mm	
48551074	クロスコネクター 32mm	
48551075	クロスコネクター 40mm	

ロッド連結コネクター

カタログ番号	規格	
軸方向タイプ		
48551085	3.5/3.5mm 用	
48551084	3.5/4.5mm 用	
48551086	3.5/5.5mm 用	
48551087	3.5/6.0mm 用	
平行タイプ		
48551088	3.5/3.5mm 用	
48551091	3.5/4.5mm 用	
48551089	3.5/5.5mm 用	
48551090	3.5/6.0mm 用	
48551000	ロッカー	

フック

カタログ番号	サイズ (スロート高)	
スタンダードフック		
48551049	3.5mm	
48551050	5.0mm	
48551053	6.5mm	
48551055	8.0mm	
オフセットフック		
48551060	右	
48551065	左	

在庫をお問い合わせ下さい。

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: SP1-92
CS/IB 0m 11/18

Copyright © 2018 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/