



stryker

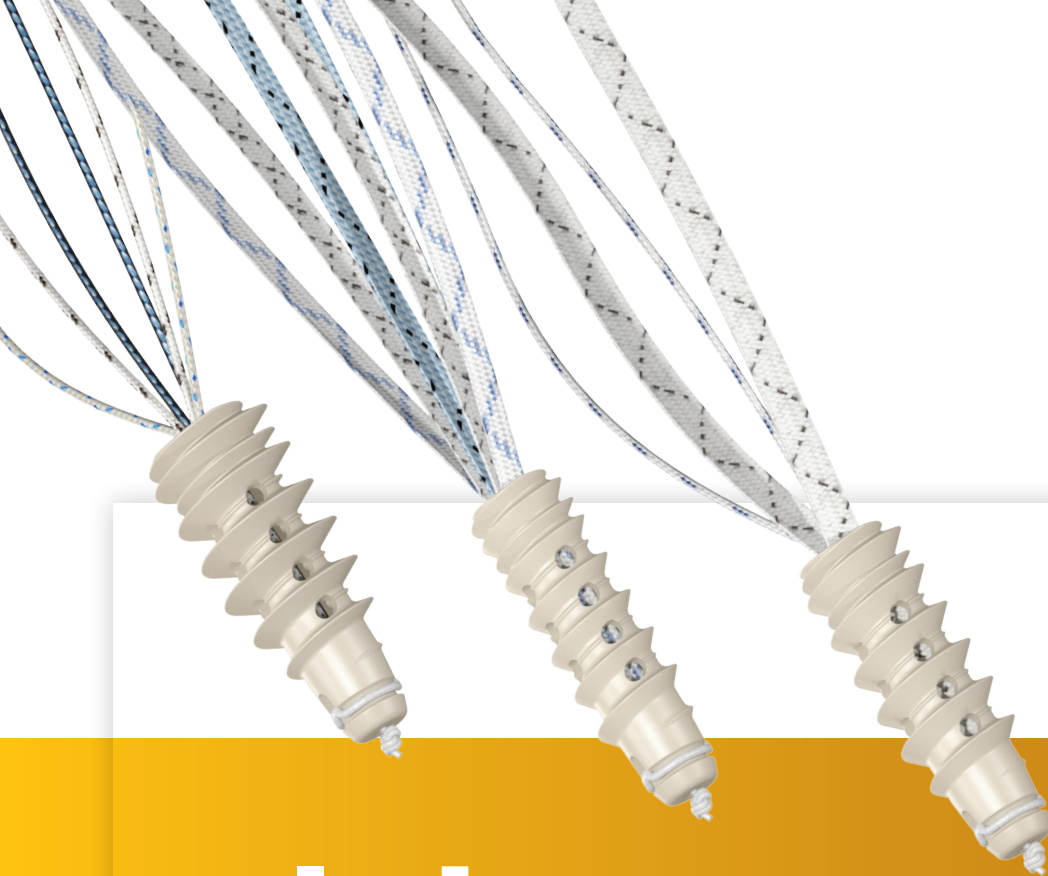

AlphaVent

Hard-body, screw-in anchor platform

スクリュー型、
高強度アンカー

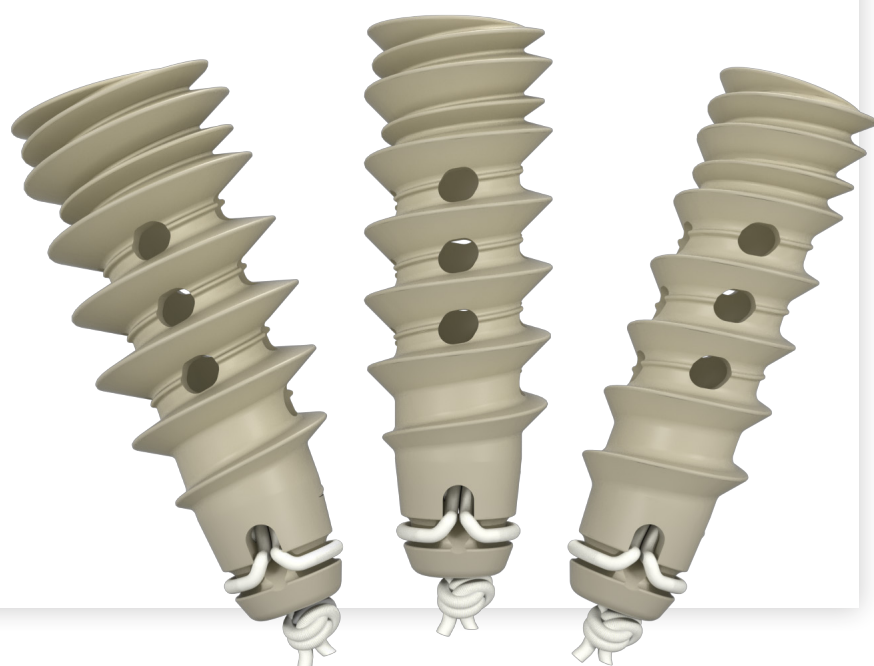

6.5mm



5.5mm

4.75mm

Designed to **perform**

独自のソフトトリプルアイレット

- 高い強度のアイレット
- スライド縫合および非スライド縫合に対応
- 縫合糸のスムーズなスライド

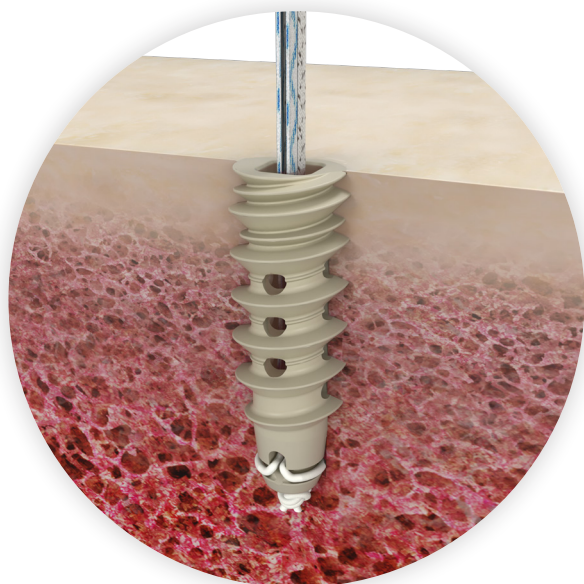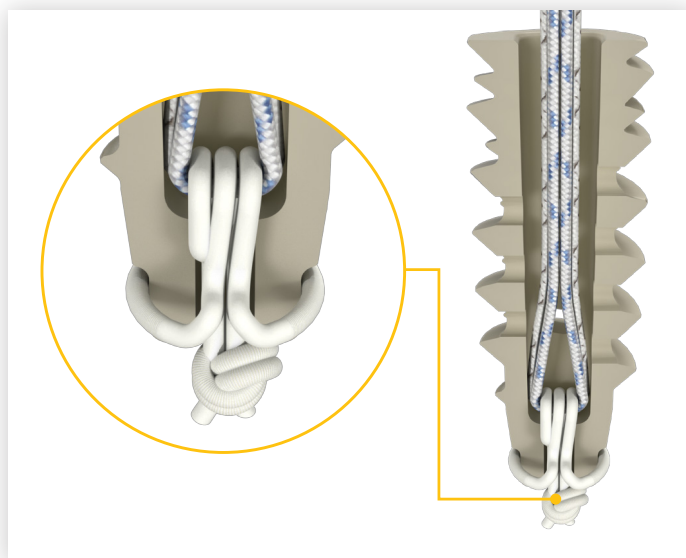

デュアルスレッドテクノロジー

- 皮質骨と海綿骨に最適に噛み合うことでアンカーの性能を向上させるために考案されました
- 皮質骨に挿入時に、アンカーが固定される感覚が触覚フィードバックとして得られます




閉塞感のないカニュレーションで 完全な通気を実現

- 治癒部位での血液や他の自己細胞の循環を可能にします

Versatile platform

術者のニーズを包括的に満たすように設計しています。

- 3つのアンカーサイズ
- 針付き、針なし
- 10種類の高強度UHMWPE縫合糸の構成
- 骨質に合った器械
- スライディング、ノンスライディング

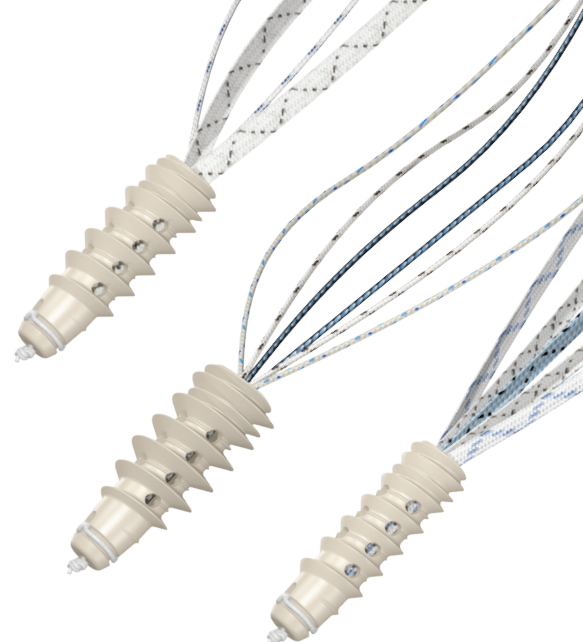

針はハンドルに安全に収納

フルスロット式ドライバーにより、術中のスクリューの再締結と取り外しが可能

細く、挿入しやすい先端



オール PEEK
アンカーボディ

Instrumentation for **all bone qualities**

- アウル、ドリル、タップ、パンチタップを使用することで、好みの手技を実現し骨質に合わせて効率的にパイロットホールを作成できます。
- ドリルガイドは、オープンの手術時に使用できます。



高強度で多様な修復に対応する、
豊富な選択肢

カタログ番号	製品名
4.75mm suture anchors	
3910-947-031	AlphaVent 4.75mm スーチャーアンカー PEEK 1.4mm XBraidテープ 3本付
3910-947-131	AlphaVent 4.75mm スーチャーアンカー PEEK 針付き1.4mm XBraidテープ 3本付
3910-947-020	AlphaVent 4.75mm スーチャーアンカー PEEK 1.8mm XBraidテープ 2本付
3910-947-120	AlphaVent 4.75mm スーチャーアンカー PEEK 針付き1.8mm XBraidテープ 2本付
3910-947-221	AlphaVent 4.75mm スーチャーアンカー PEEK 1.4mm NS 1.8mm XBraid テープ 各1本付
5.5mm suture anchors	
3910-955-031	AlphaVent 5.5mm スーチャーアンカー PEEK 1.4mm XBraidテープ 3本付
3910-955-020	AlphaVent 5.5mm スーチャーアンカー PEEK 1.8mm XBraidテープ 2本付
3910-955-221	AlphaVent 5.5mm スーチャーアンカー PEEK 1.4mm NS 1.8mm XBraidテープ 各1本付
Instrumentation	
3910-947-200	3.9mm Omega AND 4.75mm AlphaVent オウル1
3910-947-201	4.75mm AlphaVent AND Omega オウル
3910-947-202	4.75mm AlphaVent AND Omega ドリル
3910-947-207	4.75mm AlphaVent タップ
3910-947-208	4.75mm AlphaVent パンチタップ
3910-947-203	5.5mm AlphaVent AND 4.75mm Omega ドリル
3910-947-209	5.5mm AlphaVent タップ
3910-947-212	ドリル ガイド

医療機器承認/届出番号	販売名
30500BZX00203000	AlphaVent PEEK スーチャーアンカー
13B1X10209001005	AlphaVent スーチャーアンカー用手術器械

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用の前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。