

T2 Alpha™

Nailing redefined.



T2 Alpha

Nailing redefined.

T2 Alphaは、直感的で効率的な手術手技をかなえるためにデザインされた包括的な髓内釘システムで、ストライカーの非常に新しい技術進化をインプラント・器械に適応したシステムです。



T2 Alphaの特徴

- ▶ 様々なロッキングオプションを選択できるハイブリッド型の大腿骨ネイル
梨状窩刺入のPFネイルと大転子刺入のGTネイルの2種類を選択可能
- ▶ 大腿骨ネイルはSOMA*によってデザインされた、ネイル長に応じた曲率半径を設定
- ▶ 新しいオプションとしてのアドバンスドロッキングスクリューで角度と軸に対する安定性の向上
- ▶ 手技を簡便にする大腿骨・脛骨用の遠位ターゲティングデバイス

*Stryker Orthopaedics Modeling and Analytics system

Intraoperative **adaptability**

術中の適応力

T2 Alphaは術者の術中の多様なニーズに対応できるプラットフォームを提供します。希望するエントリーポイント、長さに応じた曲率半径、追加されたロッキングオプション等、多様な症例の解剖学的ニーズに対応できるインプラントを提供します。

- ▶ 大腿骨GTネイルとPFネイルの近位・遠位のロッキングオプション
 - リコン ロッキング
 - オブリーク ロッキング
 - スタティック & ダイナミック ロッキング
 - ダイナミック モード
 - インターナル アポジション/コンプレッション モード
 - エクスターナル アポジション/コンプレッション モード
- ▶ ネイル長に応じた750mmから1350mmの曲率半径
- ▶ 脛骨ネイルの近位ロッキングオプション
 - 遠位側にMLスクリューを追加



T2 Alpha


Nailing redefined.

Stability when you need it

選択できる固定力

T2 Alphaは、新しいオプションとして軸と角度安定性を向上するアドバンスドロッキングスクリューを導入しました。アドバンスドロッキングスクリューは、バイコーティカルの把持を維持する間、ネイルとスクリュー間のRelative motionを抑制するようにデザインされています¹。5mmの全てのラウンドホールに使用することができ、術者がさらなる安定性を必要とするときに選択することができます。

- ▶ 簡単に挿入するためのセルフセンタリングスクリューティップ
- ▶ アドバンスドロッキングスクリューは全ての5mmラウンドホールに噛み合い・ロックされるようデザインされています。
- ▶ スクリューホール内での動きを最大50%削減²

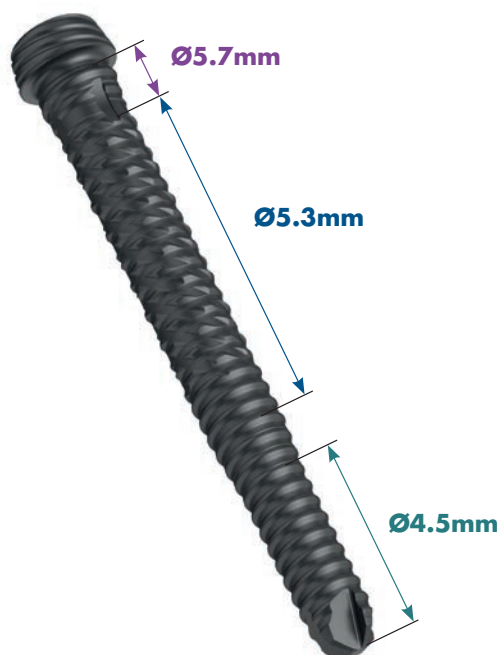

Unmatched instrument platform

より洗練された器械プラットフォーム

T2 Alphaは効率的な器械の機能と手順により、より洗練された手術経験を提供します。大腿骨・脛骨用の遠位ターゲティングデバイスで、再現可能な一貫した遠位スクリュー締結の手順を術者に提供します。新しいベーシックインストゥルメントセットは、直感的な操作とモジュラー性が特徴です。

- ▶ 大腿骨・脛骨ネイルの遠位ターゲティングデバイス
 - 手術時間とX線被曝量を削減
- ▶ 連続性・機能性を高めた器械
 - 強固なセルフリテイニングスクリュードライバー
 - 片手で扱える、様々な径のガイドワイヤーを把持可能なガイドワイヤーインサーター
 - 様々な器械に接続できるクイックロックデルタハンドル



References:

1. Internal test report A0030043
2. Fatigue Strength of Locking Screws, Internal Document, T2-WP-6, 07-2018

製品リスト

T2 ALPHA 大腿骨GTネイル



径	規格	カタログ番号 左	カタログ番号 右
9mm	260mm	2331-0926S	2333-0926S
	280mm	2331-0928S	2333-0928S
	300mm	2331-0930S	2333-0930S
	320mm	2331-0932S	2333-0932S
	340mm	2331-0934S	2333-0934S
	360mm	2331-0936S	2333-0936S
	380mm	2331-0938S	2333-0938S
	400mm	2331-0940S	2333-0940S
	420mm	2331-0942S	2333-0942S
	440mm	2331-0944S	2333-0944S
10mm	260mm	2331-1026S	2333-1026S
	280mm	2331-1028S	2333-1028S
	300mm	2331-1030S	2333-1030S
	320mm	2331-1032S	2333-1032S
	340mm	2331-1034S	2333-1034S
	360mm	2331-1036S	2333-1036S
	380mm	2331-1038S	2333-1038S
	400mm	2331-1040S	2333-1040S
	420mm	2331-1042S	2333-1042S
	440mm	2331-1044S	2333-1044S
11mm	260mm	2331-1126S	2333-1126S
	280mm	2331-1128S	2333-1128S
	300mm	2331-1130S	2333-1130S
	320mm	2331-1132S	2333-1132S
	340mm	2331-1134S	2333-1134S
	360mm	2331-1136S	2333-1136S
	380mm	2331-1138S	2333-1138S
	400mm	2331-1140S	2333-1140S
	420mm	2331-1142S	2333-1142S
	440mm	2331-1144S	2333-1144S
12mm	260mm	2331-1226S	2333-1226S
	280mm	2331-1228S	2333-1228S
	300mm	2331-1230S	2333-1230S
	320mm	2331-1232S	2333-1232S
	340mm	2331-1234S	2333-1234S
	360mm	2331-1236S	2333-1236S
	380mm	2331-1238S	2333-1238S
	400mm	2331-1240S	2333-1240S
	420mm	2331-1242S	2333-1242S
	440mm	2331-1244S	2333-1244S

径	規格	カタログ番号 左	カタログ番号 右
13mm	260mm	2331-1326S	2333-1326S
	280mm	2331-1328S	2333-1328S
	300mm	2331-1330S	2333-1330S
	320mm	2331-1332S	2333-1332S
	340mm	2331-1334S	2333-1334S
	360mm	2331-1336S	2333-1336S
	380mm	2331-1338S	2333-1338S
	400mm	2331-1340S	2333-1340S
	420mm	2331-1342S	2333-1342S
	440mm	2331-1344S	2333-1344S
14mm	280mm	2331-1428S	2333-1428S
	300mm	2331-1430S	2333-1430S
	320mm	2331-1432S	2333-1432S
	340mm	2331-1434S	2333-1434S
	360mm	2331-1436S	2333-1436S
	380mm	2331-1438S	2333-1438S
	400mm	2331-1440S	2333-1440S
	420mm	2331-1442S	2333-1442S
	440mm	2331-1444S	2333-1444S

T2 ALPHA 大腿骨PFネイル



径	規格	カタログ番号 左	カタログ番号 右
9mm	260mm	2335-0926S	2337-0926S
	280mm	2335-0928S	2337-0928S
	300mm	2335-0930S	2337-0930S
	320mm	2335-0932S	2337-0932S
	340mm	2335-0934S	2337-0934S
	360mm	2335-0936S	2337-0936S
	380mm	2335-0938S	2337-0938S
	400mm	2335-0940S	2337-0940S
	420mm	2335-0942S	2337-0942S
	440mm	2335-0944S	2337-0944S
	10mm	260mm	2335-1026S
280mm		2335-1028S	2337-1028S
300mm		2335-1030S	2337-1030S
320mm		2335-1032S	2337-1032S
340mm		2335-1034S	2337-1034S
360mm		2335-1036S	2337-1036S
380mm		2335-1038S	2337-1038S
400mm		2335-1040S	2337-1040S
420mm		2335-1042S	2337-1042S
440mm		2335-1044S	2337-1044S
11mm		260mm	2335-1126S
	280mm	2335-1128S	2337-1128S
	300mm	2335-1130S	2337-1130S
	320mm	2335-1132S	2337-1132S
	340mm	2335-1134S	2337-1134S
	360mm	2335-1136S	2337-1136S
	380mm	2335-1138S	2337-1138S
	400mm	2335-1140S	2337-1140S
	420mm	2335-1142S	2337-1142S
	440mm	2335-1144S	2337-1144S
	12mm	260mm	2335-1226S
280mm		2335-1228S	2337-1228S
300mm		2335-1230S	2337-1230S
320mm		2335-1232S	2337-1232S
340mm		2335-1234S	2337-1234S
360mm		2335-1236S	2337-1236S
380mm		2335-1238S	2337-1238S
400mm		2335-1240S	2337-1240S
420mm		2335-1242S	2337-1242S
440mm		2335-1244S	2337-1244S

径	規格	カタログ番号 左	カタログ番号 右
13mm	260mm	2335-1326S	2337-1326S
	280mm	2335-1328S	2337-1328S
	300mm	2335-1330S	2337-1330S
	320mm	2335-1332S	2337-1332S
	340mm	2335-1334S	2337-1334S
	360mm	2335-1336S	2337-1336S
	380mm	2335-1338S	2337-1338S
	400mm	2335-1340S	2337-1340S
	420mm	2335-1342S	2337-1342S
	440mm	2335-1344S	2337-1344S
	14mm	280mm	2335-1428S
300mm		2335-1430S	2337-1430S
320mm		2335-1432S	2337-1432S
340mm		2335-1434S	2337-1434S
360mm		2335-1436S	2337-1436S
380mm		2335-1438S	2337-1438S
400mm		2335-1440S	2337-1440S
420mm		2335-1442S	2337-1442S
440mm		2335-1444S	2337-1444S

■ は、オプションサイズです。使用をご希望の場合は早めにご連絡ください。

製品リスト



T2 ALPHA 脛骨ネイル

径	規格	カタログ番号
9mm	240mm	2341-0924S
	255mm	2341-0925S
	270mm	2341-0927S
	285mm	2341-0928S
	300mm	2341-0930S
	315mm	2341-0931S
	330mm	2341-0933S
	345mm	2341-0934S
	360mm	2341-0936S
	375mm	2341-0937S
10mm	240mm	2341-1024S
	255mm	2341-1025S
	270mm	2341-1027S
	285mm	2341-1028S
	300mm	2341-1030S
	315mm	2341-1031S
	330mm	2341-1033S
	345mm	2341-1034S
	360mm	2341-1036S
	375mm	2341-1037S
11mm	240mm	2341-1124S
	255mm	2341-1125S
	270mm	2341-1127S
	285mm	2341-1128S
	300mm	2341-1130S
	315mm	2341-1131S
	330mm	2341-1133S
	345mm	2341-1134S
	360mm	2341-1136S
	375mm	2341-1137S
12mm	240mm	2341-1224S
	255mm	2341-1225S
	270mm	2341-1227S
	285mm	2341-1228S
	300mm	2341-1230S
	315mm	2341-1231S
	330mm	2341-1233S
	345mm	2341-1234S
	360mm	2341-1236S
	375mm	2341-1237S

径	規格	カタログ番号
13mm	255mm	2341-1325S
	270mm	2341-1327S
	285mm	2341-1328S
	300mm	2341-1330S
	315mm	2341-1331S
	330mm	2341-1333S
	345mm	2341-1334S
	360mm	2341-1336S
	375mm	2341-1337S

T2 Alpha 大腿骨ネイル用



T2 リンストラクションネイル ラグスクリュー (径6.5mm)*¹

規格	カタログ番号
65mm	1897-6065S
70mm	1897-6070S
75mm	1897-6075S
80mm	1897-6080S
85mm	1897-6085S
90mm	1897-6090S
95mm	1897-6095S
100mm	1897-6100S
105mm	1897-6105S
110mm	1897-6110S



T2 ALPHA GT/PFセットスクリュー*²

径	規格	カタログ番号
8mm	GTセットスクリュー	2331-0000S
8mm	PFセットスクリュー	2335-0000S



T2 ALPHA 大腿骨コンプレッションスクリュー*²

径	カタログ番号
5.5mm	2330-0001S



T2 ALPHA エンドキャップ*² ※

径	規格	カタログ番号
8mm	0mm	2330-0000S
13mm	5mm	2330-0005S
13mm	10mm	2330-0010S
13mm	15mm	2330-0015S
13mm	20mm	2330-0020S

※8mm T2 ALPHA 下肢用エンドキャップ
13mm T2 ALPHA GT/PFエンドキャップ

T2 Alpha 脛骨ネイル用



T2 ALPHA 脛骨コンプレッションスクリュー

カタログ番号
2341-0001S



T2 ALPHA エンドキャップ*²

径	規格	カタログ番号
8mm	0mm	2330-0000S
11.5mm	5mm	2341-0005S
11.5mm	10mm	2341-0010S
11.5mm	15mm	2341-0015S

※8mm T2 ALPHA 下肢用エンドキャップ
11.5mm T2 ALPHA 脛骨エンドキャップ

共通スクリュー



ロッキングスクリュー (径5mm)*³

規格	カタログ番号
25mm	2360-5025S
30mm	2360-5030S
35mm	2360-5035S
40mm	2360-5040S
45mm	2360-5045S
50mm	2360-5050S
55mm	2360-5055S
60mm	2360-5060S
65mm	2360-5065S
70mm	2360-5070S
75mm	2360-5075S
80mm	2360-5080S
85mm	2360-5085S
90mm	2360-5090S
95mm	2360-5095S
100mm	2360-5100S
105mm	2360-5105S
110mm	2360-5110S



アドバンスドロッキングスクリュー*³


規格	カタログ番号
30mm	2361-5030S
35mm	2361-5035S
40mm	2361-5040S
45mm	2361-5045S
50mm	2361-5050S
55mm	2361-5055S
60mm	2361-5060S
65mm	2361-5065S
70mm	2361-5070S
75mm	2361-5075S
80mm	2361-5080S

注記 脛骨用にロッキングスクリュー、アドバンスドロッキングスクリューは2.5mm刻みの長さをご用意しています。(～60mm)
詳しくは、T2 Alpha 脛骨ネーリングシステムの手技書をご確認ください。

医療機器承認番号	販売名
*1 21600BZY00295000	T2リストラクションネーリングシステム
*2 23100BZX00063000	T2 Alpha 大腿骨
*3 23100BZX00064000	T2 Alpha 脛骨

T2 Alpha

Nailing redefined.

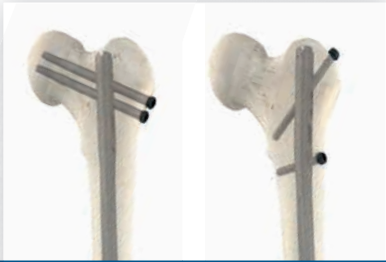

Intraoperative
adaptability



Stability when
you need it



Unmatched
instrument platform

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: IN1-57
CS/IB 1m 02/20

Copyright © 2020 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/