


Migliorare
le prestazioni,

**offrire
versatilità**

Pinze bipolari antiaderenti Spetzler-Malis e SILVERGlide

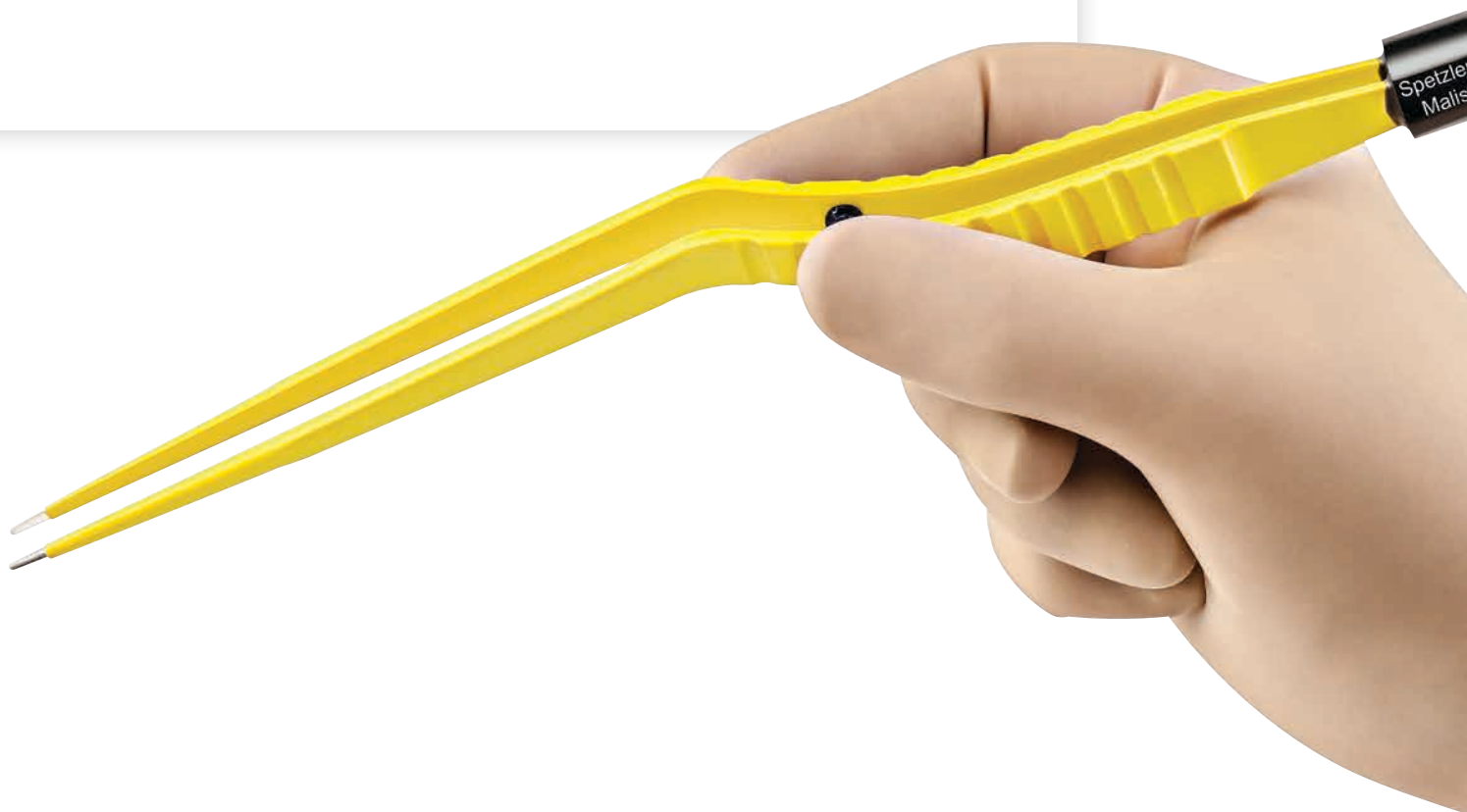

Tutte le nostre pinze bipolari antiaderenti **evitano l'accumulo di tessuto** e sono progettate per garantire una **visualizzazione eccellente**. Indipendentemente dalla pinza di elezione, Spetzler-Malis monouso o SILVERGlide riutilizzabile, siamo in grado di offrire pinze bipolari progettate appositamente per garantire **precisione e controllo**.



Garantisci equilibrio

e migliora la visualizzazione
grazie alle pinze bipolari
antiaderenti monouso
Spetzler-Malis

Le pinze bipolari monouso Spetzler-Malis offrono nuovi vantaggi a ogni singolo utilizzo

- Il monouso assicura un allineamento preciso della punta e prestazioni di coagulazione ripetibili
- La tecnologia antiaderente migliora le prestazioni
- L'elegante design a baionetta migliora la visualizzazione
- Il cavo leggero e flessibile e la spina di connessione remota consentono di ottenere il corretto bilanciamento
- La forza elastica aumenta il controllo e il riscontro tattile
- I tubi sottili trasparenti delle pinze bipolari per irrigazione consentono una migliore visualizzazione
- Il design a doppia irrigazione delle pinze bipolari per irrigazione conferisce l'idonea umidità alle punte ed ai vasi sanguigni



Pinze bipolari monouso Spetzler-Malis **standard**


Il cavo leggero e flessibile e la spina di connessione remota conferiscono il corretto bilanciamento

La forza elastica aumenta il controllo e il riscontro tattile

La tecnologia antiaderente migliora le prestazioni

L'elegante design a baionetta migliora la visualizzazione

Il monouso assicura un allineamento preciso della punta e prestazioni di coagulazione ripetibili

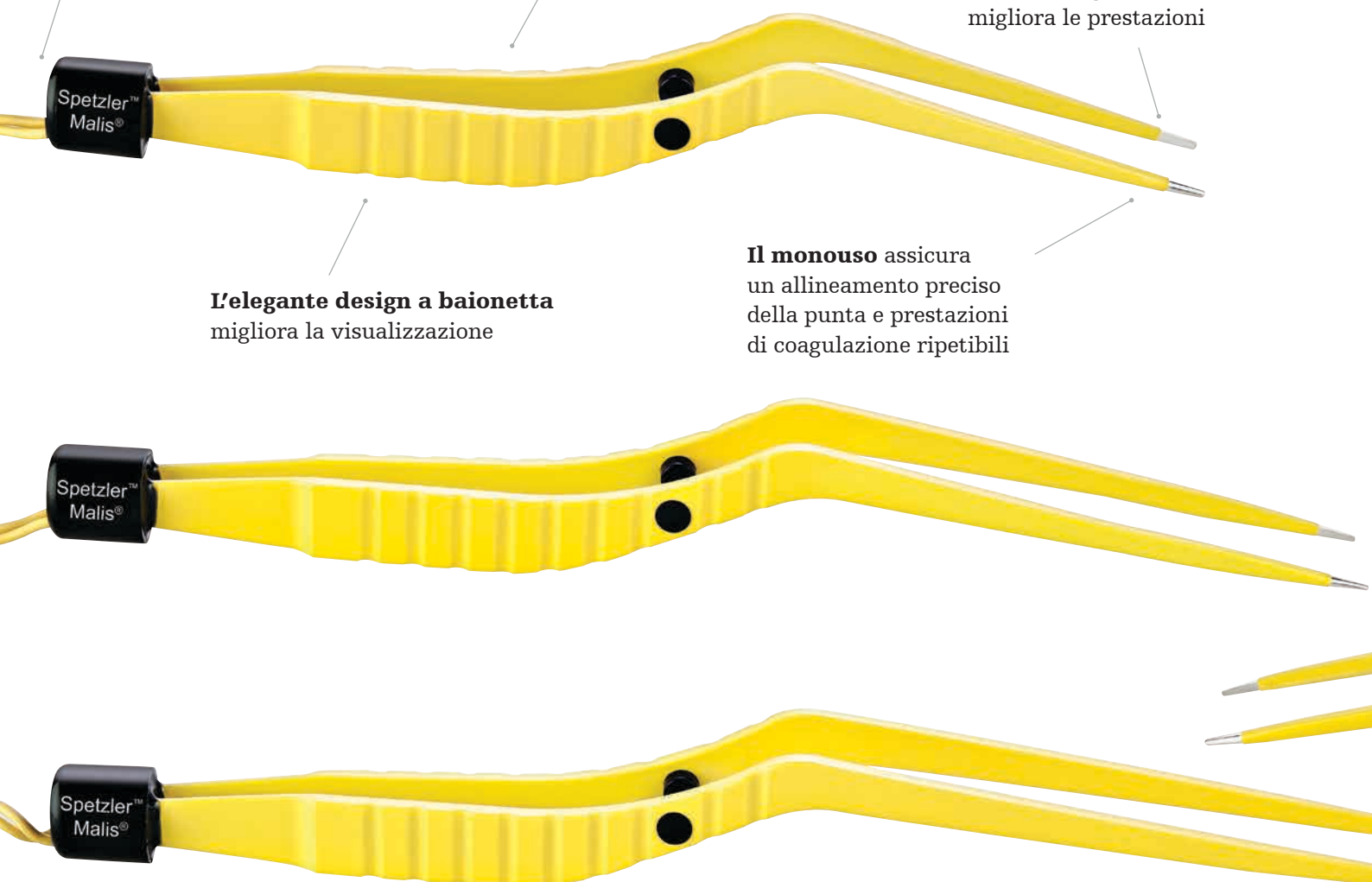

18 cm

6760-180-015, punta da 1,5 mm
6760-180-010, punta da 1,0 mm
6760-180-005, punta da 0,5 mm

20 cm

6760-200-015, punta da 1,5 mm
6760-200-010, punta da 1,0 mm
6760-200-005, punta da 0,5 mm


23 cm

6760-230-015, punta da 1,5 mm
6760-230-010, punta da 1,0 mm
6760-230-005, punta da 0,5 mm

Pinze bipolari Spetzler-Malis a doppia irrigazione monouso

Il design a doppia irrigazione conferisce l'ideale umidità alle punte ed ai vasi sanguigni

Tubi sottili trasparenti per una migliore visualizzazione

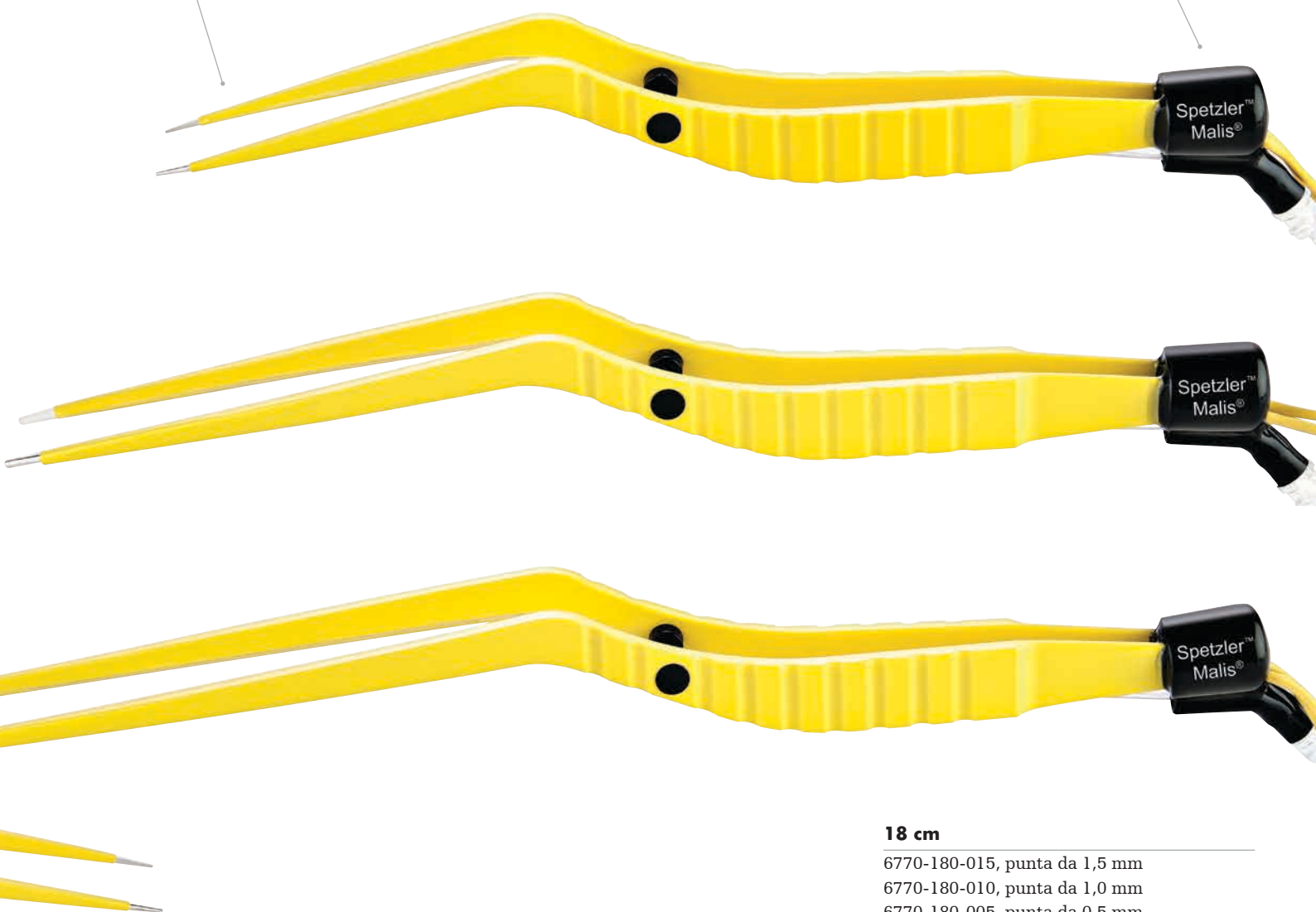

18 cm

6770-180-015, punta da 1,5 mm
6770-180-010, punta da 1,0 mm
6770-180-005, punta da 0,5 mm

20 cm

6770-200-015, punta da 1,5 mm
6770-200-010, punta da 1,0 mm
6770-200-005, punta da 0,5 mm

23 cm

6770-230-015, punta da 1,5 mm
6770-230-010, punta da 1,0 mm
6770-230-005, punta da 0,5 mm

Pinze bipolari Spetzler-Malis **sottili** monouso



20 cm

6780-200-015, punta da 1,5 mm
6780-200-010, punta da 1,0 mm
6780-200-005, punta da 0,5 mm

23 cm

6780-230-015, punta da 1,5 mm
6780-230-010, punta da 1,0 mm
6780-230-005, punta da 0,5 mm

Il profilo sottile offre
l'accesso a campi ristretti



Set di cavi e per irrigazione

di pinze bipolari Spetzler-Malis monouso

Set di cavi e tubi rotanti

6790-100-004 Set di tubi e cavi integrati per irrigatori bipolari, spina a pezzo unico monouso

Set di cavi e tubi a gravità

6790-100-002 Set integrato di tubi e cavi bipolari, spina a pezzo unico monouso

Set di soli cavi


6790-100-006 Set di cavi bipolari, spina a pezzo unico monouso

**Le pinze bipolari monouso
Spetzler-Malis offrono
nuovi vantaggi ad ogni
singolo utilizzo**

0,5 mm

1,0 mm

1,5 mm

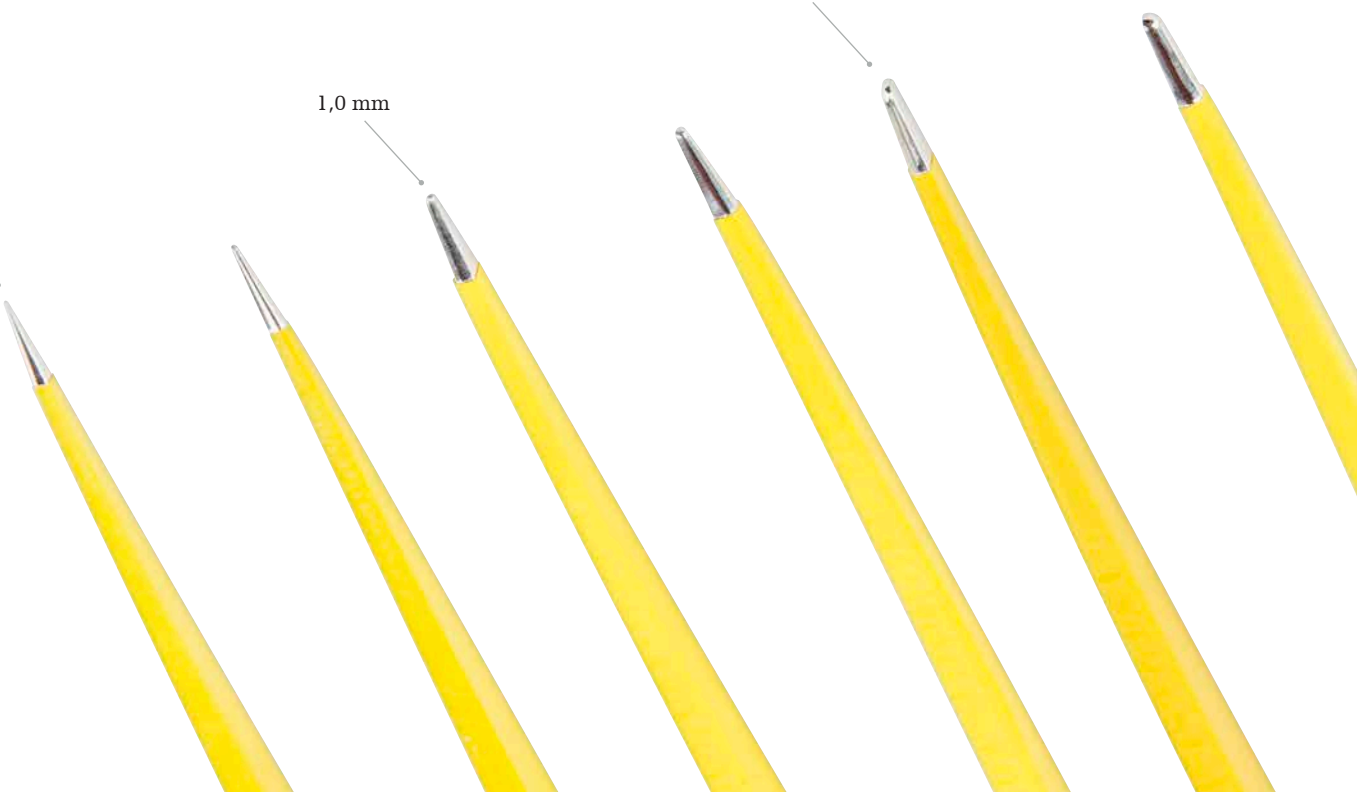

Pinze bipolari **ProSeries** antiaderenti SILVERGlide

Baionetta da 14,5 cm

6730-145-015 1,5 mm
6730-145-012 1,2 mm
6730-145-010 1,0 mm
6730-145-007 0,7 mm
6730-145-004 0,4 mm

Baionetta da 16 cm

6730-160-012 1,2 mm
6730-160-010 1,0 mm
6730-160-007 0,7 mm
6730-160-004 0,4 mm
6730-160-504, 45° verso l'alto, 0,4 mm

Baionetta da 19 cm

6730-190-020 2,0 mm
6730-190-015 1,5 mm
6730-190-012 1,2 mm
6730-190-010 1,0 mm
6730-190-007 0,7 mm
6730-190-004 0,4 mm
6730-190-512, 45° verso l'alto, 1,2 mm
6730-190-612, 45° verso il basso, 1,2 mm
6730-190-504, 45° verso l'alto, 0,4 mm

Baionetta da 22 cm

6730-220-020 2,0 mm
6730-220-015 1,5 mm
6730-220-012 1,2 mm
6730-220-007 0,7 mm
6730-220-004 0,4 mm
6730-220-512, 45° verso l'alto, 1,2 mm
6730-220-612, 45° verso il basso, 1,2 mm
6730-220-507, 45° verso l'alto, 0,7 mm
6730-220-607, 45° verso il basso, 0,7 mm
6730-220-307, 30° verso l'alto, 0,7 mm
6730-220-107, 15° verso l'alto, 0,7 mm

Baionetta da 24 cm

6730-240-020 2,0 mm
6730-240-015 1,5 mm
6730-240-012 1,2 mm
6730-240-007 0,7 mm
6730-240-004 0,4 mm
6730-240-807, 80° verso l'alto, 0,7 mm
6730-240-907, 80° verso il basso, 0,7 mm
6730-240-507, 45° verso l'alto, 0,7 mm
6730-240-607, 45° verso il basso, 0,7 mm

Baionetta da 28 cm

6730-280-015 1,5 mm
6730-280-012 1,2 mm

Baionetta diritta da 19 cm

6735-190-010 1,0 mm
6735-190-007 0,7 mm
6735-190-320, 30° verso l'alto, 2,0 mm
6735-190-310, 30° verso l'alto, 1,0 mm

La placcatura in argento
riduce il surriscaldamento,
i "punti caldi" e aderisce per
garantire prestazioni efficienti

I rebbi ultrasottili consentono un
migliore accesso durante gli interventi
chirurgici



Il **fermo guida**
riduce i movimenti di
resezione e aumenta
il controllo

**Aumento
della visibilità
grazie a un
design sottile**

Il **connettore tondo bipolare
standard** funziona con un'ampia
gamma di cavi e generatori
bipolari per elettrochirurgia

Impugnatura leggera
per migliore maneggevolezza
ed equilibrio

Quali caratteristiche contraddistinguono SILVERGlide?


L'assenza di accumulo di tessuto consente di operare senza interruzioni. Queste caratteristiche di antiaderenza restano invariate dopo l'uso. Il livello di diffusività termica della lega SILVERGlide è 37 volte superiore a quello dell'acciaio inossidabile comunemente utilizzato nelle pinze.

Pinza standard in acciaio inossidabile

Durante la coagulazione, si formano "punti caldi" derivanti da scintille



I "punti caldi" causano aderenza localizzata

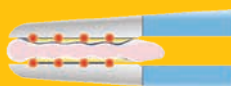

Il tessuto che aderisce alle punte della pinza viene strappato via




SILVERGlide antiaderente

Durante la coagulazione, iniziano a formarsi "punti caldi"



Il calore si diffonde rapidamente per evitare l'aderenza

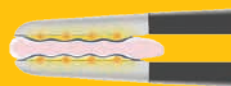

È possibile rimuovere la pinza senza che si verifichi aderenza al tessuto




● **Impugnatura:** leggera, facile da impugnare e manipolare

● **Fermo guida:** riduce i movimenti di resezione e aumenta il controllo

● **Rebbi:** i rebbi ultrasottili consentono un migliore accesso durante gli interventi chirurgici

● **Punte:** la placcatura in argento aiuta a dissipare rapidamente il calore, riducendo il surriscaldamento e i punti caldi che causano l'aderenza

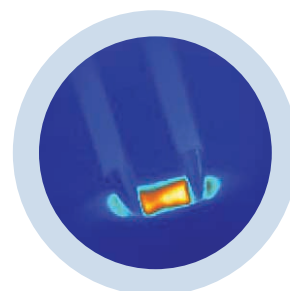

Generatore e sistema di irrigazione bipolari Malis

Irrigatore

Irrigatore integrato
opzionale



Generatore e sistema di irrigazione bipolari Malis

6700-313-500 Generatore bipolare Malis (include pedale e cavo di alimentazione)

6700-313-600 Irrigatore bipolare Malis (non include cavo di alimentazione)

6700-100-001 Cavo di alimentazione dell'irrigatore bipolare

6700-313-004 Cavo di interconnessione generatore/irrigatore bipolare

6700-313-002 Doppio pedale per taglio/coagulazione del generatore bipolare

6700-313-700 Carrello del generatore bipolare

Altri accessori

6700-313-003 Pedale singolo

6700-313-304 Cavo adattatore pedale singolo

Schermo a colori di grandi dimensioni

per facilitare la visualizzazione

La tecnologia DUAL WAVE

(DOPPIA ONDA) offre sicurezza
durante taglio e coagulazione

Il profilo utente programmabile

memorizza le informazioni per un
massimo di otto operatori

Le manopole CUT (TAGLIA) e COAG

(COAGULA) agevolano le regolazioni
rapide delle impostazioni

Le uscite bipolari
indipendenti migliorano
la funzionalità



Sia nella versione riutilizzabile o in quella monouso, le nostre pinze bipolari antiaderenti sono progettate per fungere da estensione specializzata di mani e occhi.

NSE

Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario.

Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze mediche ed esorta il personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la portata dell'offerta dei prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l'etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati, poiché la disponibilità dei prodotti è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Rivolgersi al proprio rappresentante Stryker in caso di domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: Malis, SILVERGlide, Spetzler-Malis e Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti qui rappresentati sono certificati dal marchio CE, conformemente ai regolamenti e alle direttive UE applicabili.

9100004379IT Rev. A
SDL 03/2020
2017-13266

Copyright © 2020 Stryker

stryker.com



Stryker Instruments
4100 East Milham Avenue
Kalamazoo, MI 49001 Stati Uniti
tel.: (+1) 269 323 7700
fax: (+1) 800 999 3811
stryker.com



0197