

stryker



CORE 2 Console

**Personalizar**

OS SEUS  
instrumentos

CORE 2 Console

## Benefícios que motivam

A CORE (Equipamento Consolidado de Bloco Operatório) 2 Console fornece um conveniente centro de controlo único para diversos instrumentos elétricos. Vejamos as suas múltiplas capacidades e benefícios para si e para os seus instrumentos.



### Versatilidade

- Aplicações ou procedimentos cirúrgicos na área da ortopedia, medicina dentária, otorrinolaringologia, neurologia, coluna vertebral, endoscopia e outras
- Fornece alimentação a brocas, serras e unidades motoras ósseas de pequenas e grandes dimensões, cortadores ("shavers") para articulações de pequenas e grandes dimensões e para otorrinolaringologia, interruptores de pé, moinho ósseo e irrigação
- Ajuda a posicionar ou a cortar parafusos, metais, arames, cavilhas e outros dispositivos de fixação

### Personalização única

- 100 predefinições para o utilizador, que podem ser armazenadas e transferidas
- A Software tátil com I.D. para uma torque, sensação tátil e desempenho de perfuração personalizados**
- B Aceleração e travagem ajustáveis**
- Débito de irrigação ajustável
- Opção de 2 interruptores de pé, cada um com 2 a 4 botões para definição das funções desejadas
- Vasta gama de portefólios de produtos compatíveis



## Custo e eficiência do fluxo de trabalho

- Uma consola única suporta várias especialidades; rentabilidade do capital investido
- Fornece alimentação a diversos dispositivos, reduzindo a necessidade de várias fontes de alimentação

### **C** Três portas para peças de mão, opera dois em simultâneo

### **D** Os anéis de iluminação coloridos (5) mostram a correspondência entre as brocas e os interruptores de pé, para uma interrupção mínima do seu fluxo de trabalho

### **E** Duas portas para interruptores de pé; capacidade para atribuir dois pedais a uma única peça de mão

### **F** Irrigação integrada; inserção e remoção num passo único

- Compatibilidade com gestão de equipamento inteligente (S.E.M., do inglês Smart Equipment Management) futura

## Simplicidade

- Uma programação inteligente ativa automaticamente ecrãs, opções e informações com base nos dispositivos ligados

- Ícones grandes e ecrã tátil de 7 polegadas com um amplo ângulo de visualização de 170°

### **G** Sinais sonoros distintos, que denotam diferentes ações/alertas

- Descrições de erro numéricas e escritas com dicas de resolução
- Navegação simples e intuitiva com atalhos para maior velocidade
- Rápida assistência técnica localizada e atualizações de USB no local
- A informação de contacto do representante de vendas da Stryker pode ser armazenada internamente

## Tecnologia melhorada

- O novo design baseia-se nas funcionalidades da CORE Console original da Stryker para desenvolver uma CORE 2 Console ainda melhor

- Desempenho de 13 anos comprovado

- 30.000 unidades vendidas em todo o mundo

### **D** Visibilidade com iluminação a cores de brocas e interruptores de pé correspondentes

# Personalização única

As opções de preferência pessoal estão organizadas em várias funcionalidades, dando-lhe possibilidades únicas de personalizar o seu sistema de modo a aperfeiçoar as suas competências e a sua satisfação.

## Software tátil com I.D.: a sua sensação tátil pessoal




## Software tátil com I.D.: a sua sensação tátil

O que é o software tátil com I.D.? É um software exclusivo que permite personalizar os motores elétricos da Stryker, como o  $\pi$ Drive e o  $\pi$ Drive+, e otimizar o seu desempenho. Dá-lhe a oportunidade de regular o desempenho e a resposta de perfuração para conseguir a sensação tátil que pretende. O software tátil com I.D. guardará as suas preferências e a CORE Console 2.0 estará pronta para utilizar quando o utilizador estiver.

### Trata-se de uma personalização completa, não apenas RPM/velocidade

- A sua definição favorita  $\tau$  para torque — 0%-100%
- Resposta de perfuração — sensibilidade baixa a alta ao aplicar pressão
- Sensação tátil e desempenho de perfuração
- Uma das muitas definições para a Opção de Motor
- Armazenado nas predefinições do utilizador, recuperado em dois toques

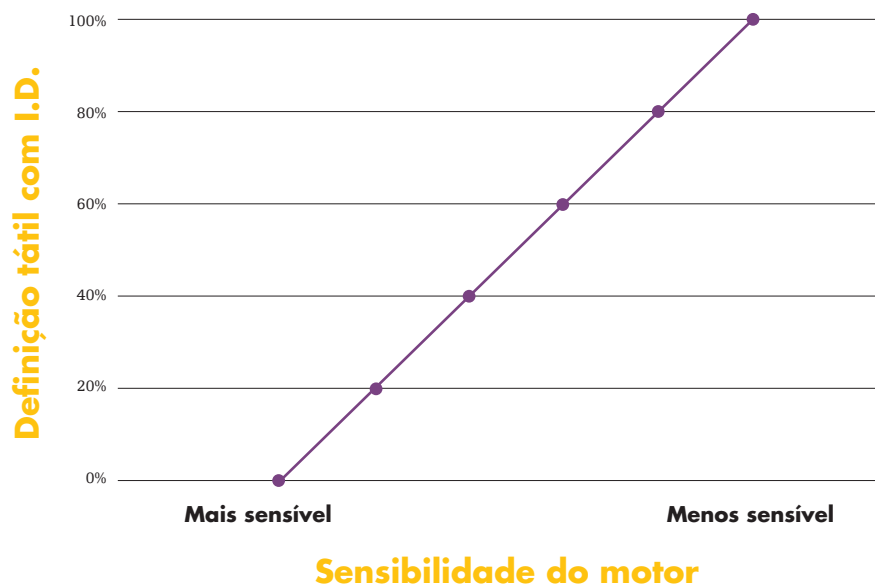


## Perfis de utilizador: prontos e à sua disposição



No bloco operatório, o médico e a sua equipa têm responsabilidades críticas em mente. As interrupções para definir as preferências do instrumento podem ser inconvenientes ou até desestabilizar o seu foco. Os nossos perfis de utilizador personalizados eliminam esta interrupção, permitindo recuperar todas as suas preferências cuidadosamente pré-planeadas em apenas dois toques.

- Basta definir uma vez e ficam guardadas (capacidade para 100)
- A ação copiar/editar permite a criação de vários perfis sem ter de começar do início
- Funcionalidades personalizáveis aparecem instantaneamente com base no dispositivo ligado e incluem RPM, velocidade de oscilação, sentido, modo fixo/variável e muitas mais
- Transferível para outras CORE 2 Consoles por USB

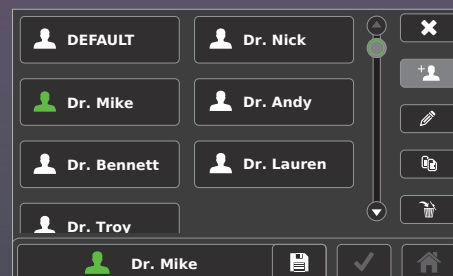

## Melhorar os seus instrumentos

Os portefólios de brocas e instrumentos só são tão bons quanto o seu operador. Projetada com os mais apurados pormenores, dá um maior poder aos seus instrumentos — e a si — com capacidade e benefícios acrescidos. Estas funcionalidades de valor acrescentado, juntamente com a potência, são o motivo pelo qual existem 30.000 unidades de CORE Console a ser utilizadas em todo o mundo.

	CORE 2 Console
Consola universal para utilização em várias especialidades (retorno do capital investido)	•
Vasta gama de portefólios de instrumentos compatíveis	•
Anéis de iluminação coloridos que indicam as correspondências de peças de mão/interruptores de pé	•
Opera duas brocas em simultâneo	•
Compatibilidade com gestão de equipamento inteligente (SEM)	•
<b>Personalização</b>	
Capacidade de criar e armazenar perfis de utilizador	•
Software tátil com I.D. para sensação tátil e resposta de perfuração	•
Fluxo de irrigação ajustável	•
Definições de travagem ajustáveis	•
Definições de aceleração ajustáveis	•
Opções de interruptor manual elétrico destacável	•
2 opções de interruptor de pé elétrico	•
Botões de interruptor de pé personalizáveis	•

# Solução Core

CORE é a sigla inglesa para Equipamento Consolidado de Bloco Operatório, mas o seu sentido figurativo é igualmente verdadeiro. A nossa consola é fundamental ("core") para o seu trabalho. Funciona com várias especialidades e com uma vasta gama de portefólios de brocas e instrumentos. Aqui fica um resumo de como a CORE 2 Console desempenha um papel integral na melhoria da eficiência e dos seus investimentos no bloco operatório.

## Múltiplas brocas, uma única consola

A nossa consola foi concebida com funcionalidades e software que o ajudam a tirar o máximo partido das brocas e dos instrumentos elétricos da Stryker, incluindo aqueles que são aqui apresentados. Paralelamente, a sua compatibilidade universal otimiza o seu investimento de capital, o espaço de trabalho e a formação relativa aos produtos.

Brocas de alta velocidade  
 $\pi$ drive e  $\pi$ drive+



Broca Sumex



Broca S2



Unidade motora universal CORE



Broca Saber



Moinho ósseo



## O seu sistema. A sua maneira.

Com interruptores de pé, cassetes de irrigação, um carrinho móvel e muitos outros acessórios, pode criar o sistema que quiser e facilitar a sua gestão.

### Uma gama de interruptores de pé

Pode escolher entre dois interruptores de pé, cada um com 2 a 4 botões para definir as funções desejadas, como ligar/desligar irrigação, sentido frente/reverso, mudança de atribuição de porta para broca, mudança de RPM, entre outras.



**Interruptor de pé NSE**  
com quatro botões personalizáveis (dois à esquerda, dois à direita)



**Interruptor de pé bidirecional**  
Pedal duplo com três botões personalizáveis



### Irrigação sem complicações

A nossa irrigação integrada e frontal, com inserção e remoção num só passo, facilita a configuração, sem componentes de hardware adicionais para afixar ou tubos para ligar. A CORE 2.0 Console inclui um suporte de soros de fácil utilização, purga automática e débito ajustável.

### Carrinho conveniente

Com oito gavetas, dois cestos e uma área de superfície no topo, este carrinho guarda a CORE 2 Console, os interruptores de pé e um inventário completo de acessórios de corte. Organize da forma que desejar e aplique etiquetas personalizadas às gavetas para facilitar a sua gestão.



## Estamos aqui para lhe prestar assistência

O seu representante de vendas NSE tem todo o prazer em ajudá-lo a tirar o máximo partido da sua CORE 2 Console e a configurá-la tendo em conta as suas necessidades e preferências específicas. Também poderá facilitar a implementação e a formação correspondentes. Os recursos adicionais incluem:

**Educação** — a Stryker apoia diversos eventos de educação médica e cursos de terceiros.

**Serviços ProCare** — aumente o seu sistema com uma diversidade de planos de assistência ProCare dedicados, fornecidos por técnicos localizados.

**Flex Financial** — disponibiliza várias opções de pagamento para ajudar a tornar novas aquisições possíveis. A disponibilidade do programa depende do país e da carteira de produtos. Verifique junto do seu representante de vendas local os detalhes e a disponibilidade.

### Encomende ou obtenha mais informações

Aqui estão apenas alguns dos componentes da CORE 2 Console disponíveis. Para uma listagem completa — ou mais informações sobre a CORE 2 Console ou a Stryker NSE — contacte o representante de vendas de NSE.

Referência	Descrição do produto
5400-052-000	CORE 2 Console
5400-410-000	Carrinho de acessórios CORE
5400-007-000	Interruptor de pé NSE
5100-008-000	Interruptor de pé bidirecional
5400-050-001	Cassete de irrigação descartável
5400-050-002	Cassete de irrigação descartável dupla

\* Os nomes e as preferências dos cirurgiões são meramente demonstrativos para retratar a personalização da consola

## Neuro, Spine & ENT

Este documento destina-se ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde.

Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo numa cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respectivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: CORE 2 Console,  $\pi$ drive,  $\pi$ drive+, RemB, S2, Saber, Sumex e Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou detentores.

Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.

Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre (European Free Trade Association — EFTA).



9100003853PT  
DLS 01/2018  
2017-15358

Copyright © 2018 Stryker  
stryker.com



Stryker  
4100 East Milham Avenue  
Kalamazoo, MI 49001 EUA  
Tel.: (+1) 269 323 7700  
Fax: (+1) 800 999 3811