

## Total Confiança®

### System 8 EZout Sistema Elétrico de Revisão Acetabular

#### Peça de mão

Uma peça de mão dedicada, alimentada por bateria, apresenta um movimento rotatório oscilante exclusivo, com gatilho de velocidade variável para corte controlado.



#### Adaptador

O acessório permite que o usuário controle a profundidade da lâmina enquanto gira 360 graus em torno da circunferência do copo durante o corte.



#### Lâminas

Cada lâmina é otimizada com geometria de dente curvada e raios de curvatura dupla para seguir com precisão o contorno do copo. As lâminas são oferecidas em 17 tamanhos (Copas de 42 mm a 74 mm), com lâminas curtas e longas embalados juntos.



#### Modelos de dimensionamento de plug

O componente do revestimento é removido e usado com esses modelos para determinar o tamanho do bujão necessário para corresponder ao diâmetro interno da copa.



#### Plugs de centralização

Uma vez dimensionado, o plugue central é inserido no copo e ancora o acessório para garantir um corte preciso. O sistema inclui 20 tamanhos de plugues (34 mm - 60 mm).



#### Ferramentas de dimensionamento de lâminas

Esses discos ancoram no bujão de centragem para medir o diâmetro externo do copo que está sendo removido e determinar o tamanho apropriado da lâmina.



#### Haste de teste

A haste de teste é conectada às ferramentas de dimensionamento da lâmina e aos plugues de centralização para melhorar o acesso no local da cirurgia.




#### Anéis de elevação

Os anéis riser estabilizam o bujão central quando usados em modelos de copo raso.



#### Bandejas de inserção

As bandejas foram projetadas para alojar todos os componentes do sistema EZout em um estojo ou recipiente de esterilização padrão de 3/4 por 8".

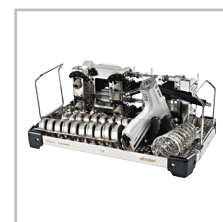

# Informações sobre pedidos.

## Para começar

### EZout Peça de mão

8202-000-000 EZout peça de mão

### EZout Adaptador

7202-100-000 EZout Adaptador

*2 adaptadores são recomendados por set*

### EZout Kit de acessórios

7202-999-000 Inclui:

- Haste de teste
- Modelos de dimensionamento de plug (2)
- Buchas de centralização (20)
- Ferramentas de dimensionamento de lâminas (4)
- Anéis de elevação (8)

### Processamento

7102-459-010 EZout Bandeja

7102-450-040 Case de esterilização  
3/4 size x 8" (200mm)

## Blades

Recommended starting quantities for initial inventory levels. Consult your Instruments sales representative to customise inventory levels based on your facility needs.

Qty.

2	7812-042-001K	42mm blade pack
2	7812-044-001K	44mm blade pack
2	7812-046-001K	46mm blade pack
2	7812-048-001K	48mm blade pack
2	7812-050-001K	50mm blade pack
2	7812-052-001K	52mm blade pack
2	7812-054-001K	54mm blade pack
2	7812-056-001K	56mm blade pack
2	7812-058-001K	58mm blade pack
2	7812-060-001K	60mm blade pack
2	7812-062-001K	62mm blade pack
2	7812-064-001K	64mm blade pack
2	7812-066-001K	66mm blade pack
2	7812-068-001K	68mm blade pack
2	7812-070-001K	70mm blade pack
2	7812-072-001K	72mm blade pack
2	7812-074-001K	74mm blade pack

## Componentes Individuais

### Peça de mão

8202-000-000 EZout peça de mão

### Adaptador

7202-100-000 EZout adaptador

### Modelos de dimensionamento de plug

7202-300-134 34-47mm plug sizing template

7202-300-148 48-60mm plug sizing template

### Buchas de centralização

7202-200-034 34mm centering plug

7202-200-036 36mm centering plug

7202-200-038 38mm centering plug

7202-200-040 40mm centering plug

7202-200-041 41mm centering plug

7202-200-042 42mm centering plug

7202-200-043 43mm centering plug

7202-200-044 44mm centering plug

7202-200-045 45mm centering plug

7202-200-046 46mm centering plug

7202-200-047 47mm centering plug

7202-200-048 48mm centering plug

7202-200-049 49mm centering plug

7202-200-050 50mm centering plug

7202-200-051 51mm centering plug

7202-200-052 52mm centering plug

7202-200-054 54mm centering plug

7202-200-056 56mm centering plug

7202-200-058 58mm centering plug

7202-200-060 60mm centering plug

### Ferramentas de dimensionamento de lâminas

7202-300-042 42-50mm blade sizing tool

7202-300-050 50-58mm blade sizing tool

7202-300-058 58-66mm blade sizing tool

7202-300-066 66-74mm blade sizing tool

### Haste de teste

7202-300-100 EZout Trial Rod

### Anéis de elevação

7202-200-134 34-36mm riser ring

7202-200-138 38-40mm riser ring

7202-200-141 41-43mm riser ring

7202-200-144 44-46mm riser ring

7202-200-147 47-49mm riser ring

7202-200-150 50-52mm riser ring

7202-200-154 54-56mm riser ring

7202-200-158 58-60mm riser ring

### Baterias

8215-000-000 Bateria de íons de lítio System 8, grande

7110-120-000 Carregador Universal

## Descartáveis

### Pacotes de lâminas\*\*

7812-042-001K 42mm blade pack

7812-044-001K 44mm blade pack

7812-046-001K 46mm blade pack

7812-048-001K 48mm blade pack

7812-050-001K 50mm blade pack

7812-052-001K 52mm blade pack

7812-054-001K 54mm blade pack

7812-056-001K 56mm blade pack

7812-058-001K 58mm blade pack

7812-060-001K 60mm blade pack

7812-062-001K 62mm blade pack

7812-064-001K 64mm blade pack

7812-066-001K 66mm blade pack

7812-068-001K 68mm blade pack

7812-070-001K 70mm blade pack

7812-072-001K 72mm blade pack

7812-074-001K 74mm blade pack

\*\* Cada pacote de lâminas inclui uma lâmina curta e uma longa

**Para outras informações entre em contato com seu Representante de vendas Stryker local ou entre em contato com o Atendimento ao cliente.**

As informações apresentadas têm como objetivo demonstrar a amplitude das ofertas de produtos da Stryker. Um profissional de saúde deve sempre consultar o folheto informativo, a etiqueta do produto e/ou as instruções de uso antes de usar qualquer produto da Stryker. Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados porque a disponibilidade do produto está sujeita às práticas regulatórias e/ou médicas em mercados individuais. Entre em contato com seu representante da Stryker se tiver dúvidas sobre a disponibilidade dos produtos da Stryker em sua área.

Consulte as Instruções de uso do sistema de revisão de acetabulares EZout da Stryker para obter detalhes completos.

Este documento destina-se a uso exclusivo dos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde sempre devem utilizar seu julgamento clínico profissional para decidirem se usam ou não um produto em particular no tratamento de um paciente. A Stryker não oferece qualquer assessoria médica e recomenda aos profissionais da saúde que estejam treinados no uso de qualquer produto antes de utilizá-lo em uma cirurgia. As informações apresentadas destinam-se a demonstrar um produto da Stryker. Os profissionais da saúde devem sempre consultar o folheto incluído com o produto, a rotulagem do produto e/ou as instruções de uso, incluindo as instruções de limpeza e esterilização (se aplicável) antes de usar qualquer produto Stryker. É possível que alguns produtos não estejam disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade de produtos está sujeita às legislações e/ou às práticas médicas vigentes em cada mercado. Favor contatar seu representante local da Stryker caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos Stryker em sua região. Todas as marcas registradas são marcas registradas de seus respectivos proprietários ou possuidores. A Stryker se reserva o direito de alterar especificações sem notificação.

Stryker Instruments  
4100 East Milham Avenue  
Kalamazoo, MI 49001 USA  
t: 269 323 7700 f: 800 999  
3811 toll free: 800 253 3210

INS-BR-EZOUT1 - 07/2020

© 2017 Stryker

www.strykermed.com